



クイックスタートガイド

RealGUIDE® 導入から
ガイドサポートサービス利用まで

Ver. 2026.07

ご利用の流れ

CT 撮影


インプラントシミュレーションソフト

 **RealGUIDE**[®]
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

製品紹介ページ



DICOM からの3D構築
& シミュレーション

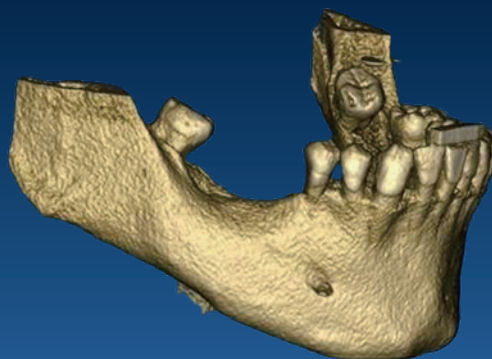


ガイドサポートサービス

**implant
concierge**[®] 

発注方法 >>> P12

データセットアップ
サービス

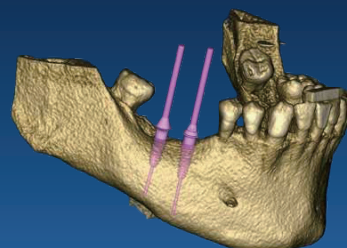



PLAN モジュール（無料）
インプラント治療の計画を立てることができるモジュールです。



GUIDE モジュール（有料）
インプラント治療計画のデータをもとに、サージカルガイドを設計できるモジュールです。


診断・患者説明

手術



サージカルガイドの設計



3Dプリンターを使用してサージカルガイドを出力

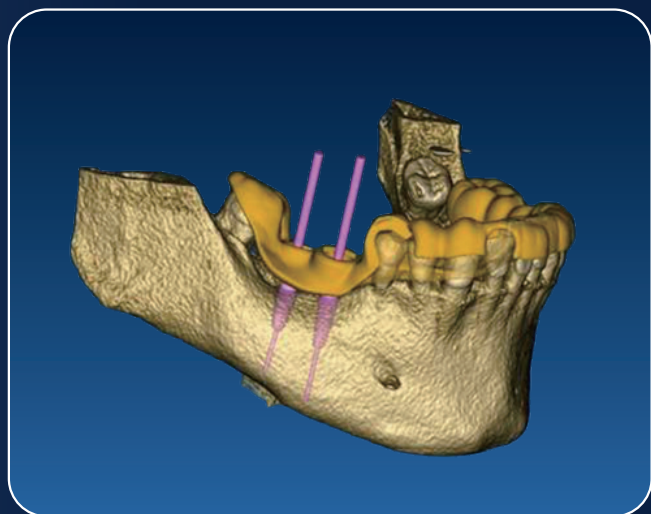

バーチャル ワックスアップ

デザインサービス

3Dプリント サービス

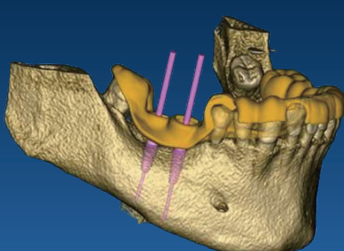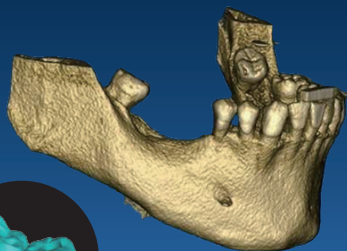

Contents

ご利用の流れ P2

RealGUIDE® ご利用について P5

Step 1

RealGUIDE® ソフトウェアをダウンロード P6

Step 2

アカウントの作成 P8

Step 3

新規患者フォルダの作成 P9

Step 4

DICOM、STL (PLY) のインポート P10

Step 5

シュミレーション・デザイン P12

RealGUIDE® ソフトウェア操作説明動画 P13

ガイドサポートサービス P14

Support Step 1

指示書の作成とアップロード P15

Support Step 2

症例を共有する P16

Support Step 3

症例を受け取る P17

Support Step 4

VIPセッション P18

RealGUIDE®
ソフトウェア

2つのプラン



Plan モジュール (無料)

- ・ 口腔内スキャナーによるデジタル印象データや補綴デザイン (STL) とCBCT (DICOM) の合成
- ・ オープンライブラリからインプラントとアバットメントのプランニングが可能
- ・ クラウド管理症例数は5症例

RealGUIDE® ご利用について

RealGUIDE®は、先生方の運用スタイルやご要望に合わせて、柔軟に活用いただけるインプラント治療支援ソフトウェアです。院内での運用からラボとの連携、弊社によるサポートサービスまで目的に合わせた最適な活用方法をお選びいただけます。

院内運用

ソフトウェアを活用した院内運用

ご自身でソフトウェアを操作し、シミュレーションや確認を行います。

ラボ連携

提携ラボとの データ共有による運用

お付き合いのあるラボとデータを共有、連携してデザイン作成やガイドプリントを進める方法です。

弊社 サポート

ガイドサポートサービスの ご利用

弊社の専門サポートを活用し、設計デザインやガイドプリントなどのサポートを受ける方法です。



GUIDE モジュール（有料）

- ・ 複数メーカーのインプラント選択が可能
- ・ デジタルワックスアップ機能
- ・ サージカルガイドデザイン機能
- ・ STLデータ加工機能（SandBox）
- ・ 最大100症例までのクラウド管理／共有



基本操作

ご準備いただくもの

- ・ PC
※ Windows OS、Mac OS どちらでも利用可能。
- ・ メールアカウント

ソフトウェア操作説明

動画でも操作方法をご確認いただけます。



Step 1 RealGUIDE®ソフトウェアをダウンロード

<https://www.realguide.com/ja/home/>



公式ホームページより「RealGUIDE®ダウンロード」ページに進みます。

※該当ページが見つからない場合は、「リアルガイド」で検索してください。


<https://www.realguide.com/ja/download/>



パソコンの OS を選び「ダウンロード」をクリックします。

Windows

Mac

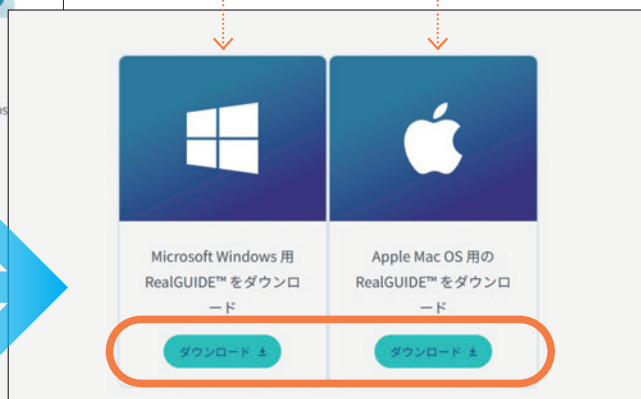

<https://business.form-mailer.jp/fms/22dccd73345080>



The image shows a web form titled "RealGUIDEソフトウェアダウンロード申込" (RealGUIDE Software Download Application) with the ZimVie logo at the top. The form contains several input fields: "氏名" (Name) with "姓" (Surname) and "名" (Given name) sub-fields, "区分" (Category) with radio buttons for "歯科医師" (Dentist), "技工士" (Technician), and "その他" (Other), "施設名/勤務先名" (Facility/Workplace Name), and "都道府県" (Prefecture) with a dropdown menu. Red "必須" (Required) labels are next to the name, category, facility name, and prefecture fields. Below the form, three blue downward-pointing arrows indicate the next step.

お申込みフォームに必要事項を記入して送信してください。こちらで登録は完了いたします。

ご指定のメールアドレスに送られてきたメールに記載されているURLをクリックしてください。ソフトウェアのダウンロードが開始されます。



ダウンロードしたソフトウェアをPCにインストールします。インストーラをクリックするとダウンロードがはじまります。



RealGUIDE® アイコンをクリックしてソフトウェアを起動します。



Step 2 アカウントの作成

ログイン/登録

Eメール（ユーザー名）

パスワード

サーバー

☐ パスワードの記憶

「新規ユーザーの作成」をクリックします。

登録

名前

姓/名

メールアドレス（ユーザー名）

パスワード

パスワードの再入力

組織名

組織タイプ

専門分野/役割

国名

郵便番号（ZIP）

電話番号

必要事項を入力し、登録をクリックします。

ご注意ください!

すべての項目を半角英数字でご入力ください。日本語の入力も可能ですが、文字化けが発生する場合がありますため、データが共有できない場合があります。

WELCOME to the RealGUIDE world!

noreply-jp@realguide.com
To 自分

RealGUIDE®
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

WELCOME to the RealGUIDE Z3D.

登録を完了するには、下記のリンクをクリックしてください。

https://production-jp.realguide.com/app-content/account_activate.html?id=2dfbedd36fb5e0c36f0b8a4791850cde67cb885ab09fe517

[ジンヴィ・ジャパン合同会社]

ZimVie

ご登録のメールアドレスに届いたメールに記載されたURLをクリックします。こちらで登録が完了します。



Step 3 新規患者フォルダの作成



新規患者のデータをインポートするためにフォルダを作成します。「患者の追加」をクリックします。



新規患者

名前： 苗字： 生年月日 (DD/MM/YYYY)： 医師：

注：

✓ OK ✕ キャンセル

患者情報を入力します。
名前／苗字／生年月日／注(メモ書き任意)
「OK」をクリックして登録を確定します。

ご注意ください!

半角英数字でご入力ください。
日本語の入力も可能ですが、文字
化けが発生する場合があります。
データが共有できない場合があります。




Step 4 DICOM、STL (PLY) のインポート


ご準備いただくもの

- ・ CTスキャンデータ DICOM
- ・ スキャンデータ STL (PLY)

該当のデータに応じていずれかのボタンをクリックすると、Windowsではエクスプローラー、MacではFinderが自動的に開きます。読み込むファイルを選択し、インポートを実行します。

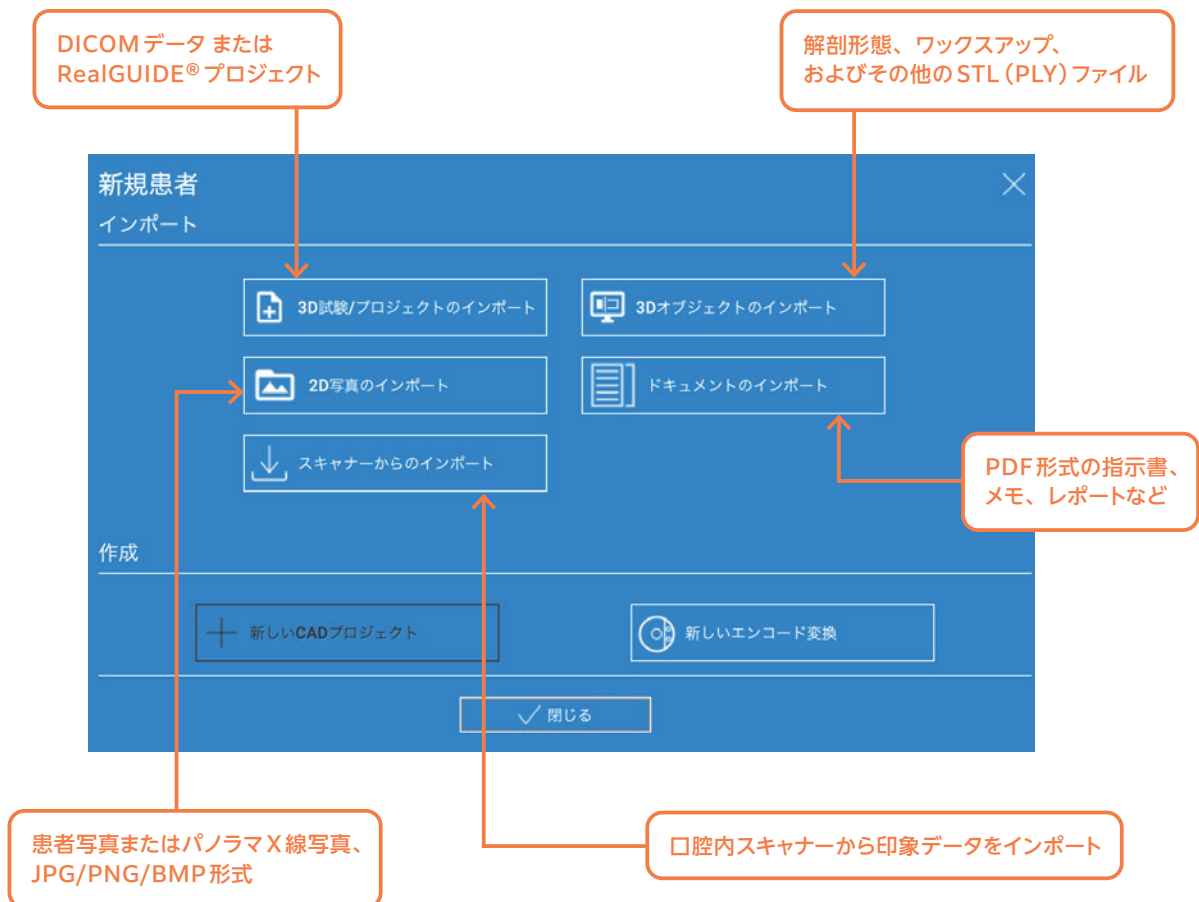

インポートしたデータは、画面上部にある患者ツールバーでご確認いただけます。

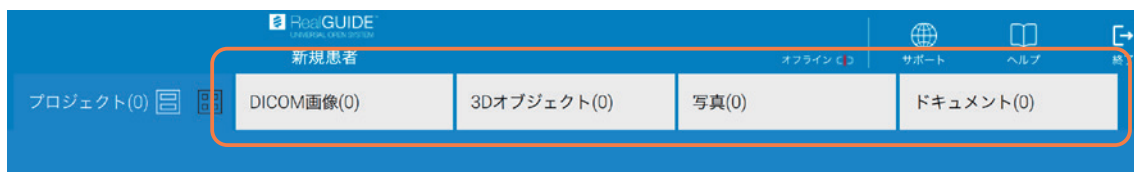

DICOM / プロジェクトのインポート

(DICOMデータ または RealGUIDE® プロジェクト)



DICOMデータのインポート

インポートした3Dプロジェクトは、患者ツールバーの「DICOM画像」からご確認ください。

DICOMフォルダのインポート

DICOMデータが非圧縮ファイルの場合はこちらをクリックしてください。

ファイルのインポート

DICOMデータが圧縮ファイルの場合はこちらをクリックしてください。


3D プロジェクトのインポート

(解剖形態、ワックスアップ、およびその他のSTL (PLY) ファイル)



STL (PLY) ファイルのインポート

選択したSTLファイルは、RealGUIDE®ソフトウェアに取り込まれます。取り込まれたSTLファイルは患者データに関連付けられ、後の工程（位置合わせやマッチングなど）で使用されます。

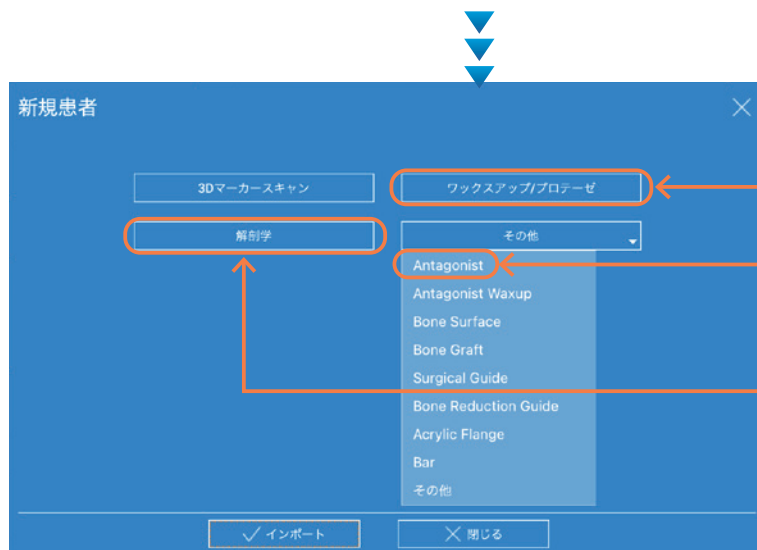

ワックスアップ/プロテーゼ
デジタルワックスアップ

Antagonist
対合歯

解剖学
解剖歯列
(作業用STLデータ)

※上記以外のデータにつきましても、同様にインポートが可能です。

Step 5 シミュレーション・デザイン

インポートした症例データを使用して、シミュレーションやデザインを行います。
ご利用方法に応じて、以下の内容をご参照ください。

- 1 **ご自身でソフトウェアを操作する場合**
→ P13 「RealGUIDE® ソフトウェア操作説明動画」をご覧ください。

- 2 **ラボと連携して進める場合**
→ データ送信方法は、P16 「症例データを共有する」を参考にしてください。

- 3 **弊社サポートサービスをご利用の場合**
→ 弊社サポート（インプラントコンシェルジュ）につきましては、P14 以降をご覧ください。

RealGUIDE® ソフトウェア操作説明動画

その他の機能については、こちらをご覧ください。

1 ユーザー作成 ソフトウェアのインストールから ユーザーアカウント新規作成方法 	2 インポートケース (患者データ) 新規でプランニングする患者の DICOM と STL のインポート方法 	3 インポートケース (ダブルスキャン) 無歯顎症例時のデュアルスキャン プロトコルを含む患者データの セットアップ方法 
4 VOI 設定 DICOM データの ボリュームサイズ設定操作方法 	5 インポートデータの 重ね合わせ 口腔内の STL データと CAD ワックスアップの重ね合わせ方法 	6 CPR 設定 
7 3D 設定 3D 可視化された DICOM データの、骨、軟組織、 歯牙などを微調整する方法 	8 下顎管の描写 下顎管（神経管）の描写や 微調整方法 	9 歯牙の設定 CAD ワックスアップの識別や バーチャルワックスアップの 設定方法 
10 インプラント プランニング (部分欠損) レイアウトビューの切り替え、 インプラントの配置や微調整など パーシャルケースのインプラント 3D プランニングにおける基本操作方法 	11 インプラント プランニング (全顎) フルアーチケースにおける インプラントの傾斜配置、 アバットメントの表示、 および微調整方法 	12 患者のプロジェクトを 共有する クラウドデータベースへ プロジェクトデータの アップロード方法、 他のユーザーとのデータ共有方法 

ガイドサポートサービス

ガイドサポートサービス（インプラントコンシェルジュ）は、ガイド作製をサポートするサービス（有料）です。

※ご発注には、RealGUIDE® ソフトウェアのインストールとアカウントの作成（P6～8）、および、新規患者フォルダの作成、DICOM／STL（PLY）データのインポート（P9～11）が必要です。



① データセットアップサービス

- ・ 模型合成
- ・ 下顎管仮抽出
- ・ インプラント仮置き
- ・ データマッチング
- ・ バーチャルワックスアップ

② VIPセッション

③ ガイドデザインサービス

④ 3Dプリントサービス

Premium
Support

プレミアムサポート

上記 ①～④ のサービスをトータルでご利用いただける、包括的なサポートプランです。

こんな方におすすめです！

- ・ はじめてご利用される方
- ・ 操作に不安がある方
- ・ 効率よく作業を進めたい方

Custom
Support

カスタムサポート

ご要望や状況に合わせて、必要なサービスを上記 ①～④ から選択いただける柔軟なサポートプランです。

こんな方におすすめです！

- ・ 必要なサービスだけ利用したい方
- ・ ご予算に合わせて利用したい方

指示書の作成とアップロード

※ガイドサポートサービスをご利用いただくには、RealGUIDE® ソフトウェアのインストールとアカウントの作成（P6～8）、および、新規患者フォルダの作成、DICOM/STL (PLY) データのインポート（P9～11）が必要です。

「K-4 インプラントコンシェルジュ 技工指示書」

を DTI ホームページからダウンロードしてご記入ください。

<https://dti-cadcam.com/instruction/index.html>



K-4 DTI インプラントコンシェルジュ 技工指示書
email : info.ic@zimvie.com

※は必須項目です

年 月 日 年 月 日

※フリガナ

※患者様名 姓 性別 (□男 □女) 年齢 (才)

※請求先 ※納品先 □の欄に☑を付けてください。(請求先に☑がない場合は、技工所 様への請求とさせていただきます)

※歯科医院名 様

※住所 〒

※TEL E-mail

※施設名 様

※住所 〒

※TEL E-mail

※ 部位と設計 【※注内容に応じて、□の欄に☑を付けてください。】

制作物を選択してください。

ICEU-ITP1-SA	ICEU-ITP2-SA	ICEU-ITP3-SA
データセットアッププラン (1 Imp)	データセットアッププラン (2 Imp)	データセットアッププラン (3 Imp 以上)
ICEU-VIP1-SA	ICEU-VIP2-SA	ICEU-VIP3-SA
VIP セッション (1 Imp)	VIP セッション (2 Imp)	VIP セッション (3 Imp 以上)
ICEU-GDES-I1	ICEU-GDES-I2	ICEU-GDES-I3
サージカルガイドデザインのみ (1 Imp)	サージカルガイドデザインのみ (2 Imp)	サージカルガイドデザインのみ (3 Imp 以上)
ICEU-GDPRNT-I1	ICEU-GDPRNT-I2	ICEU-GDPRNT-I3
サージカルガイド プリントとスリーブ (1 Imp)	サージカルガイド プリントとスリーブ (2 Imp)	サージカルガイド プリントとスリーブ (3 Imp)
IC-GDPRNT-I1	IC-GDPRNT-I2	IC-GDPRNT-I3
サージカルガイド プリントのみ (1 Imp)	サージカルガイド プリントのみ (2 Imp)	サージカルガイド プリントのみ (3 Imp 以上)
IC-FCSRC-PR	IC-PROVIDES-SA	IC-SIDSLV
フルカラーアーススクリュー固定クラウン プリントと完成	プロビジョナル デザイン	サイドエントリースリーブ

【増入予定】

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

※データセットアップ：DICOMデータ、石膏模型/IOSデータ/デュアルスキャンのデータをマッピング
※デュアルスキャン：多数歯大綱や歯列矯正装置がある場合において、CBCTで骨格と補綴物のデジタルデータを別々にスキャンし、それらをマッピングすることで正確な3Dデータを作成する撮影方法です。

※ データセットアップ詳細

部位	インプラントの種類	システム	使用するガイドキット
	メーカー		☐ Biomet 3i Navigator Tapered Guided Kit ☐ Biomet 3i Navigator Parallel Walled Guided Kit ☐ Zimmer Tube Adapter Kit ☐ Spline Surgical Guide Drill Kit ☐ その他 ()

即時荷重：□有 □無
ガイドの支持種類：□歯支持 □粘膜支持 □骨支持 □アンカー使用
骨造成：□GBR □ソケットリフト □サイナスリフト □ボーングラフト
プロビジョナル：□要 □不要

フラップレス手術：□有 □無
修復タイプ：□スクリュー固定式 □セメント固定式
バーチャルワックスアップ：□要 □不要

※輸入予定のバーチャルワックスアップはデータセットアップ時に添付されます。

設計指示詳細

上記設計内容は歯科医師がインプラントの位置を検討し、決定した指示内容と一致していることを確認済みです。
本ガイドは歯科医師の指示に基づき設計・作成されたものであることを確認しました。手術の最終判断は、当該指示を出した歯科医師の責任において行われるものとします。

※ 免状について
※ 歯科技工士は歯科医師の指示に基づき技工士を行うこととされているため（歯科技工士法第18条）、本技工士は歯科医師が発行する歯科技工指示書に基づき製作いたします。
※ 歯科医師は必要事項を記載した歯科技工指示書を発行する必要があります。（歯科技工士法第19条の2）
※ 納期につきましては、HPよりご確認ください。地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
※ 技工指示書で作業されたものは、返品および交換はいたしません。

受託歯科技工所：Dental Technology Institute (DTI) 東京
〒130-0014 東京都豊田区亀沢 4-9-4-101

品質管理基準書に基づく DTI 0164


必須項目

- ・ 患者名
- ・ 歯科医院情報
- ・ メールアドレス
- ・ 使用予定のインプラントシステム
- ・ 使用する外科キット
- ・ 希望納期

※上記以外の欄は任意記入です。
必要に応じてご記入ください。

ご注意ください!

ファイル名は半角英数字、PDF
形式で保存してください。

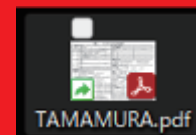

新規患者
インポート

3D試験/プロジェクトのインポート

3Dオブジェクトのインポート

2D写真のインポート

ドキュメントのインポート

スキャナーからのインポート

技工指示書の添付

記入・保存したPDFの技工指示書を「ドキュメントのインポート」からインポートしてください。※ファイル名が半角英数字であることをご確認ください。



インポートした技工指示書は、患者ツールバーの「ドキュメント」からご確認いただけます。

症例データを共有する

※症例データを共有していただくには、RealGUIDE®ソフトウェアのインストールとアカウントの作成（P6～8）、および、新規患者フォルダの作成、DICOM／STL（PLY）データのインポート（P9～11）が必要です。


① 症例ファイル名が半角英数字にしてください、文字化けしていないことを確認します。

注意：全角文字や文字化けがある場合、アップロードやデータのダウンロードに失敗する可能性があります。ファイル名は必ず半角英数字で保存してください。

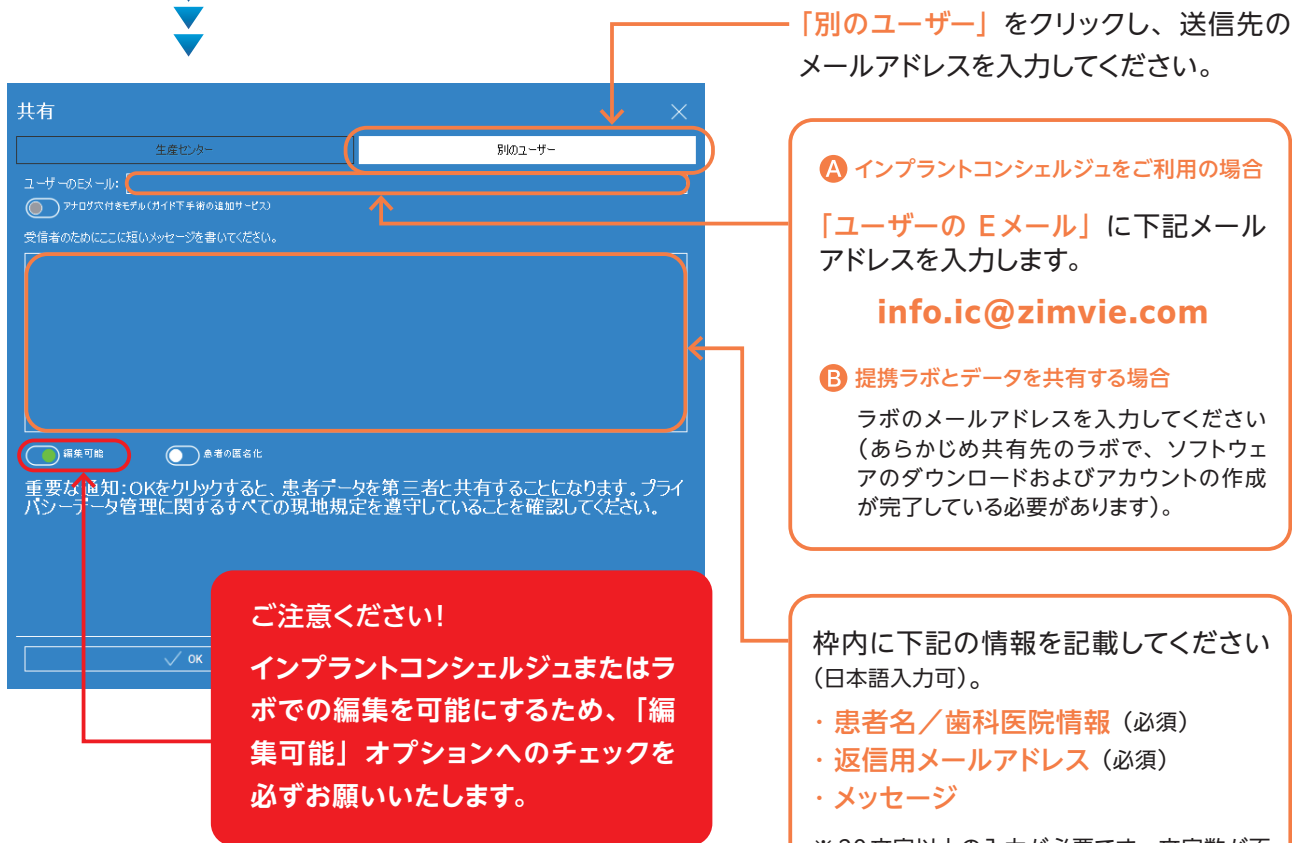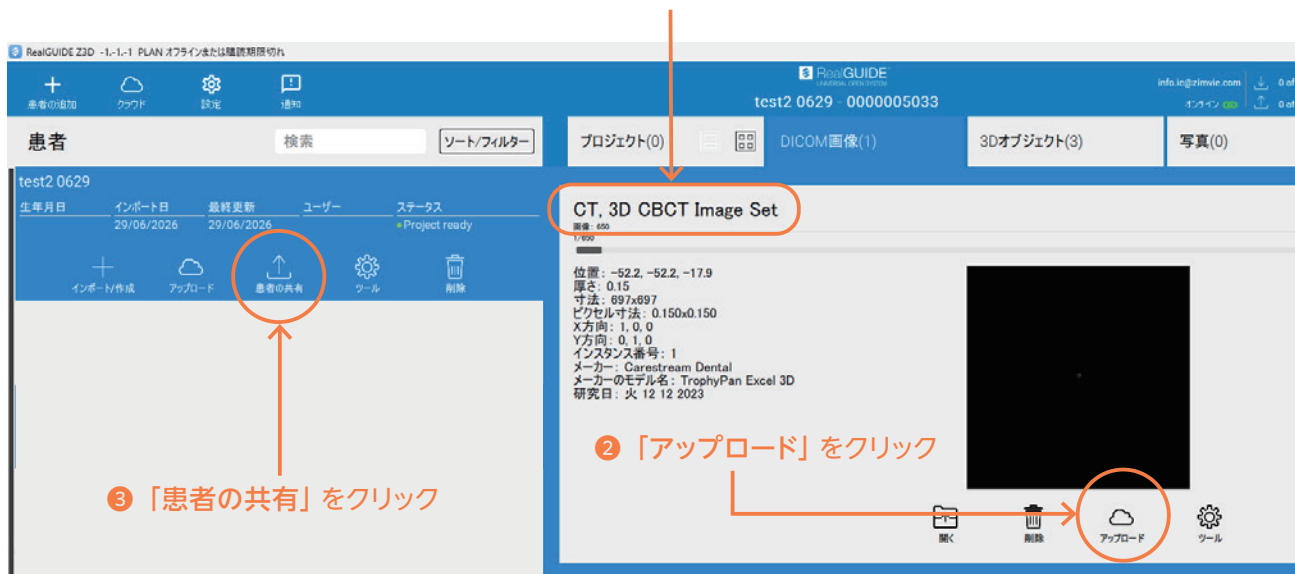

症例データを受け取る

- ① データセットアップご依頼受付後、2 営業日以内にセットアップされた症例データを RealGUIDE® 上で共有し、インプラントコンシェルジュよりメールにてご連絡いたします。

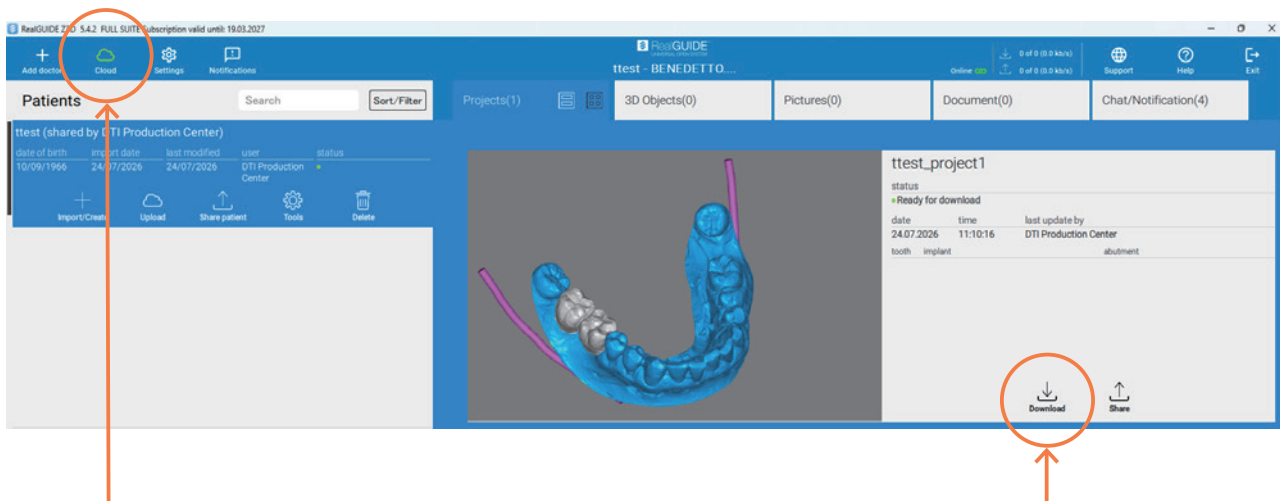

クラウド表示に切り替え、症例データをダウンロードします。
続いて、「Open」 ボタンをクリックして症例データを開きます。

- ② ソフトウェア上で症例データがご指示どおりにセットアップされていることをご確認ください。



A 問題がない場合

その旨をメール (info.ic@zimvie.com)
までご返信ください。

B 修正が必要な場合

ご自身でデータを修正し再度アップロード
をしていただくか、インプラントコンシェル
ジュへ修正をご依頼ください。操作方法に
つきまして個別のサポートをご希望の場合
は、VIPセッション（有料）によるサポー
トサービスをご利用いただけます。

デザインが確定したら、ガイドデザインの作製に進みます。

VIP セッション

「TeamViewer」で画面を共有し、
コーディネーターとその場でデータセットアップを確定させるオンラインサービスです。

ご依頼の方法

プラントコンシェルジュサービス **Support Step 1～3** (P13～15)の手順を完了後、プライムプラントコンシェルジュから届くメールへご返信のうえ、VIPセッションをお申込みください。

※VIPセッションのお申込みには、CT (DICOM) データおよび模型 (STL) データをRealGUIDEにて共有いただいている必要があります。

日時確定


インプラントコンシェルジュから送付されるメールにて、候補日の中から希望日時を確定してください。

当日

TeamViewerを起動し、セッションを開始します。

TeamViewer QSのダウンロード、使用方法

<https://www.teamviewer.com/ja/solutions/use-cases/quicksupport/>

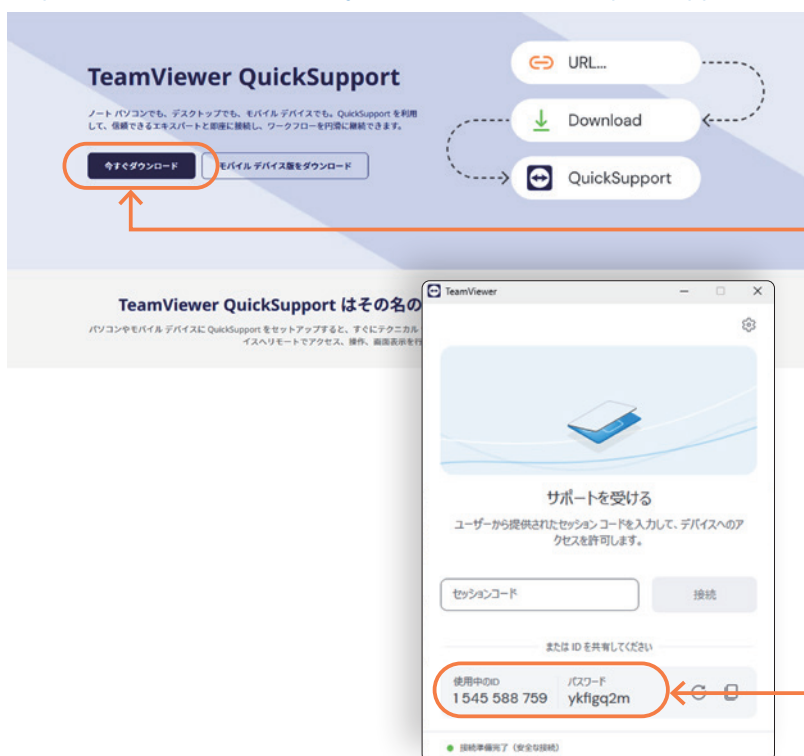

公式ページよりダウンロードしてください。

※該当ページが見つからない場合は、「チームビューア QS」で検索してください。

「今すぐダウンロード」ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

TeamViewer QS を起動すると、接続用の ID とパスワードが表示されます。表示された ID とパスワードを担当者へお知らせください。

ガイドスリーブ ラインナップ

提携ラボおよび院内でサージカルガイドを作製するには、専用ガイドスリーブが必要となります。
用途に応じて選択いただけるよう、ZimVie ガイドスリーブのラインナップを以下にご案内いたします。

Spline ガイドスリーブ



サージカルスリーブ (5個入)
Splineガイド用

製品番号: PR0091



スプライン
ガイド専用 サージカルキット

※Splineインプラント
3.25~3.75mmDの8~13mmに対応。

T3 / T3PRO ナビゲーター マスターチューブ



ナビゲーター
マスターチューブ

4.1mm (D) X4.0mm (L) (25個入)

製品番号: SGMT44



ナビゲーター
マスターチューブ

5.0mm (D) X4.0mm (L) (25個入)

製品番号: SGMT54



サーテン
インプラント用
テーパードナビゲーター
サージカルキット

製品番号: SGTIKIT

TSX / TSV サージカルガイドチューブ



サージカルガイドチューブ

Φ4.2 mm

製品番号: TUBE42



サージカルガイドチューブ

Φ5.3 mm

製品番号: TUBE53



ガイドドサージェリー
ドリルモジュールキット

製品番号: GSMOD



チューブアダプターキット

製品番号: 受注発注 TADKIT

ガイドスリーブのご注文は ZimVie Japan (0120-418-890) までお願いいたします。

販売名: リアルガイド 医療機器承認番号: 30600BZX00282000
販売名: スプライン サージカルインストルメンツ 医療機器認証番号229AGBZX00068000
販売名: スプラインキャリア 医療機器届出番号13B1X00079000044
販売名: IC ガイドスリーブ 医療機器届出番号: 13B1X00079000151

販売名: ナビゲーター マスターチューブ 医療機器届出番号: 13B1X00079000087
販売名: テーパードナビゲーター サージカルキット 医療機器届出番号: 13B1X00079000093
販売名: TSVサージカルツール 医療機器届出番号: 13B1X00079000055

●製造販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2026 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0248 2026/07

Unless otherwise indicated, as referenced herein, all trademarks and intellectual property rights are the property of ZimVie Inc. and its affiliates; and all products are manufactured by one or more of the dental subsidiaries of ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) and distributed by ZimVie US Corp LLC and its authorized marketing partners. For additional product information, please refer to the individual product labeling or instructions for use. Product clearance and availability may be limited to certain countries/regions. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. Distribution to any other recipient is prohibited. This material may not be copied or reprinted without the express written consent of ZimVie and is not for distribution in France.