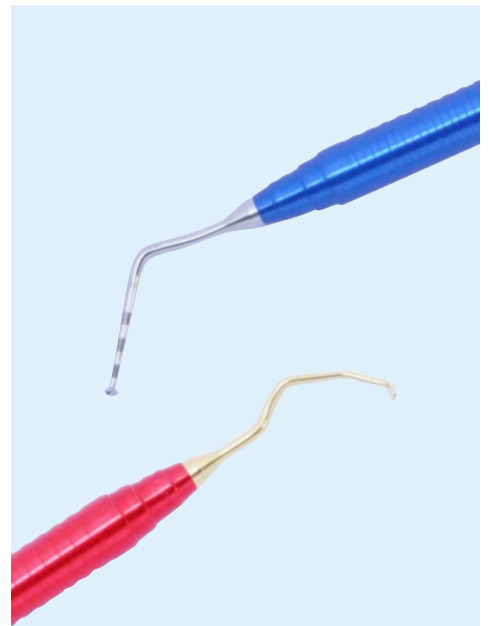
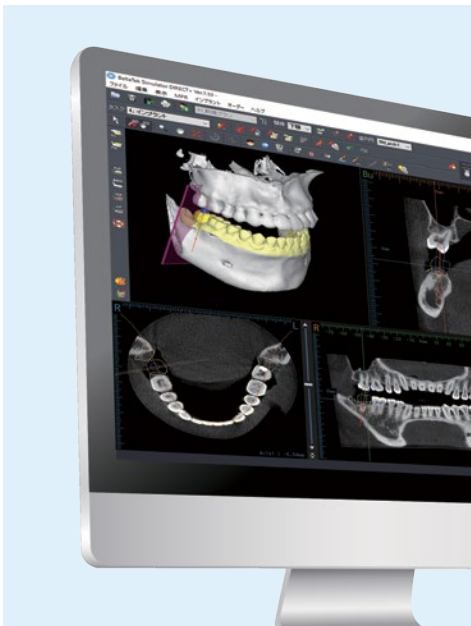


インプラント外科器具総合カタログ

2024年9月改訂



暫間インプラント ————— P4

暫間インプラント

一般外科器具 ————— P5

一般外科器具

シミュレーションソフト ————— P17

シミュレーションソフト

バイオマテリアル ————— P18

バイオマテリアル

マイクロスコープ ————— P20

マイクロスコープ


その他 ————— P22


その他

HMインプラント(暫間補綴用インプラント)

「HM インプラント」は、チタン合金 (Ti- 6Al- 4V) 製の暫間補綴用インプラントです。フィクスチャーの治癒期間中に、プロビジョナル・レストレーションの装着を必要とする症例において使用します。「HM インプラント」を用いることで、治癒を促進し審美性に優れた機能的なプロビジョナル・レストレーションを患者さまに提供することが可能となります。

HMインプラント(暫間補綴用インプラント)

			製品番号
	長さ		
	2本	10mm	PR0050
	2本	13mm	PR0051
	HMインプラントL (2.0mmD)		
	2本	10mm	PR0052
	2本	13mm	PR0053

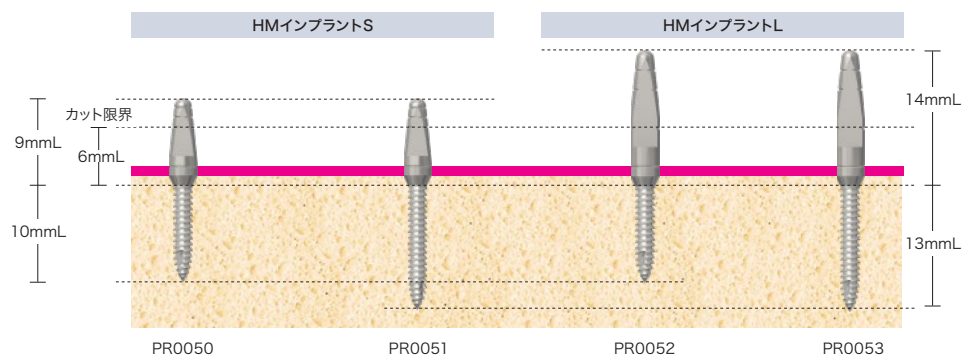


HMインプラント サージカルツール

HMインプラント専用のドリルです。

		製品番号
	HMインプラント サージカル ケット キット内容: 1.3mmDドリル ショートタイプ (NS0002) 1.3mmDドリル ロングタイプ (NS0003) HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ (PR0041) HMインプラントドライバー ラチェットタイプ (PR0042) O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用 5個 (SU1014) HMインプラント サージカルケース (IPPI01)	HA0051
	1.3mmDドリル ショートタイプ	NS0002
	1.3mmDドリル ロングタイプ	NS0003
	HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ HMインプラントをハンドピースで埋入する際に装着し使用します。	PR0041
	HMインプラントドライバー ラチェットタイプ HMインプラントをヘルムート トルクラチェット [Z00007] (P23掲載) で埋入する際に装着し使用します。	PR0042
	O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用 HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ [PR0041] と、 HMインプラントドライバー ラチェットタイプ [PR0042] の交換用O-リングです。	5個 SU1014
	HMインプラント サージカルケース HMインプラント用のドリル、ドライバーを収納するケースです。	IPPI01


HAリムーバーセット

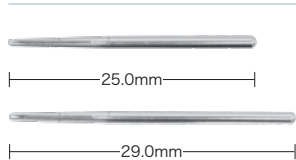先端には縦溝が3本あり、歯牙や骨の切削がスムーズに行えるダイヤモンドバーです。先端部0.1mmに天然ダイヤモンドを砥着しています。


	製品番号	
	HAリムーバーセット 0.8mmD/25mmL 1本、 0.8mmD/29mmL 1本	2本セット H00021

HA Premium

歯槽骨の幅径拡大およびインプラント窩形成に使用します。スクリュータイプのため無理なく骨を圧縮できます。

	製品番号	
	リッジエキスパンダー HAプレミアム	DEN001

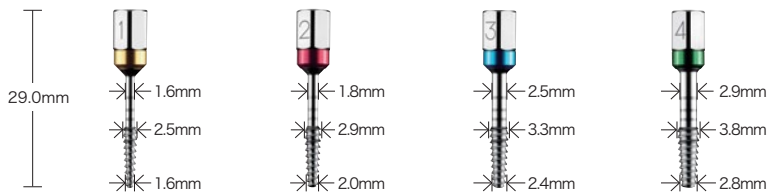※当製品はセットでの販売のみとなります。単品販売はございません。
※バースタンド付属(滅菌可能)



装着するシステムのパーツ

 Z00007 ヘルムートトルクラチェット ¥51,000	➔	 PR0023 トルクラチェットインサート ショート (14mm) ¥8,800	 PR0024 トルクラチェットインサート ロング (17mm) ¥8,800
 コントラ装着	➔	 PR0025 ハンドピースドライバー ¥8,800	

Stopper Drill KIT

ドリルのデプスゲージを確認せず形成が可能です。

	製品番号	
	Stopper Drill KIT キット内容: ●ドリル 24本 2.0mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm 2.8mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm 3.3mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm 3.6mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm 4.2mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm 4.8mmD/7mm・8.5mm・10mm・11.5mm ●専用ケース	24本セット GE0003



イミディエイトインプラントシステム



		製品番号
イミディエイトインプラントシステム キット内容:		
●ドリル12本		
・ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD、3mmD、4mmD各1本		
・メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー 2mmD/25mm、29mm、34mm各1本 3mmD/25mm、29mm、34mm各1本	12本セット	HA0102
・ISF ダイヤモンドバー 0.9mmD/26mm×1本、0.9mmD/34mm×2本		
●サージカルケース		



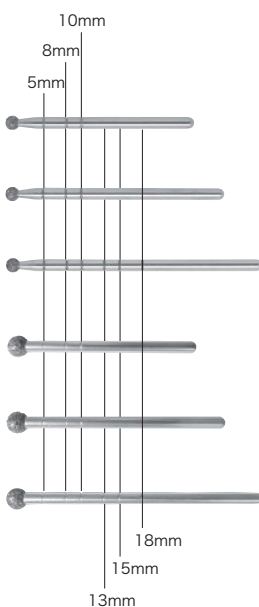
ダイヤモンド ガイドドリル

メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー

ISF ダイヤモンドバー

メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー

軸部が長いため、抜歯窩内での口腔内操作が容易になります。抜歯即時埋入の必需品です。




		製品番号
メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー アソートセット セット内容:H00008~13までの製品が各1本ずつ入っております。 ※それぞれ回転数が異なりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。	6本セット	H00007
ティッシュダイヤモンドバー [M-20025] 2mmD/25mmL 回転数10万回転以下	3本	H00008
ティッシュダイヤモンドバー [M-20029] 2mmD/29mmL 回転数10万回転以下	3本	H00009
ティッシュダイヤモンドバー [M-20034] 2mmD/34mmL 回転数3万回転以下	3本	H00012
ティッシュダイヤモンドバー [M-30025] 3mmD/25mmL 回転数10万回転以下	3本	H00010
ティッシュダイヤモンドバー [M-30029] 3mmD/29mmL 回転数10万回転以下	3本	H00011
ティッシュダイヤモンドバー [M-30034] 3mmD/34mmL 回転数3万回転以下	3本	H00013

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

ISF ダイヤモンドバー

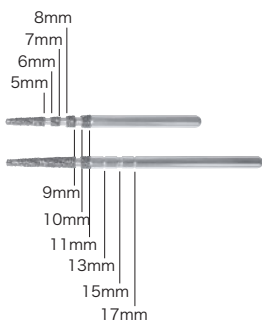先端までダイヤモンド加工が施されており、先端および側方への骨切削を可能にします。




		製品番号
ISF ダイヤモンドバー 0.9mmD/26mmL 1本、 0.9mmD/34mmL 2本 回転数4万回転以下	3本セット	H00017

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

ダイヤモンド ガイドドリル

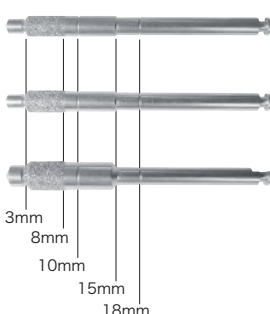側方への骨切削を可能にし、インプラント窩の形成を容易にします。



		製品番号
ダイヤモンド ガイドドリル 3mmD/35mmL 1本 4mmD/35mmL 1本 回転数1,200回転以下	2本セット	H00014
ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD/35mmL 回転数1,200回転以下		H00018
ダイヤモンド ガイドドリル 3mmD/35mmL 回転数1,200回転以下		H00015
ダイヤモンド ガイドドリル 4mmD/35mmL 回転数1,200回転以下		H00016

使用上のご注意 外科用マイクロモーターにて外部注水で使用してください。


※ダイヤモンド ガイドドリル3mmD・4mmDは初回、2個セット[H00014]での販売となります。
セットでご購入いただいたお客様のみ、単品販売が可能です。

サージカルトレー



		製品番号
イミディエイトインプラントシステム サージカルケース		IPPI02

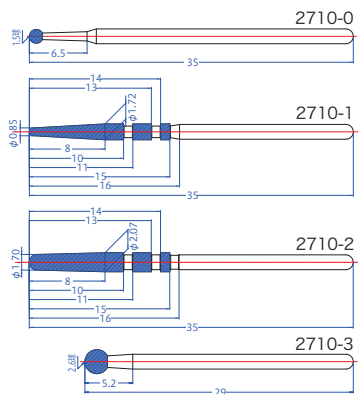メリーダイヤ 2710



		製品番号
メリーダイヤ 2710 アソートセット (2710-0/2710-1/2710-2 各1本)		BAR2710
メリーダイヤ 2710-0 3本		BAR2710-0
メリーダイヤ 2710-1 3本		BAR2710-1
メリーダイヤ 2710-2 3本		BAR2710-2
メリーダイヤ 2710-3 3本		BAR2710-3

※各形状共に全長が27mmのショートサイズもございます (BAR2710-3を除く)。
※回転数4万回転以下

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

Sinus Crestal & Lateral Approach(SCLA) キット

歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術のためのキットです。



	製品番号
<p>SCLAキット</p> <p>キット内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポイントドリル (2.9mmD) ・フラットドリル (2.8mmD) ・フラットラウンドドリル 2種 (3.0mmD/4.0mmD) ・リーマードリル 3種 (3.2mmD/3.5mmD/4.5mmD) ・ラテラルワイドドリル 2種 (4.5mmD/5.5mmD) ・ラテラルドームドリル 2種 (4.5mmD/5.5mmD) ・クレスタル ストッパー 10種 (1mmL/2mmL/3mmL/4mmL/5mmL/6mmL/7mmL/8mmL/9mmL/10mmL) ・ラテラル ストッパー 4種 (1mmL/1.5mmL/2mmL/2.5mmL) ・サイナスキュレット/サイナスリフト/ボーンパッカー/ ・専用ケース 	J00040



ポイントドリル
2.9mmD



フラットドリル
2.8mmD



フラットラウンド
ドリル
3.0mmD



フラットラウンド
ドリル
4.0mmD



リーマードリル
3.2mmD



リーマードリル
3.5mmD



リーマードリル
4.5mmD



ストッパー
1mmL



ストッパー
2mmL



ストッパー
3mmL



ストッパー
4mmL



ストッパー
5mmL



ストッパー
6mmL



ストッパー
7mmL



ストッパー
8mmL



ストッパー
9mmL



ストッパー
10mmL



ラテラル
ワイドドリル
4.5mmD



ラテラル
ワイドドリル
5.5mmD



ラテラル
ドームドリル
4.5mmD



ラテラル
ドームドリル
5.5mmD



ストッパー
1mmL



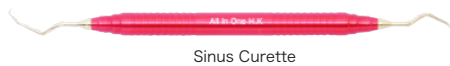
ストッパー
1.5mmL



ストッパー
2mmL



ストッパー
2.5mmL



Sinus Curette



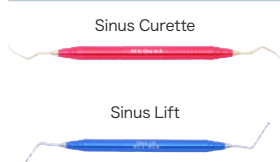
Sinus Lift




Bone Packer

DS Sinus Curette & Sinus Lift

上顎洞の粘膜を剥離する際に使用します。


		製品番号
 <p>Sinus Curette</p> <p>Sinus Lift</p>	DS Sinus Curette & Sinus Lift	2本セット J00026

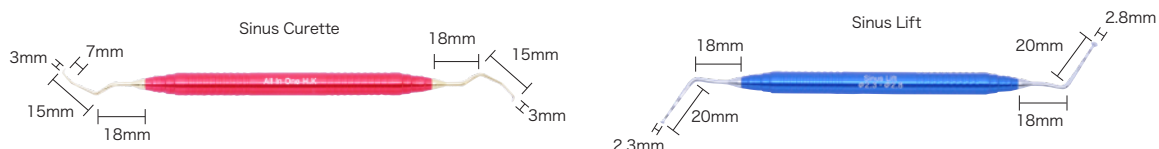※当製品はセットでの販売のみとなります。単品販売はございません。



H-リフティングドリル キット

歯槽骨アプローチによる上顎洞底挙上術のためのキットです。

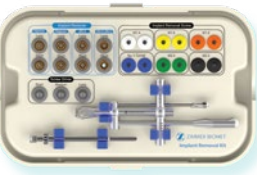









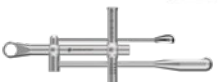
		製品番号
 <p>H-リフティングドリル キット</p> <p>セット内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ドリル7本: 2.5mmD / 3.0mmD / 3.25mmD / 3.5mmD / 4.0mmD / 4.5mmD / 5.0mmD ●ハンドル ●ケース <p>※セット販売のみでドリルの単品販売はしていません。</p>		J00039

H-ツイストドリル キット

ツイストドリルとストッパーのキットです。

		製品番号
 <p>H-ツイストドリル キット</p> <p>セット内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ドリル4本: 2.0mmD / 2.5mmD / 3.0mmD / 3.3mmD ●ストッパー13個: 2mmL / 3mmL / 4mmL / 5mmL / 6mmL / 7mmL / 8mmL / 9mmL / 10mmL / 11mmL / 12mmL / 13mmL / 14mmL ●ケース <p>※セット販売のみでドリル/ストッパーの単品販売はしていません。</p>		J00041

インプラント・リムーバル・キット

		製品番号
	インプラント・リムーバル・キット ・IRKITには下記の製品が同梱されています。	IRKIT
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4(2個入)	IRSR14
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6(2個入)	IRSR16
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8(2個入)	IRSR18
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF(2個入)	IRSR172
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0(2個入)	IRSR20
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.5(2個入)	IRSR25
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【 ナロー / ショート 】	IR315
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【 レギュラー / ショート 】	IR415
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【 ワイド φ 5.0 / ショート 】	IR515
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【 ワイド φ 6.0 - 8.0 / ショート 】	IR615
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【 ナロー / ロング 】	IR320
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【 レギュラー / ロング 】	IR420
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【 ワイドφ 5.0 / ロング 】	IR520
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【 ワイド φ 6.0 - 8.0 / ロング 】	IR620
	スクリュー・ドライバー 7 mm(ショート)	SD7
	スクリュー・ドライバー 12 mm(ミディアム)	SD12
	スクリュー・ドライバー 17 mm(ロング)	SD17
	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	IRRW

アバットメントスクリュードライバー セット

国内流通の主要インプラント補綴用ドライバーが6本組のセットです。付属の専用ケースに収納し、滅菌可能です。



	製品番号
アバットメントスクリュードライバー セット セット内容: ●ドライバー6種 ドライバー種類: Hex1.00AK/Hex1.22BM/Hex1.24AT/ Hex1.25ZM/NB/SR ●ホルダー ●ケース	KTC0002



Hex1.00AK



Hex1.22BM



Hex1.24AT



Hex1.25ZM



NB



SR

トルクレンチ Light

トルクレンチLightは外科から補綴までご使用いただけます。



	製品番号
トルクレンチ Light (15-80Ncm) スクエアアダプター付属	KTC0011

トルクラチェットレンチ プラス

トルクラチェットレンチプラスは外科から補綴までご使用いただけます。



	製品番号
トルクラチェットレンチ プラス (20-100Ncm)	KTC0012
極短レンチアダプタ (オプション)	KTC0013
貫通レンチアダプタ (オプション)	KTC0014

サイナスリフトツール



骨膜剥離子 (鉤型)

M13041



骨膜剥離子 (屈曲型)

M13042



骨膜剥離子 (屈折型)

M13044



骨膜剥離子 (平型)

M13045



骨膜剥離子 (鉤型)

M13091



骨膜剥離子 (平型)

M13099

抜歯即時埋入セット



	製品番号
<p>メデシー 抜歯即時埋入セット</p> <p>本セットはトレー付です。(トレーの単品販売はございません)</p> <p>※製品は改良のため外観を予告なく変更することがございます。</p>	MED004
ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (有鉤)	M1014T
ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (無鉤)	M1015T
剥離子 プーザー	M13097
歯肉ハサミ ゴールドマンフォックス	M35570
ルーカス ボーンキュレット/2.5mmD	M66185
ルーカス ボーンキュレット/3.5mmD	M66187
ルーカス ボーンキュレット/4.5mmD	M66188
ボニートンネルプローブ (骨孔深度測定)	M13010
スカルペルメスホルダー (ストレート)	M36310
スカルペルメスホルダー (アングル)	M36320
カストロビージョ/180mm	M1922D

インプラント外科器具関連

		製品番号
	Xツール セットII 5本セット セット内容: MI0016~20までの製品が各1本ずつ入っております。 歯牙抜去の操作時、硬組織・軟組織の双方に与える侵襲を最小限に抑えることが可能です。また、骨組織を保全した良好な抜歯高が得られます。	MI0015
	Xラクサツール1 歯牙の弛緩操作・脱臼操作に使用します。	MI0016
	Xラクサツール3 歯牙の弛緩操作・脱臼操作に使用します。	MI0017
	Xテズモツール1 鎌状の先端部が歯根膜空隙に容易に挿入が可能のため、歯周靭帯の切断と初期的な弛緩操作に使用します。	MI0018
	Xテズモツール3 鎌状の先端部が歯根膜空隙に容易に挿入が可能のため、歯周靭帯の切断と初期的な弛緩操作に使用します。	MI0019
	アプロキシマルエレベーター1 アングル付のため臼歯部の弛緩操作・脱臼操作に便利です。	MI0020

※すべて受注発注となります。

スプレッティング システム





狭窄歯槽堤の骨を開くためのツールです。

		製品番号
	ボーンポイントド チゼル 幅4.0mm	MI0033
	ボーンポイントド チゼル 幅6.0mm	MI0034
	セパレーティングディスク 8mm	MI0035
	セパレーティングディスク 10mm	MI0036
	ウェッジ 2mm/2.2mm 緑	1個 MI0037
	ウェッジ 3mm/2.2mm 黄	1個 MI0038
	ウェッジアプリケーター	MI0039

※すべて受注発注となります。

インプラント外科基本セット











	製品番号
<p>メデシー インプラント外科基本セット 本セットはトレイ付です。(トレイの単品販売はございません) ※製品は改良のため外観を予告なく変更することがございます。</p>	MED002
 <p>ステンベルグ口角鉤</p>	M89000
 <p>ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (有鉤)</p>	M1014T
 <p>ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (無鉤)</p>	M1015T
 <p>メスホルダー (目盛り付)</p>	M36290
 <p>スペンサー抜糸用ハサミ/115mm</p>	M35280
 <p>歯肉ハサミ ラグランジュ/115mm</p>	M35250
 <p>カストロビージョ (アングル) マイクロニードルホルダー/140mm マイクロサージェリー用の持針器です。</p>	Z00006
 <p>ヘミングウェイ ボーンキュレット (小)</p>	M66020
 <p>ヘミングウェイ ボーンキュレット (大)</p>	M66040
 <p>剥離子 プリチャード/200mm</p>	M87800
 <p>剥離子 モルト/8mm</p>	M854H0
 <p>剥離子 プーザー</p>	M13097

インプラント外科器具関連

		製品番号
	スーチャープライヤー	M10330
	ボンスクレイパー (ストレート) ストレート用替刃[M1325L]1枚付属	M13250
	ボンスクレイパー (アングル) アングル用替刃[M1325R]1枚付属	M1325A
	ボンスクレイパー ストレート用替刃	M1325L
	ボンスクレイパー アングル用替刃	M1325R
	マレット (170g)	M95100
	Dr.Cosci マレット	D00003
	ボーンウェル φ30mm	M48550
	ボーンキャリアス (ピンセットタイプ)	M45780
	ボーンキャリアス (ハサミタイプ)	M45800
	ボーンキャリア/内径2.5mm	M48820
	ボーンキャリア/内径4.4mm	M48830
	カストロビージョ (アングル) マイクロニードルホルダー/140mm マイクロサージェリー用の持針器です。	Z00006
	骨充填器 効率よく骨補填材の充填が可能です。	MI0021

インプラント外科器具関連

		製品番号
	インプラントホルダー (チタン製)	M11280
	歯肉ピンセット ジェラルド(ストレート) /175mm	M10200
	マイクロシザー(ストレート) /155mm	M19570
	マイクロシザー(アングル) /155mm	M19580
	マイクロシザー(ストレート) /150mm	M19590
	マイクロシザー(アングル) /150mm	M19600
	歯肉バサミ ノイ(湾曲型)	M36240
	TC クリルライド	M1925A
	ポケットプローブ	M54840
	ボールスケーラー	M64024
	PDTペリオトーム 前歯用	MI0022
	PDTペリオトーム 臼歯用	MI0023



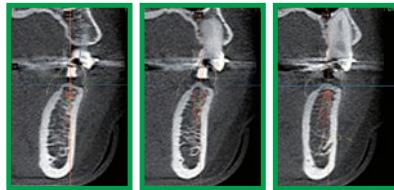
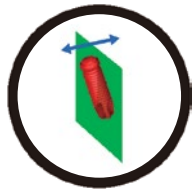
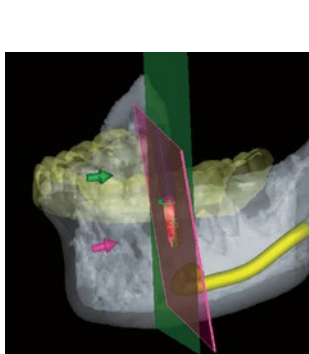
3D インプラント シミュレーションソフトウェア

BellaTek Simulator


BellaTek® シミュレーターはインプラントのシミュレーション用ソフトウェアです。CTデータ (DICOM) をパソコンに直接読み込み、インプラントの埋入位置をシミュレーション。パノラマでは診ることができなかった3次元的な顎骨の形態を把握し、安全性のみならず完成度の高い診断を実現します。

世界で初めて可視化を可能にした「インプラント断面」をはじめ、インプラント臨床医が考案したさまざまな機能を搭載。より精度の高いインプラントシミュレーションを実現します。

インプラント断面



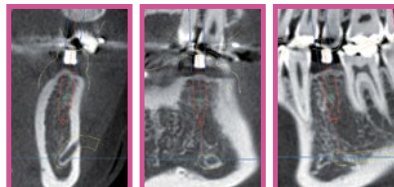歯列弓に垂直な従来の断面
傾斜埋入の場合、インプラント体が斜め切りになり正確な位置関係が把握しづらい。



インプラント断面
インプラント体の長軸に沿った断面により正確な位置関係を把握。断面を回転させることでインプラント体周囲の状況も一目瞭然。

BellaTek® シミュレーター





	CTデータ 直接変換	模型合成	ガイド 作製依頼	データ 作成依頼	製品番号
BellaTek® シミュレーター 本体	●	●	●	●	BSSW1
BellaTek® シミュレーター 年間ライセンス	-	-	-	-	BSSAL

◆PCIは付属しません

骨補填材「セラソルブ® M」

吸収性骨補填材セラソルブ®Mは、国内の歯科領域で認可された高純度のβ-TCP(β-リン酸三カルシウム)を主成分とした人工骨補填材です。生物由来製品とは異なり、不適合性やアレルギー、疾患伝播のリスクが低いです。



	製品番号
 セラソルブ® M 150-500µm 1.5cc(0.5cc×3本)	RI0031
 ※	RI0032
 セラソルブ® M 1000-2000µm 2.5cc(0.5cc×5本)	RI0005
 セラソルブ® M 1000-2000µm 5.0cc(1.0cc×5本)	RI0006



- ミクロ、メソマクロ、マクロ細孔からなる開放性の連通した多孔性(5-500µm)の顆粒構造が骨化プロセスを促し、これにより吸収プロセスも早くなります。
- 全気孔率は約65%を有し、この高い気孔率のために毛管効果が向上します。また気孔の連続性により吸収速度が上がる大きな要因となります。
- 骨の再生と同時に完全吸収します。

※ 本製品は患者さまから採血した血液と混和することにより、より良好な結果が得られます。

骨補填材「オズボーン®」

非吸収性合成ハイドロキシアパタイトOsbone®は、ヒトまたは動物/異種移植片由来のハイドロキシアパタイト製品に換わる安全で効果的な代替品を提供する次世代の骨補填材です。



	製品番号
 オズボーン® 250~1000µm (0.5cc×1本入)	9000800501※1 (OS0001)
 ※	9000901001※1 (OS0002)



- 顆粒は海綿骨構造に類似した多孔性構造を有し、顆粒上の細孔は相互に連通し細孔のネットワークを構成しています。
- 局所にも優れた組織適合性の実証されており、不適合性、アレルギー、感染リスクが低く一定の品質レベルを維持しています。

※ キャップ色は出荷時期により異なるカラーの場合があります。

※1は新品番になり、()内は旧品番になります。ご注文は新旧品番いずれもご使用できます。



コラーゲンメンブレン「バイオメンド®」

本製品は、GTR(歯周組織誘導再生法)のために生まれたタイプ1天然コラーゲンの生体吸収性メンブレンです。



		製品番号
バイオメンド® 15mm×20mm	1箱1枚	0103P
バイオメンド® 20mm×30mm	1箱1枚	0105P
バイオメンド® 30mm×40mm	1箱1枚	0107P

※本製品は、歯周組織再生誘導手術の歯周組織再生素材として、保険適用になります。

適応症

- II級根分岐部病変
- 2壁性、3壁性垂直性骨欠損
- 隣接歯間骨欠損
- カップ状骨欠損

禁忌

以下の方にはご使用を控えてください。

- 急性感染症や口腔内が汚染した創傷をもつ患者さまへの使用。
- 歯周外科手術が施せない状態の患者さまへの使用。
- ワシ由来製品に対するアレルギー体質の患者さまへの使用。



吸収性コラーゲン止血用創傷被覆材「コラテープ®・コラコート®・コラプラグ®」

止血によって創傷治癒を促進し、より速やかな修復を可能にします。

本製品を直接創傷部位に適用することにより、通常は2~5分以内に止血効果が得られます。



		製品番号
コラテープ® 25mm×75mm	1箱10枚	0100P
コラコート® 20mm×40mm	1箱10枚	0101P
コラプラグ® 10mm×20mm	1箱10個	0102P

セーフスクレイパー・ツイスト

外科的侵襲を最低限に抑え、自家骨を容易に採取。



		製品番号
セーフスクレイパー 直 3本入		53-001
セーフスクレイパー 曲 3本入		53-002

プロスペクト・コンパクト 2 Brilliant

明るく鮮明な術野視認性とコストパフォーマンス性に優れたプロスペクト・コンパクト2にハイスペックバージョンの「Brilliant - ブリリアント-」が新登場。より繊細かつスムーズなアームワークを実現する「バランスアーム」や、内蔵フルハイビジョンカメラを標準装備し、術者の操作快適性、患者さまとのコミュニケーション性がさらに向上。

	製品番号
プロスペクト・コンパクト2 Brilliant -ブリリアント-	② PE0033



● バランスアーム

新設計のバランスアームを搭載し、外部カメラなどのアクセサリ装着時における重量バランスも微細な調整が可能 (Brilliantのみ標準装備)。

● バリオディスト

対物レンズの焦点距離を190mm~300mm (距離:110mm) の範囲で調整することができ、術中のクイックなフォーカシングが可能となります (全機種標準装備)。

● 可変式ワイドペアハンドル

ワーキングスペースを大きく確保できるワイドタイプハンドル。
(Brilliantのみ標準装備)



● フルハイビジョンカメラ

フルハイビジョンカメラを内蔵し、外部にアダプターやカメラを装着することなく、1920×1080 (約207万画素) の高解像度映像を撮影・出力することができます。
(Brilliantのみ標準装備)



プロスペクト・コンパクト2

プロスペクト・コンパクト2は、明るく鮮明な術野視認性は勿論のこと、チェアサイドに設置しやすいコンパクトさ、診療スペースにマッチする洗練されたデザイン、そして優れたコストパフォーマンス性をも備えた可搬型歯科用マイクロスコープです。


	製品番号
プロスペクト・コンパクト2	② PE0010




● 明るく鮮明な術野を伝達するハイスペックな光学システム

対物レンズには、波長毎に屈折率が異なることで生じる色収差 (色ズレ) を高い精度で補正する「アポクロマティックレンズ」を採用。

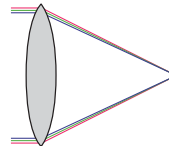色ズレを
補正



アポクロマティックレンズ
赤・緑・青などの三波長の色収差を補正

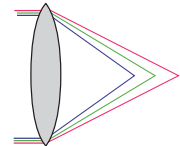


通常のレンズ
像面の前後的なズレが発生

● 術野を的確に照らすライティングシステム

照明野を40mm~10mmまで無段階で調節でき、術者の観察野のみを照明することも可能です。

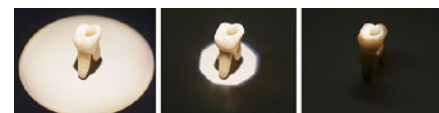アシスタント
の負担を
軽減



40mm ←

ワイド照明

→ 10mm

スポット照明

オプション	製品番号
デュアルアイリス リング [ホワイト]	PE0022

※すべて受注発注となります。

オプション:アングルロテーション機能	製品番号
アングルロテーションリング [ホワイト]	PE0011
アングルロテーションエクステンダー [ホワイト]	PE0012

※アングルロテーション機能には、アングルロテーションリング[PE0011]とアングルロテーションエクステンダー[PE0012]の組合せ、または、アングルロテーションリング[PE0011]とビームスプリッター2(アングルロテーションエクステンダータイプ)[PE0014]の組合せが必要となります。

※すべて受注発注となります。

オプション:外部カメラ用アクセサリ	製品番号
ビームスプリッター2 [ホワイト]	PE0013
ビームスプリッター2 (アングルロテーション エクステンダー) [ホワイト]	PE0014
デジタルカメラアダプタ2 (ソニー Eマウント APS-HD センサー用) [ホワイト]	PE0017
デジタルカメラアダプタ2 (ソニー Aマウント APS-HD センサー用) [ホワイト]	PE0018
デジタルカメラアダプタ2 (ニコン Fマウント DX フォーマット用) [ホワイト]	PE0019
デジタルカメラアダプタ2 (キャノン EF-S マウント APS-C センサー用) [ホワイト]	PE0020
デジタルカメラアダプタ2 (キャノン EF マウント フルサイズセンサー用) [ホワイト]	PE0021
デジタルカメラアダプタ2 (モバイルフォン用/Easy 360) [ホワイト]	PE0034
モバイルフォン用 固定カバー(ユニバーサルタイプ)	PE0062
ビデオキャプチャー JGR-100FS、SDカード(64GB) + フットスイッチ付	PE0063

※すべて受注発注となります。

SurgicPro2 ライト付

マイクロモーターシステム「Surgic Pro2」は、動作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を兼ね備え、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し、効率の良い施術をサポートします。



	製品番号
Surgic Pro2 標準セット: ・コントロールユニット/SGL80M ・ライト付マイクロモーター/X-SG20ML ・ライト付ハンドピース(20:1減速)/ワイヤレスフットコントロール/ イリゲーションチューブ(3本入) ・他付属品	Y1500356-ZV
イリゲーションチューブ10本入	Y1001210-ZV

Osseo 100+

ISQ測定器Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値(インプラント安定指数)を表示します。これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになるため、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。



	製品番号
Osseo 100+ 標準セット: Osseo 100+ 本体/マルチベグドライバー/ACアダプター/ ACアダプター用プラグ(US/JP)/ISQテスター ※マルチベグは別売りです。本体には含まれていません。	Y1500447-ZV
マルチベグ 3i External Hex Type1	55011-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 紫 Type28	55036-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑 Type58	55066-ZV
マルチベグ TSV 3.7-4.1 Type41	55049-ZV
マルチベグ TSV 4.7-6.0 Type43	55051-ZV
マルチベグ TSP 3.8 Type62	55070-ZV
マルチベグ TSP 4.8 Type4	55014-ZV
マルチベグ SPLINE 3.75mmD/5mmD Type30	55038-ZV

※マルチベグは20回滅菌可能

iSD900

インプラント埋入後のカバースクリューやヒーリングキャップ、アバットメントの着脱において、術者の利便性と安全性を高めるコードレスドライバー。施術スピードの向上と広い術野の確保を実現し、術者の負担を軽減します。



	製品番号	価格
iSD900 標準セット: iSD900 モーターハンドピース/ iSD-HP コントラアングルヘッド/ iSD900 用充電器/ AC コード/トルクキャリブレーター/ キャリブレーションバー/ ON/OFF スイッチレバー/ F タイプスプレーノズル/モーターキャップ	Y1001356-ZV	156,500

MD11 モーターシステム

すべての設定値がひと目でわかる視認性に優れたディスプレイを採用。コンパクトで高品質な本体は、清掃性に優れた表面処理で衛生的。低振動、低騒音な小型モーターは、動力伝達がスムーズなため術者の負担を軽減。

		製品番号
イリゲーションチューブ ディスポ(CBM用/MD11用) 2m	10個	NM1706
内部注水用ノズル (MD11用)		NM39116
ノズル専用クリップ (MD11用)		NM39117

W&H インプラントメッド SI-1010

		製品番号
イリゲーションチューブ (W&Hインプラントメッド用)	6個	668053-ZB

※すべて受注発注となります。

サニスリーブ コードカバー

一般歯科診療および口腔外科手術時の患者さまの血液や唾液からハンドピースやホースをガードする、ポリエステル製の滅菌済スリーブです。長いホースやケーブルに簡単に装着でき、ハンドピースなどの操作にも支障がありません。

		製品番号
サニスリーブ コードカバー 滅菌済み	12個	4001830087AG

ドレープセット

		製品番号
オベドレープセット		220537149207

ピエゾトームCube

簡単操作のタッチパネルを採用したピエゾトームCube。

最新のニュートロンテクノロジーにより従来型の機種(サテック社製)より30%のパワーアップ。最大出力78Wのパワーを発揮し、切削効率が向上しました。最小パワーもさらに弱くなったことにより、より安全にご使用いただけます。

		製品番号
	ピエゾトームCube ・本体 ・ピエゾトームCube ハンドピース(ケーブル付) ・エッセンシャルキット (BS1S / BS4 / SL1/ SL2 / SL3 / LC2) ・マルチファンクション フットスイッチ ・ハンドピースホルダー ・トルクレンチ ・ブラケット	00824700-ZB
	注水チューブ	00823454-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824610-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1スリム	00824617-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1ロング	00824618-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2L	00824612-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2R	00824613-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-4	00824614-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-5	00824615-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-6	00824616-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824620-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-1	00824621-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-2	00824622-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-3	00824463-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-4	00824624-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-5	00824625-ZB

	<p>ピエゾーム2 イントラリフトキット 以下のチップが各1本含まれるセット</p>	00824640-ZB
	ピエゾーム2 イントラリフトチップ TKW1	00824641-ZB
	ピエゾーム2 イントラリフトチップ TKW2	00824642-ZB
	ピエゾーム2 イントラリフトチップ TKW3	00824643-ZB
	ピエゾーム2 イントラリフトチップ TKW4	00824644-ZB
	ピエゾーム2 イントラリフトチップ TKW5	00824645-ZB
	<p>ピエゾーム2 エクストラクションキット 以下のチップが各1本含まれるセット</p>	00824630-ZB
	ピエゾーム2 エクストラクションチップ LC1	00824631-ZB
	ピエゾーム2 エクストラクションチップ LC2	00824633-ZB
	ピエゾーム2 エクストラクションチップ LC2L	00824634-ZB
	ピエゾーム2 エクストラクションチップ LC2R	00824635-ZB
	ピエゾーム2 ニンジャチップ	00824636-ZB
	<p>ピエゾーム2 クラウンエクステンションキット 以下のチップが各1本含まれるセット</p>	00824650-ZB
	ピエゾーム2 ボーンサーージェリーチップ BS-6	00824616-ZB
	ピエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE1	00824651-ZB
	ピエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE2	00824652-ZB
	ピエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE3	00824653-ZB



<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングキット 以下のチップが各1本含まれるセット</p>	00824670-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS1</p>	00824671-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS2</p>	00824672-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS3</p>	00824673-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS4</p>	00824674-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS5</p>	00824675-ZB
<p>ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS6</p>	00824676-ZB

メディフュージ

採血後すぐにセットし、13分間で自動的にフィブリンゲルが作製されます。
添加物なし、分離操作なし。手間いらずでランニングコストを最小限にできます。



	製品番号
メディフュージ MF200 100 ※ スティックボーンボックス付属	② C00020

ペリオテスト









歯の動揺度を速やかにマイクロコンピューターが計測して信頼性の高い測定値をデジタル表示。また、音声で伝えます。客観的で再現性のある測定法により、インプラント治療など広範囲の症例に応用できます。



	製品番号
ペリオテストM	② N00003
ペリオテストM バッテリー ペリオテストMのバッテリー交換は、弊社へご送付いただき製造元にて行います。	② N00004
ペリオテスト クラシック バッテリー ペリオテスト クラシック [N00005] 専用です。旧タイプ ペリオテスト [N00001] との互換性はありません。 (旧タイプ ペリオテストグルテンバッテリー [N00002])	② N00006

Yirro-plusミラー

ミラー表面へ効率的にエアを噴射することで、患者さまの呼吸による曇りや、水滴の付着を防ぎ、つねにクリアな視界を維持。ミラーヘッドには独自のHR(High Reflectivity/ 高反射率)ミラーを採用。軽量化を追求し、長時間にわたる術者の疲労感を低減。

	製品番号	
	Yirro-plusミラー【コンフォート】 スターターセット (マニュアル ON/OFF)	YPM-0427
	Yirro-plusミラー【プレミアム】 スターターセット (オート ON/OFF)	YPM-0426
	フットペダル ※プレミアム専用	YPMAC-0268
	ミラーヘッド No.0(6本入)	YPMAC-0002
	ミラーヘッド No.2(6本入)	YPMAC-0009
	ミラーヘッド No.2 XL(3本入)	YPMAC-1062
	ミラーハンドル(6本入)	YPMAC-0428
	noSPOT オートクレープ キャップ(6個入)	YPMAC-0514
	クリーニングボックス	YPMAC-0312
	デスクトップ ドッキングホルダー	YPMAC-0584

※すべて受注発注となります。



通常ミラー

Yirro-plusミラー

OPアンカー

40年以上の長期にわたり、累計90万個以上の販売実績があります。天然歯のオーバーデンチャー用根面アタッチメントです。歯根を支台装置とすることで顎堤を保護し、安定した義歯を提供できます。

メールパターン・フィメールラバー (1箱/各10個)、アンカーメジャーのセット


			製品番号
	OPアンカーアタッチメント No.1	10個	K00004
	OPアンカーアタッチメント No.2	10個	K00005
	OPアンカーアタッチメント No.3	10個	K00006
	OPアンカーアタッチメント No.4	10個	K00007



アンカーメジャー

- 円の部分はメールパターン基底面の大きさ
- 斜線の部分はメールパターンの高径の削除量を表しています

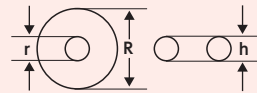■ フィメールラバー寸法



種類	外径(R)	内径(r)	高さ(h)
NO.1	3.5mm	1.0mm	1.25mm
NO.2	4.5mm	1.5mm	1.5mm
NO.3	5.0mm	1.6mm	1.7mm
NO.4	5.5mm	1.9mm	1.8mm

(許容範囲10%)

■ メールパターン寸法



※メールパターンのみの販売はございません。

種類	高さ(H)	種類	高さ(H)
NO.1	2.1~3.6mm	NO.3	2.8~4.3mm
NO.2	2.6~4.1mm	NO.4	3.0~4.5mm

(許容範囲10%)

			製品番号
	交換用フィメールラバー (単品) No.1	10個	K00008
	交換用フィメールラバー (単品) No.2	10個	K00009
	交換用フィメールラバー (単品) No.3	10個	K00010
	交換用フィメールラバー (単品) No.4	10個	K00011

補充用パーツ

掲載の製品は、本体もしくはキットを購入いただいたお客様のみ販売となりますのでご了承ください。
また、製造元による製造終了や弊社の輸入終了に伴い、予告なく販売を終了することがございます。

サージボーン	製品番号
RO 030 ラウンド3.0mm	C00043
RP 018 パッカー1.8mm	C00044
RP 022N パッカー2.2mmN	C00065

MD20・CBM	製品番号
イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (CBM用/MD11用) /2m	NM1706
コントラ 内部注水用ノズル タイプ2	NM1712
Yコネクタ接続チューブ(MD11用)20個	Ⓢ NM1773
Yコネクタ(MD11用)	Ⓢ NM1777
Nou-Cleanメンテナンススプレー (スプレーノズルNM1958付)	Ⓢ NM1795
クリップセット 小 (グレー10個)	NM1873
クリップセット 大 (ホワイト3個)	NM1881
モーター31ESS/2mケーブル (CBM用)	Ⓢ NM2063
モーター31ESS/3mケーブル (MD20用)	Ⓢ NM2064
イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (MD20用) /3m	NM6024

サージックProプラス	製品番号
イリゲーションチューブディスポ 10個	Y1001210-ZV
センター注水ノズルM ノズル長 20mm	Ⓢ 10001364-ZV
チューブ抑え	Ⓢ E295105-ZV
二分岐注水チューブ	Ⓢ C823752-ZV
プロテクションプラグ	Ⓢ 10001595-ZV
センター注水ノズル ノズル長 23mm	Ⓢ 10000324-ZV
パイプホルダー X-DSG20L、X-DSG20	Ⓢ 20000396-ZV
フットコントロール FC-78	Ⓢ Z1102001-ZV
マイクロモーター SGL70M	Ⓢ E1023-ZV

ペリオテスト	製品番号
600-142 ペリオテスト グルデン バッテリー	N00002

※ 600-142 ペリオテスト グルデン バッテリーは旧型のペリオテスト[N0001]専用のため、ペリオテストクラシック[N0005]およびペリオテストM[N0003]には対応していません。

スプリットコントロールキット	製品番号
186RF イニシャルバー/1.8mmD (5本入)	ME0005
A1001 パイロットバー/1.0mmD	ME0007
D1001 パイロットバー/1.8mmD	ME0008
A1003 エクспанションバー/2.3mmD	Ⓜ ME0009
D1003 エクспанションバー/3.0mmD	ME0010
A1005 スレッドフォーマー/2.7mmD	ME0011
B1005 スレッドフォーマー/2.9mmD	ME0012
C1005 スレッドフォーマー/3.1mmD	ME0013
D1005 スレッドフォーマー/3.3mmD	ME0014
E1005 スレッドフォーマー/3.5mmD	ME0015
F1005 スレッドフォーマー/4.0mmD	ME0016
CA00G スプリット キャリア/ロング	ME0017
CA0KG スプリット キャリア/ショート	ME0018
CA00S キャリアドライバー	ME0019
231DCRA070 ダイヤモンドディスク スプリット/トランス/クレスト/7.0mm	ME0052
CA0RA ハンドル	ME0092
CA1RB スプリットII ラチェット用アダプター/ショート	ME0202
CA0RB スプリットII ラチェット用アダプター/ロング	ME0203
CA8RA スプリットII ハンドピース用アダプター/ショート	ME0204
CA9RA スプリットII ハンドピース用アダプター/ロング	ME0205

インプラント外科器具総合カタログ INDEX

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
0~			
0100P	コラテープ® 25mm×75mm(1箱10枚)	20700BZG00024000	P19
0101P	コラコート® 20mm×40mm(1箱10枚)	20700BZG00024000	P19
0102P	コラプラグ® 10mm×20mm(1箱10個)	20700BZG00024000	P19
0103P	バイオメンド® 15mm×20mm(1箱1枚)	21100BZY00280000	P19
0105P	バイオメンド® 20mm×30mm(1箱1枚)	21100BZY00280000	P19
0107P	バイオメンド® 30mm×40mm(1箱1枚)	21100BZY00280000	P19
53-001	セーフスクレイパー・ツイスト 直 3本入	22000BZX00802000	P19
53-002	セーフスクレイパー・ツイスト 曲 3本入	22000BZX00802000	P19
55011-ZV	マルチベグ 3i External Hex Type1	09B2X00016000153	P22
55036-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 紫 Type28	09B2X00016000153	P22
55066-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑 Type58	09B2X00016000153	P22
55049-ZV	マルチベグ TSV 3.7-4.1 Type41	09B2X00016000153	P22
55051-ZV	マルチベグ TSV 4.7-6.0 Type43	09B2X00016000153	P22
55070-ZV	マルチベグ TSP 3.8 Type62	09B2X00016000153	P22
55014-ZV	マルチベグ TSP 4.8 Type4	09B2X00016000153	P22
55038-ZV	マルチベグ SPLINE 3.75mmD/5mmD Type30	09B2X00016000153	P22
668053-ZB	イリゲーションチューブ(W&Hインプラントメッド用)6本	27B1X00020225002	P23
00824700-ZB	ピエゾトームCube	230ALBZX00015000	P24
00823454-ZB	注水チューブ	27B1X00020220064	P24
00824463-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-3	223ALBZX00018000	P24
00824610-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーキット	223ALBZX00018000	P24
00824612-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2L	223ALBZX00018000	P24
00824613-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2R	223ALBZX00018000	P24
00824614-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-4	223ALBZX00018000	P24
00824615-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-5	223ALBZX00018000	P24
00824616-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-6	223ALBZX00018000	P24, 25
00824617-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1スリム	223ALBZX00018000	P24
00824618-ZB	ピエゾトーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1ロング	223ALBZX00018000	P24
00824620-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトキット	223ALBZX00018000	P24
00824621-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-1	223ALBZX00018000	P24
00824622-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-2	223ALBZX00018000	P24
00824624-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-4	223ALBZX00018000	P24
00824625-ZB	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-5	223ALBZX00018000	P24
00824630-ZB	ピエゾトーム2 エクストラクションキット	223ALBZX00018000	P25
00824631-ZB	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC1	223ALBZX00018000	P25
00824633-ZB	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2	223ALBZX00018000	P25
00824634-ZB	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2L	223ALBZX00018000	P25
00824635-ZB	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2R	223ALBZX00018000	P25
00824636-ZB	ピエゾトーム2 ニンジャチップ	223ALBZX00018000	P25
00824640-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトキット	223ALBZX00018000	P25
00824641-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW1	223ALBZX00018000	P25
00824642-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW2	223ALBZX00018000	P25
00824643-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW3	223ALBZX00018000	P25
00824644-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW4	223ALBZX00018000	P25
00824645-ZB	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW5	223ALBZX00018000	P25
00824650-ZB	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションキット	223ALBZX00018000	P25
00824651-ZB	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE1	223ALBZX00018000	P25
00824652-ZB	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE2	223ALBZX00018000	P25
00824653-ZB	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE3	223ALBZX00018000	P25
00824670-ZB	ピエゾトーム2 クレストスプリッティングキット	223ALBZX00018000	P26

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
00824671-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS1	223ALBZX00018000	P26
00824672-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS2	223ALBZX00018000	P26
00824673-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS3	223ALBZX00018000	P26
00824674-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS4	223ALBZX00018000	P26
00824675-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS5	223ALBZX00018000	P26
00824676-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS6	223ALBZX00018000	P26
10000324-ZV	センター注水ノズル	223ALBZX00027000	P30
10001364-ZV	センター注水ノズルM	—	P30
10001595-ZV	プロテクションプラグ	223ALBZX00027000	P30
20000396-ZV	パイプホルダー	223ALBZX00027000	P30
220537149207	オベドレーブセット	13B1X00061140028	P23
4001830087AG	サニスリーブ コードカバー 滅菌済み(12個入)	—	P23
B~			
BAR2710	メリーダイヤ 2710 アソートセット(2710-0/2710-1/2710-2 各1本)	13B3X00256	P7
BAR2710-0	メリーダイヤ 2710-0 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-1	メリーダイヤ 2710-1 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-2	メリーダイヤ 2710-2 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-3	メリーダイヤ 2710-3 3本	13B3X00256	P7
BSSAL	BellaTek® シミュレーター 年間ライセンス	227AHBZX00029000	P17
BSSW1	BellaTek® シミュレーター 本体	227AHBZX00029000	P17
C~			
C00020	メディフュージ MF200 100	13B1X10100000004	P27
C00043	RO 030 ラウンド3.0mm	11B2X10002000006	P30
C00044	RP 018 パッカー1.8mm	11B2X10002000006	P30
C00065	RP 022N パッカー2.2mmN	11B2X10002000010	P30
C823752-ZV	二分岐注水チューブ	09B1X00001000014	P30
D~			
D00003	Dr.Cosci マレット(180g)	13B1X00079000023	P15
DEN001	リッジエキスパンダー HAプレミアム	13B1X00079000027	P5
E~			
E1023-ZV	マイクロモーター SGL70M	223ALBZX00027000	P30
E295105-ZV	チューブ 抑え	—	P30
G~			
GE0003	Stopper Drill KIT	40B1X10003GE0059	P5
H~			
H00007	メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー アソートセット	13B3X00256000001	P6
H00008	ティッシュダイヤモンドバー [M-20025] 2mmD/25mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00009	ティッシュダイヤモンドバー [M-20029] 2mmD/29mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00010	ティッシュダイヤモンドバー [M-30025] 3mmD/25mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00011	ティッシュダイヤモンドバー [M-30029] 3mmD/29mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00012	ティッシュダイヤモンドバー [M-20025] 2mmD/34mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00013	ティッシュダイヤモンドバー [M-30034] 3mmD/34mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00014	ダイヤモンド ガイドドリル(2本セット)3mmD/35mmL 1本、4mmD/35mmL 1本	13B1X00079000028	P7
H00015	ダイヤモンド ガイドドリル 3mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00016	ダイヤモンド ガイドドリル 4mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00017	ISF ダイヤモンドバー(3本セット)0.9mmD/26mmL 1本、0.9mmD/34mmL 2本	13B1X00079000037	P7
H00018	ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00021	HAリムーバーセット(2本セット)0.8mmD/25mmL 1本、0.8mmD/25mmL 1本	13B1X00079000060	P5
HA0102	イミディエイトインプラントシステム	—	P6
HA0051	HMインプラント キット	13B1X00079000063 13B1X00079000064	P4

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
I~			
IPPI01	HMインプラント サージカルケース	—	P4
IPPI02	イミディエイトインプラントシステム サージカルケース	—	P7
IRKIT	インプラント・リムーバル・キット	13B1X00079000143	P10
IRSR14	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR16	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR18	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR172	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR20	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR25	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.5(2個入)	13B1X00079000143	P10
IR315	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【ナロー / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR415	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【レギュラー / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR515	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【ワイド φ 5.0 / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR615	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR320	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【ナロー / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR420	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【レギュラー / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR520	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【ワイドφ 5.0 / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR620	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ロング】	13B1X00079000143	P10
IRRW	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	13B1X00079000143	P10
J~			
J00026	DS Sinus Curette & Sinus Lift	13B1X00079000070	P9
J00039	H-リフティングドリル キット	13B1X00079000072	P9
J00040	Sinus Curette & Lateral Approach (SCLA)kit	301AGBZX00032000	P8
J00041	H-ツイストドリル キット	301AGBZX00082000	P9
K~			
K00004	OPアンカーアタッチメント No.1(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00005	OPアンカーアタッチメント No.2(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00006	OPアンカーアタッチメント No.3(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00007	OPアンカーアタッチメント No.4(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00008	交換用フィメールラバー(単品)No.1(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00009	交換用フィメールラバー(単品)No.2(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00010	交換用フィメールラバー(単品)No.3(10個)	221AGBZX00187000	P29
K00011	交換用フィメールラバー(単品)No.4(10個)	221AGBZX00187000	P29
KTC0002	アパットメントスクリュードライバー セット	26B3X10009170021	P11
KTC0011	トルクレンチ Light(15-80Ncm)	26B3X10009200001	P11
KTC0012	トルクラチェットレンチ プラス(20-100Ncm)	26B3X10009230001	P11
KTC0013	極短レンチアダプタ(オプション)	26B3X10009130011	P11
KTC0014	貫通レンチアダプタ(オプション)	26B3X10009130011	P11
M~			
M1014T	ティッシュブライヤー Micro-Adoson/120mm(有鉤)[1014TC]	13B1X00079000007	P12、14
M1015T	ティッシュブライヤー Micro-Adoson/120mm(無鉤)[1015TC]	13B1X00079000007	P12、14
M10200	歯肉ピンセット ジェラルド(ストレート)/175mm	13B1X00079000006	P16
M10330	スーチャーブライヤー [1033]	13B1X00079000013	P15
M11280	インプラントホルダー(チタン製)	13B1X00079000012	P16
M13010	ボニートネルプローブ(骨孔深度測定)[1301]	13B1X00079000007	P12
M13041	骨膜剥離子(鉤型)[1304/901]	13B1X00079000009	P11
M13042	骨膜剥離子(屈曲型)[1304/902]	13B1X00079000009	P11
M13044	骨膜剥離子(屈折型)[1304/904]	13B1X00079000009	P11
M13045	骨膜剥離子(平型)[1304/905]	13B1X00079000009	P11
M13091	骨膜剥離子(鉤型)[1309/1]	13B1X00079000009	P11
M13097	剥離子ブーザー [1309/7]	13B1X00079000007	P12、14

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
M13099	骨膜剥離子 (平型) [1309/9]	13B1X00079000009	P11
M13250	ボーンスクレイパー (ストレート) [1325]	13B1X00079000004	P15
M1325A	ボーンスクレイパー (アングル) [1325/A]	13B1X00079000004	P15
M1325L	ボーンスクレイパー ストレート用替刃 [1325/LR]	13B1X00079000004	P15
M1325R	ボーンスクレイパー アングル用替刃 [1325/LRA]	13B1X00079000004	P15
M1922D	カストロビージョ/180mm [1922/D-TC]	13B1X00079000007	P12
M1925A	クリルライド [1925/A-TC]	13B1X00079000008	P16
M19570	マイクロシザー ストレート /155mm [1957]	13B1X00079000006	P16
M19580	マイクロシザー アングル /155mm [1958]	13B1X00079000006	P16
M19590	マイクロシザー ストレート /150mm [1959]	13B1X00079000006	P16
M19600	マイクロシザー アングル /150mm [1960]	13B1X00079000006	P16
M35250	歯肉ハサミ ラグランジュ/115mm [3525]	13B1X00079000008	P14
M35280	スベンサー抜糸用ハサミ/115mm [3528]	13B1X00079000008	P14
M35570	歯肉ハサミ ゴールドマンフォックス [3557]	13B1X00079000007	P12
M36240	歯肉ハサミ ノイ (湾曲型) [3624]	13B1X00079000008	P16
M36290	メスホルダー (目盛り付) [3629]	13B1X00079000008	P14
M36310	スカルペルメスホルダー (ストレート) [3631]	13B1X00079000007	P12
M36320	スカルペルメスホルダー (アングル) [3632]	13B1X00079000007	P12
M45780	ボーンキャリアバス (ピンセットタイプ) [4578]	13B1X00079000025	P15
M45800	ボーンキャリアバス (ハサミタイプ) [4580]	13B1X00079000010	P15
M48550	ボーンウェル φ30mm	13B1X00079000025	P15
M48820	ボーンキャリア/内径2.5mm [4882]	13B1X00079000025	P15
M48830	ボーンキャリア/内径4.4mm [4883]	13B1X00079000025	P15
M54840	ポケットプローブ [548/4]	13B1X00079000005	P16
M64024	ボールスケール [640/24]	13B1X00079000025	P16
M66020	ヘミングウェイ ボーンキュレット (小) [660/2]	13B1X00079000008	P14
M66040	ヘミングウェイ ボーンキュレット (大) [660/4]	13B1X00079000008	P14
M66185	ルーカス ボーンキュレット/2.5mmD [661/85]	13B1X00079000007	P12
M66187	ルーカス ボーンキュレット/3.5mmD [661/87]	13B1X00079000007	P12
M66188	ルーカス ボーンキュレット/4.5mmD [661/88]	13B1X00079000007	P12
M854H0	剥離子 モルト/8mm [854/H02]	13B1X00079000008	P14
M87800	剥離子 プリチャード/200mm [878]	13B1X00079000008	P14
M89000	ステンベルグ 口角鉤 [890]	13B1X00079000008	P14
M95100	マレット (170g) [951]	13B1X00079000025	P15
ME0005	186RF イニシャルバー/1.8mmD (5本)	13B1X00079000033	P31
ME0007	A1001 パイロットバー/1.0mmD	13B1X00079000033	P31
ME0008	D1001 パイロットバー/1.8mmD	13B1X00079000033	P31
ME0009	A1003 エクスパンションバー/2.3mmD	13B1X00079000033	P31
ME0010	D1003 エクスパンションバー/3.0mmD	13B1X00079000033	P31
ME0011	A1005 スレッドフォーマー/2.7mmD	13B1X00079000033	P31
ME0012	B1005 スレッドフォーマー/2.9mmD	13B1X00079000033	P31
ME0013	C1005 スレッドフォーマー/3.1mmD	13B1X00079000033	P31
ME0014	D1005 スレッドフォーマー/3.3mmD	13B1X00079000033	P31
ME0015	E1005 スレッドフォーマー/3.5mmD	13B1X00079000033	P31
ME0016	F1005 スレッドフォーマー/4.0mmD	13B1X00079000033	P31
ME0017	CA00G スプリット キャリア/ロング	13B1X00079000014	P31
ME0018	CA0KG スプリット キャリア/ショート	13B1X00079000014	P31
ME0019	CA00S キャリアドライバー	13B1X00079000014	P31
ME0052	231DCRA070 ダイヤモンドディスク スプリット/トランス/クレスト/7.0mm	13B1X00079000033	P31
ME0092	CA0RA ハンドル	—	P31
ME0202	CA1RB スプリットII ラチェット用アダプター/ショート	13B1X00079000033	P31

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
ME0203	CA0RB スプリットII ラチェット用アダプター／ロング	13B1X00079000033	P31
ME0204	CA8RA スプリットII ハンドピース用アダプター／ショート	13B1X00079000033	P31
ME0205	CA9RA スプリットII ハンドピース用アダプター／ロング	13B1X00079000033	P31
MED002	メデシー インプラント外科基本セット	—	P14
MED004	メデシー 抜歯即時埋入セット	—	P12
MI0015	Xツール セットII (5本セット)	13B1X10089000159	P13
MI0016	Xラクサツール1 [h1700701]	13B1X10089000159	P13
MI0017	Xラクサツール3 [h1700703]	13B1X10089000159	P13
MI0018	Xデズモツール1 [h1700705]	13B1X10089000159	P13
MI0019	Xデズモツール3 [h1700805]	13B1X10089000159	P13
MI0020	アプロキシマルエレベーター1 [h1700801]	13B1X10089000159	P13
MI0021	骨充填器 (Dr. Hayashiモデル)	13B1X10089000234	P15
MI0022	PDTペリオトーム 前歯用 [p00310pp]	13B1X10089000047	P16
MI0023	PDTペリオトーム 臼歯用 [p00311pp]	13B1X10089000047	P16
MI0033	ボーンポイントド チゼル(幅4.0mm)	13B1X10089000132	P13
MI0034	ボーンポイントド チゼル(幅6.0mm)	13B1X10089000132	P13
MI0035	セパレーティングディスク 8mm	13B1X10089000130	P13
MI0036	セパレーティングディスク 10mm	13B1X10089000130	P13
MI0037	ウェッジ 2mm/2.2mm 緑(1個)	13B1X10089000131	P13
MI0038	ウェッジ 3mm/2.2mm 黄(1個)	13B1X10089000131	P13
MI0039	ウェッジアプリケーター	13B1X10089000131	P13
N~			
N00002	ペリオテスト グルデン バッテリー	—	P31
N00003	ペリオテストM	223AGBZX00203000	P27
N00004	ペリオテストM バッテリー	—	P27
N00006	ペリオテスト クラシック バッテリー	—	P27
NM1706	イリゲーションチューブ ディスポ 10個(CBM用/MD11用)/2m	—	P23、30
NM1712	コントラ 内部注水用ノズル タイプ2	—	P30
NM1773	Yコネクタ接続チューブ(MD11用)20個	—	P30
NM1777	Yコネクタ(MD11用)	—	P30
NM1795	Nou-Cleanメンテナンススプレー(スプレーノズルNM1958付)	—	P30
NM1873	クリップセット 小(グレー10個)	—	P30
NM1881	クリップセット 大(ホワイト3個)	—	P30
NM2063	モーター31ESS/2mケーブル(CBM用)	—	P30
NM2064	モーター31ESS/3mケーブル(MD20用)	—	P30
NM39116	内部注水用ノズル(MD11用)	230AGBZX00037000	P23
NM39117	内部注水用ノズル専用クリップ(MD11用)	230AGBZX00037000	P23
NS0002	1.3mmDドリル ショートタイプ(HMインプラント用)	13B1X00079000064	P4
NS0003	1.3mmDドリル ロングタイプ(HMインプラント用)	13B1X00079000064	P4
O~			
OS0001	Osbone 250-1000μm(0.5cc × 1本)	23100BZX00011000	P18
OS0002	Osbone 1000-2000μm(1cc × 1本)	23100BZX00011000	P18
P~			
PE0010	プロスペクト・コンパクト2	13B2X00022000074	P20
PE0011	アングルローテーション リング[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0012	アングルローテーション エクステンダー[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0013	ビームスプリッター2(ホワイト)	13B2X00022000074	P21
PE0014	ビームスプリッター2(アングルローテーション エクステンダータイプ)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0017	デジタルカメラ アダプタ2(ソニー Eマウント APS-HDセンサー用)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0018	デジタルカメラ アダプタ2(ソニー Aマウント APS-HDセンサー用)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0019	デジタルカメラ アダプタ2(ニコン Fマウント DXフォーマット用)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
PE0020	デジタルカメラ アダプタ2(キャノン EF-Sマウント APS-Cセンサー用)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0021	デジタルカメラ アダプタ2(キャノン EFマウント フルサイズセンサー用)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0033	ブロスベクトコンパクト2 プリリアント	13B2X00022000108	P20
PE0034	デジタルカメラアダプタ2(モバイルフォン用/Easy 360)[ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PR0023	トルクラchetteインサート ショート(14mm)	13B1X00079000050	P5
PR0024	トルクラchetteインサート ロング(17mm)	13B1X00079000050	P5
PR0025	ハンドピースドライバー(20mm)	13B1X00079000050	P5
PR0041	HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ	13B1X00079000063	P4
PR0042	HMインプラントドライバー ラchetteタイプ	13B1X00079000063	P4
PR0050	HMインプラントS (2本)2.0mmD/10mmL	22600BZX00519000	P4
PR0051	HMインプラントS (2本)2.0mmD/13mmL	22600BZX00519000	P4
PR0052	HMインプラントL (2本)2.0mmD/10mmL	22600BZX00519000	P4
PR0053	HMインプラントL (2本)2.0mmD/13mmL	22600BZX00519000	P4
PE0062	モバイルフォン用 固定カバー(ユニバーサルタイプ)	—	P21
PE0063	ビデオキャプチャー JGR-100FS、SDカード(64GB) + フットスイッチ付	—	P21
R~			
RI0005	セラソルブ® M 1000-2000μm 2.5cc(0.5cc×5本)	22400BZX00002000	P18
RI0006	セラソルブ® M 1000-2000μm 5.0cc(1.0cc×5本)	22400BZX00002000	P18
RI0031	セラソルブ® M 150-500μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P18
RI0032	セラソルブ® M 500-1000μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P18
S~			
SD7	スクリュー・ドライバー 7 mm(ショート)	13B1X00079000143	P10
SD12	スクリュー・ドライバー 12 mm(ミディアム)	13B1X00079000143	P10
SD17	スクリュー・ドライバー 17 mm(ロング)	13B1X00079000143	P10
SU1014	O-リング ユニバーサルドライバー4mm スクエア用	13B1X00079000048	P4
Y~			
YPM-0426	Yirro-plusミラー【プレミアム】 スターターセット	13B2X00022000099	P28
YPM-0427	Yirro-plusミラー【コンフォート】 スターターセット	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0002	ミラーヘッド No.0(6本入)	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0009	ラーヘッド No.2(6本入)	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0268	フットペダル ※プレミアム専用	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0312	クリーニングボックス	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0428	ミラーハンドル(6本入)	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0514	noSPOT オートクレープ キャップ(6個入)	13B2X00022000099	P28
YPMAC-0584	デスクトップ ドッキングホルダー	13B2X00022000099	P28
YPMAC-1062	ミラーヘッド No.2 XL(3本入)	13B2X00022000099	P28
Y1001210-ZV	イリゲーションチューブ ディスポ 10個	09B1X00001000023	P22、30
Y1001356-ZV	iSD900 標準セット	222ALBZX00016000	P22
Y1500356-ZV	Surgic Pro2 標準セット	303ALBZX00014000	P22
Y1500447-ZV	Osseo 100+ 標準セット	09B2X00016000153	P22
Z~			
Z00006	カストロビージョ(アングル)マイクロニードルホルダー/140mm	13B1X00079000031	P14、15
Z00007	ヘルムート トルクラchette(10-40N・cm)	13B1X00079000043	P5
Z1102001-ZV	フットコントロール FC-78	223ALBZX00027000	P30

FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル

イイハ オハヨー
0120-118-084【旧白鵬】

※太枠内をご記入ください

No. _____

ご注文日	月 日	希望納期	月 日 午前・午後 まで
タイム便	<input type="checkbox"/> 使用する	・タイム便は、AM10:00のお届けとなります(地域によってご利用になれない場合がございます)。 ・タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります(300円 税別)。	

ご請求先			ご担当者名	様
ご住所	〒			
TEL	— —	FAX	— —	

ご納品先(上記ご住所以外に納品ご希望時)	
ご住所	〒 TEL. — —

- ※ 当日発送受付時間: 月～金曜日9:00～15:30(定休日: 土曜・日曜・祝日)
- ※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- ※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- ※ 1回のご注文が5,000円以下(税別)の場合、送料として500円をご請求させていただきます。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ZVJD0038 2022/03

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890
FAX.0120-118-084



How to order

ご注文について

ご注文のご案内

本カタログに掲載の製品をご注文の際には、包装単位、価格および製品番号をご確認の上、必ず製品番号でご注文いただきますようお願い申し上げます。

お願い

- 製品番号以外でのご注文は賜りかねます。予めご了承ください。
- Ⓜマークは、受注発注となる製品です。納品には3週間程度かかります。
- 欠品などのため、製品によりご注文後2週間程度かかる場合がございます。
- 表示の価格は、全て税抜き価格です。

ご注文先

ご注文は電話・FAXにて承ります。

FAXでのご注文は「FAX注文書」へご記入の上、ご注文ください。

ジンヴィ・ジャパン

カスタマーサービス 東京

◎注文専用フリーダイヤル

TEL. ☎0120-418-890 (月～金曜日/9:00～17:30)

FAX. ☎0120-118-084 (24時間)
イイハ オハヨー

製品発送のご案内

- 当日発送受付時間: 月～金曜日/9:00～15:30 (定休日: 土曜・日曜・祝日)。
- 当日発送受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります。(300円(税別))
- 1回のご注文が5,000円以下(税別)の場合、送料として500円(税別)をご請求させていただきます。
- バイオマテリアル、外科器具およびZimVie社以外が製造した製品につきましては、返品できません。
※Splineインプラントシステムに含まれる一部の当社以外で製造された補綴関連製品についての返品は承ります。
- 製品の交換は弊社交換規定に則り承ります。

掲載の製品について

- 製品は改良のため、外観やパッケージ、仕様、販売価格など、予告なく変更することがございます。
- 掲載製品は、製造元による製造終了、弊社の輸入終了など、予告なく販売を終了することがございます。

医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00079

●製造販売元・販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2024 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0013 2024/09