

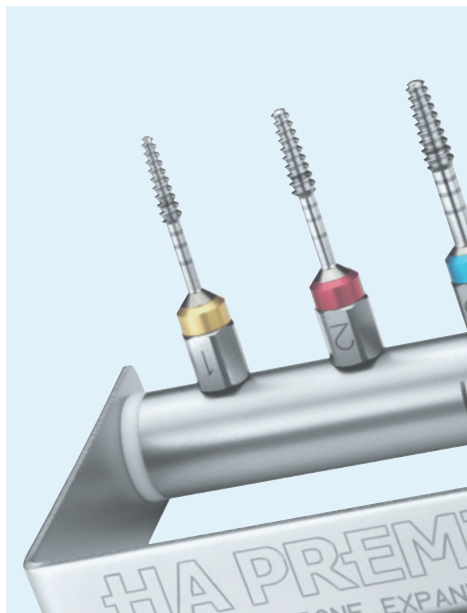


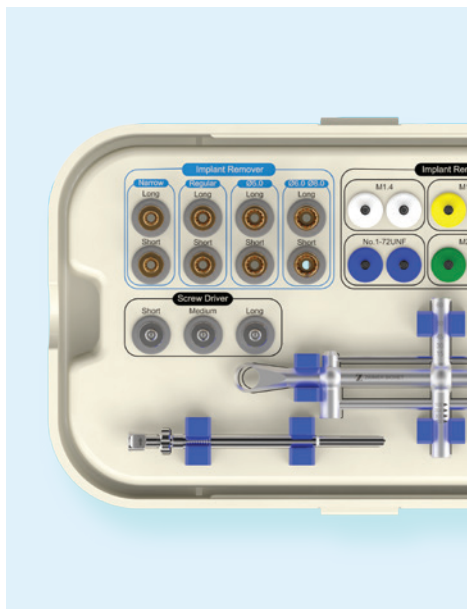

インプラント外科器具総合カタログ

2026年7月改訂

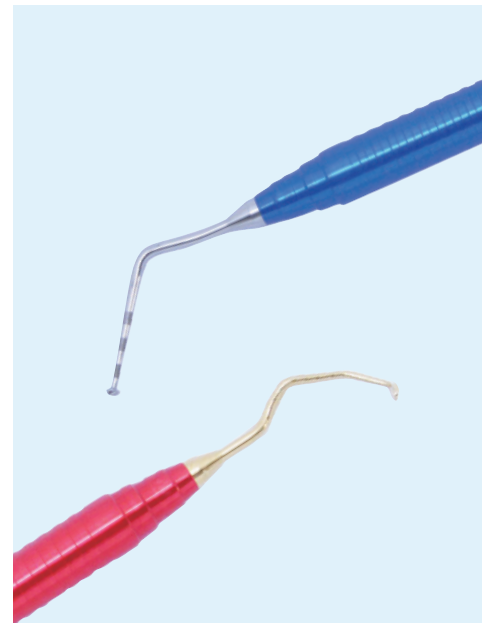

暫間インプラント ————— P4

暫間インプラント

一般外科器具 ————— P5

一般外科器具

口腔内スキャナー ————— P17

口腔内スキャナー

バイオマテリアル ————— P18

バイオマテリアル

マイクロスコープ ————— P19

マイクロスコープ

その他 ————— P20


その他

HMインプラント(暫間補綴用インプラント)

「HM インプラント」は、チタン合金 (Ti- 6Al- 4V) 製の暫間補綴用インプラントです。フィクスチャーの治癒期間中に、プロビジョナル・レストレーションの装着を必要とする症例において使用します。「HM インプラント」を用いることで、治癒を促進し審美性に優れた機能的なプロビジョナル・レストレーションを患者さまに提供することが可能となります。

HMインプラント(暫間補綴用インプラント)

製品番号			
		長さ	
	HMインプラントS (2.0mmD)	2本 10mm	PR0050
		2本 13mm	PR0051
	HMインプラントL (2.0mmD)	2本 10mm	PR0052
		2本 13mm	PR0053

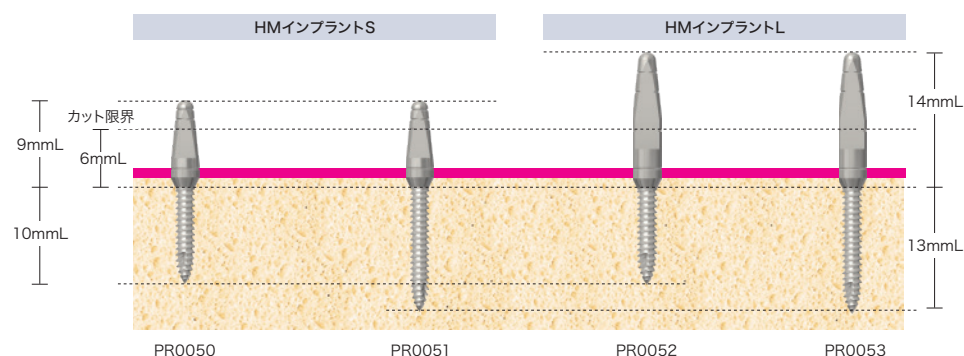

HMインプラント サージカルツール

HMインプラント専用のドリルです。

製品番号			
      	HMインプラント サージカル ケット キット内容: 1.3mmDドリル ショートタイプ (NS0002) 1.3mmDドリル ロングタイプ (NS0003) HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ (PR0041) HMインプラントドライバー ラチェットタイプ (PR0042) O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用 5個 (SU1014) HMインプラント サージカルケース (IPPI01 (HA-PB15-01))		HA0051
	1.3mmDドリル ショートタイプ		NS0002
	1.3mmDドリル ロングタイプ		NS0003
	HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ HMインプラントをハンドピースで埋入する際に装着し使用します。		PR0041
	HMインプラントドライバー ラチェットタイプ HMインプラントをヘルムート トルクラチェット [Z00007] で埋入する際に装着し使用します。		PR0042
	O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用 HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ [PR0041] と、 HMインプラントドライバー ラチェットタイプ [PR0042] の交換用O-リングです。	5個	SU1014
	HMインプラント サージカルケース HMインプラント用のドリル、ドライバーを収納するケースです。		HA-PB15-01 (IPPI01)


HA Premium

歯槽骨の幅径拡大およびインプラント窩形成に使用します。スクリータイプのため無理なく骨を圧縮できます。



製品番号		
リッジエキスパンダー HAプレミアム		DEN001

※当製品はセットでの販売のみとなります。単品販売はございません。
※パースタンド付属(滅菌可能)

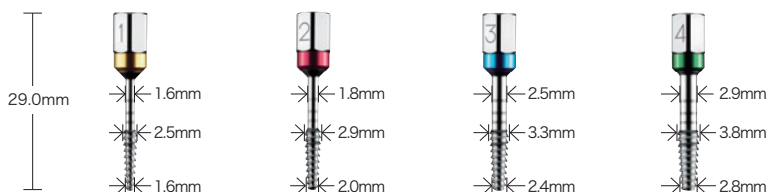


装着するシステムのパーツ

 47.801.20 (Z00007) ヘルムート トルクレンチ ¥60,000	➡	 PR0023 トルクレンチインサート ショート (14mm) ¥10,000	 PR0024 トルクレンチインサート ロング (17mm) ¥10,000
コントラ装着 	➡	 PR0025 ハンドピースドライバー ¥10,000	

HAリムーバーセット

先端には縦溝が3本あり、歯牙や骨の切削がスムーズに行えるダイヤモンドバーです。先端部0.1mmに天然ダイヤモンドを砥着しています。

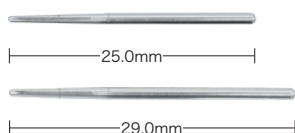

製品番号		
HAリムーバーセット 0.8mmD/25mmL 1本、 0.8mmD/29mmL 1本	2本セット	H00021

ジラマントダイヤモンドバー 6880Z

大ききの違うダイヤモンド粒子を高密度に蒸着し、ジルコニアやプレスセラミックスのような堅い補綴物もスムーズに切削できます。




製品番号		
ジラマントダイヤモンドバー 6880Z FG用	2本セット	6880Z

イミディエイトインプラントシステム

		製品番号
	イミディエイトインプラントシステム	
	キット内容: ●ドリル12本 ・ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD、3mmD、4mmD各1本 ・メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー 2mmD/25mm、29mm、34mm各1本 3mmD/25mm、29mm、34mm各1本 ・ISF ダイヤモンドバー 0.9mmD/26mm×1本、0.9mmD/34mm×2本 ●サージカルケース	12本セット HA0102

メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー


軸部が長いので、拔牙窩内での口腔内操作が容易になります。拔牙即時埋入の必需品です。

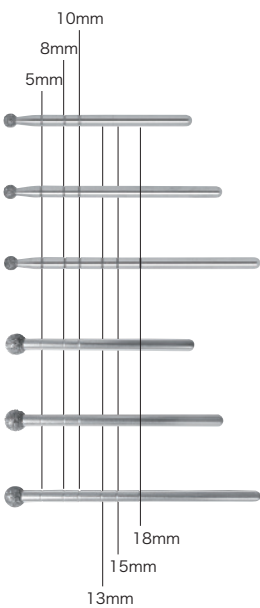		製品番号
	メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー アソートセット セット内容:M-20025～30034までの製品が各1本ずつ入っております。 ※それぞれ回転数が異なりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。	6本セット H00007
	ティッシュダイヤモンドバー 2mmD/25mmL 回転数10万回転以下	3本 M-20025
	ティッシュダイヤモンドバー 2mmD/29mmL 回転数10万回転以下	3本 M-20029
	ティッシュダイヤモンドバー 2mmD/34mmL 回転数3万回転以下	3本 M-20034
	ティッシュダイヤモンドバー 3mmD/25mmL 回転数10万回転以下	3本 M-30025
	ティッシュダイヤモンドバー 3mmD/29mmL 回転数10万回転以下	3本 M-30029
	ティッシュダイヤモンドバー 3mmD/34mmL 回転数3万回転以下	3本 M-30034

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。


ISF ダイヤモンドバー

先端までダイヤモンド加工が施されており、先端および側方への骨切削を可能にします。

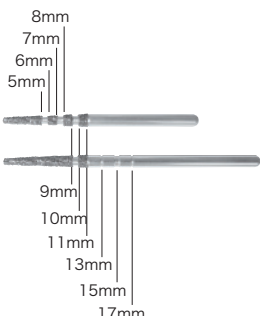		製品番号
	ISF ダイヤモンドバー 0.9mmD/26mmL 1本、 0.9mmD/34mmL 2本 回転数4万回転以下	3本セット H00017
	使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。	

ダイヤモンド ガイドドリル

側方への骨切削を可能にし、インプラント窩の形成を容易にします。

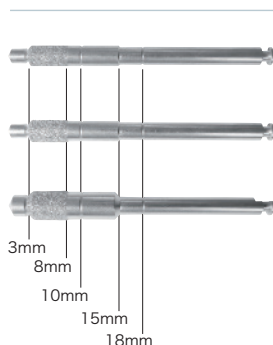

	製品番号
ダイヤモンド ガイドドリル 3mmD/35mmL 1本 4mmD/35mmL 1本 回転数1,200回転以下	H00014
ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD/35mmL 回転数1,200回転以下	H00018

使用上のご注意 外科用マイクロモーターにて外部注水で使用してください。


※ダイヤモンド ガイドドリル3mmD・4mmDは初回、2個セット[H00014]での販売となります。

サージカルトレー



	製品番号
イミディエイトインプラントシステム サージカルケース	HA-ST15-04 (IPPI02)

メリーダイヤ 2710

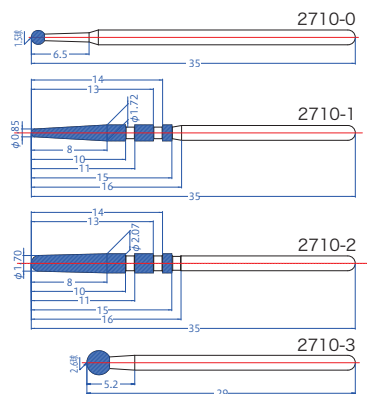


	製品番号
メリーダイヤ 2710 アソートセット (2710-0/2710-1/2710-2 各1本)	BAR2710
メリーダイヤ 2710-0 3本	BAR2710-0
メリーダイヤ 2710-1 3本	BAR2710-1
メリーダイヤ 2710-2 3本	BAR2710-2
メリーダイヤ 2710-3 3本	BAR2710-3

※各形状共に全長が27mmのショートサイズもございます(BAR2710-3を除く)。

※回転数4万回転以下

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

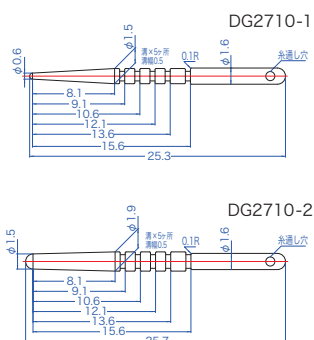

ディプスゲージ 2710

メリーダイヤ2710の使用の際に、ディプスゲージ2710を併用することで、より正確な深度を目視、またはX線像で確認できます。またディプスゲージを用いて方向を確認することもできます。

	製品番号
ディプスゲージ 2710 セット (DG2710-1/ DG2710-2 各1本)	DG2710

Sinus Crestal & Lateral Approach(SCLA) キット

歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術のためのキットです。



	製品番号
SCLAキット キット内容: ・ポイントドリル (2.9mmD) ・フラットドリル (2.8mmD) ・フラットラウンドドリル 2種 (3.0mmD/4.0mmD) ・リーマードリル 3種 (3.2mmD/3.5mmD/4.5mmD) ・ラテラルワイドドリル 2種 (4.5mmD/5.5mmD) ・ラテラルドームドリル 2種 (4.5mmD/5.5mmD) ・クレスタル ストッパー 10種 (1mmL/2mmL/3mmL/4mmL/5mmL/6mmL/7mmL/8mmL/9mmL/10mmL) ・ラテラル ストッパー 4種 (1mmL/1.5mmL/2mmL/2.5mmL) ・サイナスキュレット/サイナスリフト/ボーンパッカー/ ・専用ケース	J00040



ポイントドリル
2.9mmD



フラットドリル
2.8mmD



フラットラウンド
ドリル
3.0mmD



フラットラウンド
ドリル
4.0mmD



リーマードリル
3.2mmD



リーマードリル
3.5mmD



リーマードリル
4.5mmD



ストッパー
1mmL



ストッパー
2mmL



ストッパー
3mmL



ストッパー
4mmL



ストッパー
5mmL



ストッパー
6mmL



ストッパー
7mmL



ストッパー
8mmL



ストッパー
9mmL



ストッパー
10mmL



ラテラル
ワイドドリル
4.5mmD



ラテラル
ワイドドリル
5.5mmD



ラテラル
ドームドリル
4.5mmD



ラテラル
ドームドリル
5.5mmD



ストッパー
1mmL



ストッパー
1.5mmL



ストッパー
2mmL



ストッパー
2.5mmL



Sinus Curette




Sinus Lift




Bone Packer

DS Sinus Curette & Sinus Lift

上顎洞の粘膜を剥離する際に使用します。

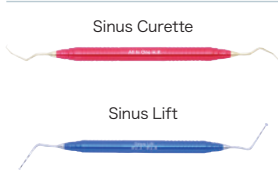		製品番号
 Sinus Curette Sinus Lift	DS Sinus Curette & Sinus Lift	J00026

※当製品はセットでの販売のみとなります。単品販売はございません。

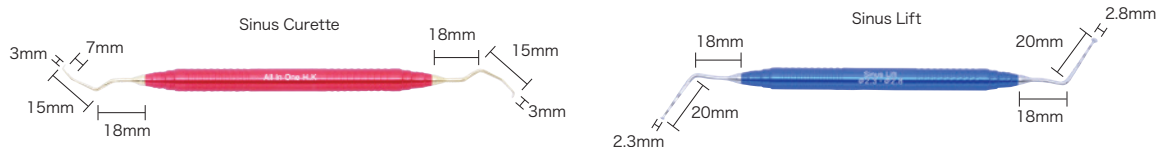

H-リフティングドリル キット

歯槽骨アプローチによる上顎洞底挙上術のためのキットです。


		製品番号
 H-リフティングドリル キット セット内容: ●ドリル7本: 2.5mmD / 3.0mmD / 3.25mmD / 3.5mmD / 4.0mmD / 4.5mmD / 5.0mmD ●ハンドル ●ケース ※セット販売のみでドリルの単品販売はしていません。		J00039

H-ツイストドリル キット

ツイストドリルとストッパーのキットです。

		製品番号
 H-ツイストドリル キット セット内容: ●ドリル4本: 2.0mmD / 2.5mmD / 3.0mmD / 3.3mmD ●ストッパー13個: 2mmL / 3mmL / 4mmL / 5mmL / 6mmL / 7mmL / 8mmL / 9mmL / 10mmL / 11mmL / 12mmL / 13mmL / 14mmL ●ケース ※セット販売のみでドリル/ストッパーの単品販売はしていません。		J00041

インプラント・リムーバル・キット

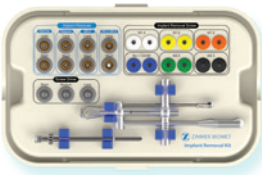		製品番号
	インプラント・リムーバル・キット ・IRKITには下記の製品が同梱されています。	IRKIT
	 インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4(2個入)	IRSR14
	 インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6(2個入)	IRSR16
	 インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8(2個入)	IRSR18
	 インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF(2個入)	IRSR172
	 インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0(2個入)	IRSR20
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【 ナロー / ショート 】	IR315
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【 レギュラー / ショート 】	IR415
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【 ワイド φ 5.0 / ショート 】	IR515
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【 ワイド φ 6.0 - 8.0 / ショート 】	IR615
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【 ナロー / ロング 】	IR320
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【 レギュラー / ロング 】	IR420
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【 ワイドφ 5.0 / ロング 】	IR520
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【 ワイド φ 6.0 - 8.0 / ロング 】	IR620
	スクリュー・ドライバー 7 mm(ショート)	SD7
	スクリュー・ドライバー 12 mm(ミディアム)	SD12
	スクリュー・ドライバー 17 mm(ロング)	SD17
	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	IRRW

アバットメントスクリュードライバー セット

国内流通の主要インプラント補綴用ドライバーが6本組のセットです。付属の専用ケースに収納し、滅菌可能です。

	製品番号
 アバットメントスクリュードライバー セット セット内容: ●ドライバー6種 ドライバー種類: Hex1.00AK/Hex1.22BM/Hex1.24AT/ Hex1.25ZM/NB/SR ●ホルダー ●ケース	KTC0002
 Hex1.00AK  Hex1.22BM  Hex1.24AT  Hex1.25ZM  NB  SR	

トルクレンチ Light

トルクレンチLightは外科から補綴までご使用いただけます。



	製品番号
トルクレンチ Light (15-80Ncm) スクエアアダプター付属	KTC0011

トルクラチェットレンチ プラス

トルクラチェットレンチプラスは外科から補綴までご使用いただけます。



	製品番号
トルクラチェットレンチ プラス (20-100Ncm)	KTC0012
極短レンチアダプタ (オプション)	KTC0013
貫通レンチアダプタ (オプション)	KTC0014

サイナスリフトツール

	製品番号
	骨膜剥離子 (鉤型) [1304/901] 1304/901 (M13041)
	骨膜剥離子 (屈曲型) [1304/902] 1304/902 (M13042)
	骨膜剥離子 (屈折型) [1304/904] 1304/904 (M13044)
	骨膜剥離子 (平型) [1304/905] 1304/905 (M13045)
	骨膜剥離子 (鉤型) [1309/1] 1309/1 (M13091)
	骨膜剥離子 (平型) [1309/9] 1309/9 (M13099)

抜歯即時埋入セット

		製品番号
	メデシー 抜歯即時埋入セット 本セットはトレー付です。(トレーの単品販売はございません) ※製品は改良のため外観を予告なく変更することがございます。	MED004
	ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (有鉤)	1014TC (M1014T)
	ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (無鉤)	1015TC (M1015T)
	剥離子 プーザー	1309/7 (M13097)
	歯肉ハサミ ゴールドマンフォックス	3557 (M35570)
	ルーカス ボーンキュレット/2.5mmD	661/85 (M66185)
	ルーカス ボーンキュレット/3.5mmD	661/87 (M66187)
	ルーカス ボーンキュレット/4.5mmD	661/88 (M66188)
	ボニートンネルプローブ (骨孔深度測定)	1301 (M13010)
	スカルペルメスホルダー (ストレート)	3631 (M36310)
	スカルペルメスホルダー (アングル)	3632 (M36320)
	カストロビージョ/180mm	1922/DTC (M1922D)

インプラント外科器具関連

		製品番号
	Xツール セットII 5本セット セット内容: MI0016～20までの製品が各1本ずつ入っております。 歯牙抜去の操作時、硬組織・軟組織の双方に与える侵襲を最小限に抑えることが可能です。また、骨組織を保全した良好な抜歯窩が得られます。	MI0015
 2.5mm	Xラクサツール1 歯牙の弛緩操作・脱臼操作に使用します。	h1700701 (MI0016)
 2.5mm	Xラクサツール3 歯牙の弛緩操作・脱臼操作に使用します。	h1700703 (MI0017)
 4.0mm	Xデズモツール1 鉤状の先端部が歯根膜空隙に容易に挿入が可能のため、歯周靱帯の切断と初期的な弛緩操作に使用します。	h1700705 (MI0018)
 4.0mm	Xデズモツール3 鉤状の先端部が歯根膜空隙に容易に挿入が可能のため、歯周靱帯の切断と初期的な弛緩操作に使用します。	h1700805 (MI0019)
 2.5mm	アプロキシマルエレベーター1 アングル付のため臼歯部の弛緩操作・脱臼操作に便利です。	h1700801 (MI0020)

※すべて受注発注となります。

スプレッティング システム

狭窄歯槽堤の骨を開くためのツールです。

		製品番号
	ポーンポイントド チゼル 幅4.0mm	MI0033
	ポーンポイントド チゼル 幅6.0mm	MI0034
	セパレーティングディスク 8mm	MI0035
	ウェッジ 2mm/2.2mm 緑	1個 MI0037
	ウェッジ 3mm/2.2mm 黄	1個 MI0038
	ウェッジアプリーケーター	MI0039

※すべて受注発注となります。

インプラント外科基本セット



メデシー インプラント外科基本セット

本セットはトレー付です。(トレーの単品販売はございません)
※製品は改良のため外観を予告なく変更することがございます。

製品番号

MED002

ステンベルグ口角鉤

890
(M89000)

ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (有鉤)

1014TC
(M1014T)

ティッシュプライヤー Micro-Adoson/120mm (無鉤)

1015TC
(M1015T)

メスホルダー (目盛り付)

3629
(M36290)

スペンサー抜糸用ハサミ/115mm

3528
(M35280)

歯肉ハサミ ラグランジュ/115mm

3525
(M35250)

カストロビージョ (アングル) マイクロニードルホルダー/140mm
マイクロサージェリー用の持針器です。

41.189.14
(Z00006)

ヘミングウェイ ボーンキュレット (小)

660/2
(M66020)

ヘミングウェイ ボーンキュレット (大)

660/4
(M66040)

剥離子 プリチャード/200mm

878
(M87800)

剥離子 モルト/8mm

854/H02
(M854H0)

剥離子 ブーザー

1309/7
(M13097)

インプラント外科器具関連

		製品番号
	スーチャープライヤー	1033 (M10330)
	ボーンスクレイパー (ストレート) ストレート用替刃[M1325L] 1枚付属	1325 (M13250)
	ボーンスクレイパー (アングル) アングル用替刃[M1325R] 1枚付属	1325/A (M1325A)
	ボーンスクレイパー ストレート用替刃	1325LR (M1325L)
	ボーンスクレイパー アングル用替刃	1325LRA (M1325R)
	マレット (170g)	951 (M95100)
	Dr.Cosci マレット	MART. (D00003)
	ボーンウェル φ30mm	M48550
	ボーンキャリアス (ピンセットタイプ)	4578 (M45780)
	ボーンキャリアス (ハサミタイプ)	4580 (M45800)
	ボーンキャリア/内径4.4mm	4883 (M48830)
	カストロビージョ (アングル) マイクロニードルホルダー/140mm マイクロサージェリー用の持針器です。	41.189.14 (Z00006)

インプラント外科器具関連

		製品番号
	インプラント ホルダー (チタン製)	1128 (M11280)
	歯肉ピンセット ジェラルド(ストレート) /175mm	1020/0-6-OY (M10200)
	マイクロシザー(ストレート) /155mm	1957/R (M19570)
	マイクロシザー(アングル) /155mm	1958/C (M19580)
	マイクロシザー(ストレート) /150mm	1959/R (M19590)
	マイクロシザー(アングル) /150mm	1960/C (M19600)
	歯肉バサミ ノイ(湾曲型)	3624 (M36240)
	TC クリルライド	1925ATC (M1925A)
	ポケットプローブ	548/4 (M54840)
	PDTペリオトーム 前歯用	MI0022
	PDTペリオトーム 臼歯用	MI0023

MEDIT iSeries

スキャン後のデータを最大限に活かすことができるアプリの豊富さが Medit 最大の魅力です。

術者が好みの機能を持つアプリを自由に選択し、インストールする事ができます。Medit Link ではスキャンデータをクラウドで管理するため、補綴製作データを取引先の歯科技工所へ簡単に早く共有することが可能です。


最新情報と
デモの依頼は
こちらから



iTero Lumina™ Pro

ワンドを小型化しスキャンスピードを向上、スキャン操作の効率化を追求した iTero Lumina™ Pro。難易度の高いスキャン採得をサポートし、補綴修復治療の DX 化をお手伝いします。

最新情報と
デモの依頼は
こちらから

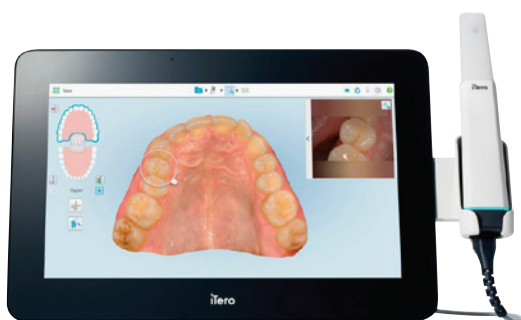

骨補填材「セラソルブ® M」

吸収性骨補填材セラソルブ®Mは、国内の歯科領域で認可された高純度のβ-TCP(β-リン酸三カルシウム)を主成分とした人工骨補填材です。生物由来製品とは異なり、不適合性やアレルギー、疾患伝播のリスクが低いです。

		
	セラソルブ® M 150-500µm 1.5cc (0.5cc×3本)	RI0031
 ※	セラソルブ® M 500-1000µm 1.5cc (0.5cc×3本)	RI0032
	セラソルブ® M 1000-2000µm 2.5cc (0.5cc×5本)	RI0005
	セラソルブ® M 1000-2000µm 5.0cc (1.0cc×5本)	RI0006



- ミクロ、メソマクロ、マクロ細孔からなる開放性の連通した多孔性(5-500µm)の顆粒構造が骨化プロセスを促し、これにより吸収プロセスも早くなります。
- 全気孔率は約65%を有し、この高い気孔率のために毛管効果が向上します。また気孔の連続性により吸収速度が上がる大きな要因となります。
- 骨の再生と同時に完全吸収します。

※ 本製品は患者さまから採血した血液と混和することにより、より良好な結果が得られます。

骨補填材「オズボーン®」

非吸収性合成ハイドロキシアパタイトOsbone®は、ヒトまたは動物/異種移植片由来のハイドロキシアパタイト製品に換わる安全で効果的な代替品を提供する次世代の骨補填材です。

		製品番号
	オズボーン® 250～1000μm (0.5cc×1本入)	9000800501※1 (OS0001)
 ※	オズボーン® 1000～2000μm (1cc×1本入)	9000901001※1 (OS0002)



- 顆粒は海绵骨構造に類似した多孔性構造を有し、顆粒上の細孔は相互に連通し細孔のネットワークを構成しています。
- 局所にも優れた組織適合性の実証されており、不適合性、アレルギー、感染リスクが低く一定の品質レベルを維持しています。

※ キャップ色は出荷時期により異なるカラー場合があります。

※1は新品番になり、()内は旧品番になります。ご注文は新旧品番いずれもご使用できます。

セーフスクレイパー・ツイスト

外科的侵襲を最低限に抑え、自家骨を容易に採取。

		製品番号
	セーフスクレイパー 直 3本入	53-001
	セーフスクレイパー 曲 3本入	53-002

プロスペクト・コンパクト 2 Brilliant

明るく鮮明な術野視認性とコストパフォーマンス性に優れたプロスペクト・コンパクト2にハイスベックバージョンの「Brilliant - ブリリアント-」が新登場。より繊細かつスムーズなアームワークを実現する「バランスアーム」や、内蔵フルハイビジョンカメラを標準装備し、術者の操作快適性、患者さまとのコミュニケーション性がさらに向上。

	製品番号
プロスペクト・コンパクト2 Brilliant -ブリリアント-	PE0033



● バランスアーム

新設計のバランスアームを搭載し、外部カメラなどのアクセサリ装着時における重量バランスも微細な調整が可能 (Brilliantのみ標準装備)。

● バリオディスト

対物レンズの焦点距離を190mm~300mm(距離:110mm)の範囲で調整することができ、術中のクイックなフォーカシングが可能となります(全機種標準装備)。

● 可変式ワイドペアハンドル

ワーキングスペースを大きく確保できるワイドタイプハンドル。
(Brilliantのみ標準装備)

● フルハイビジョンカメラ

フルハイビジョンカメラを内蔵し、外部にアダプターやカメラを装着することなく、1920×1080 (約207万画素) の高解像度映像を撮影・出力することができます。
(Brilliantのみ標準装備)



オプション	製品番号
デュアルアイリス リング [ホワイト]	PE0022

※すべて受注発注となります。

オプション:アングルロテーション機能	製品番号
アングルロテーションリング [ホワイト]	PE0011
アングルロテーションエクステンダー [ホワイト]	PE0012

※アングルロテーション機能には、アングルロテーションリング[PE0011]とアングルロテーションエクステンダー[PE0012]の組合せ、または、アングルロテーションリング[PE0011]とビームスプリッター2(アングルロテーションエクステンダータイプ)[PE0014]の組合せが必要となります。

※すべて受注発注となります。

オプション:外部カメラ用アクセサリ	製品番号
ビームスプリッター2 [ホワイト]	PE0013
ビームスプリッター2 (アングルロテーション エクステンダー) [ホワイト]	PE0014
デジタルカメラアダプタ2 (ソニー Eマウント APS-HD センサー用) [ホワイト]	PE0017
デジタルカメラアダプタ2 (ソニー Aマウント APS-HD センサー用) [ホワイト]	PE0018
デジタルカメラアダプタ2 (ニコン Fマウント DX フォーマット用) [ホワイト]	PE0019
デジタルカメラアダプタ2 (キャノン EF-S マウント APS-C センサー用) [ホワイト]	PE0020
デジタルカメラアダプタ2 (キャノン EF マウント フルサイズセンサー用) [ホワイト]	PE0021
デジタルカメラアダプタ2 (モバイルフォン用/Easy 360) [ホワイト]	PE0034
モバイルフォン用 固定カバー(ユニバーサルタイプ)	PE0062
ビデオキャプチャー JGR-100FS、SDカード(64GB) + フットスイッチ付	PE0063

※すべて受注発注となります。

SurgicPro2 ライト付

マイクロモーターシステム「Surgic Pro2」は、動作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を兼ね備え、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し、効率の良い施術をサポートします。



	製品番号
Surgic Pro2 標準セット: ・コントロールユニット/SGL80M ・ライト付マイクロモーター/X-SG20ML ・ライト付ハンドピース(20:1減速)/ワイヤレスフットコントロール/ イリゲーションチューブ(3本入) ・他付属品	Y1500356-ZV
イリゲーションチューブ10本入	Y1001210-ZV

Osseo 100+

ISQ測定器Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値(インプラント安定指数)を表示します。これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになるため、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。



	製品番号
Osseo 100+ 標準セット: Osseo 100+ 本体/マルチベグドライバー/ACアダプター/ ACアダプター用プラグ(US/JP)/ISQテスター ※マルチベグは別売りです。本体には含まれていません。	Y1500447-ZV
マルチベグ 3i External Hex Type1	55011-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 紫 Type28	55036-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑 Type58	55066-ZV
マルチベグ TSV 3.7-4.1 Type41	55049-ZV
マルチベグ TSV 4.7-6.0 Type43	55051-ZV
マルチベグ TSP 3.8 Type62	55070-ZV
マルチベグ TSP 4.8 Type4	55014-ZV
マルチベグ SPLINE 3.75mmD/5mmD Type30	55038-ZV

※マルチベグは20回滅菌可能

iSD900

インプラント埋入後のカバースクリューやヒーリングキャップ、アバットメントの着脱において、術者の利便性と安全性を高めるコードレスドライバー。施術スピードの向上と広い術野の確保を実現し、術者の負担を軽減します。



	製品番号
iSD900 標準セット: iSD900 モーターハンドピース/ iSD-HP コントラアングルヘッド/ iSD900 用充電器/ AC コード/トルクキャリブレーター/ キャリブレーションバー/ ON/OFF スイッチレバー/ F タイプスプレーノズル/モーターキャップ	Y1001356-ZV

MD11 モーターシステム

すべての設定値がひと目でわかる視認性に優れたディスプレイを採用。コンパクトで高品質な本体は、清掃性に優れた表面処理で衛生的。低振動、低騒音な小型モーターは、動力伝達がスムーズなため術者の負担を軽減。

	製品番号
イリゲーションチューブ ディスポ(CBM用/MD11用) 2m 10個	NM1706
内部注水用ノズル (MD11用)	39116
ノズル専用クリップ (MD11用)	39117

W&H インプラントメッド SI-1010

	製品番号
イリゲーションチューブ(W&Hインプラントメッド用) 6個	668053-ZB

サニスリーブ コードカバー

一般歯科診療および口腔外科手術時の患者さまの血液や唾液からハンドピースやホースをガードする、ポリエステル製の滅菌済スリーブです。長いホースやケーブルに簡単に装着でき、ハンドピースなどの操作にも支障がありません。

	製品番号
サニスリーブ コードカバー 滅菌済み 12個	4001830087AG

ドレープセット

	製品番号
オペドレープセット	220537149207

ピエゾトームCube

簡単操作のタッチパネルを採用したピエゾトームCube。

最新のニュートロンテクノロジーにより従来型の機種(サテレック社製)より30%のパワーアップ。最大出力78Wのパワーを発揮し、切削効率が向上しました。最小パワーもさらに弱くなったことにより、より安全にご使用いただけます。

		製品番号
	ピエゾトームCube ・本体 ・ピエゾトームCube ハンドピース(ケーブル付) ・エッセンシャルキット (BS1S / BS4 / SL1/ SL2 / SL3 / LC2) ・マルチファンクション フットスイッチ ・ハンドピースホルダー ・トルクレンチ ・ブラケット	00824700-ZB
	注水チューブ	00823454-ZB
           	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824610-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-1スリム	00824617-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-1ロング	00824618-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-2L	00824612-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-2R	00824613-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-4	00824614-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-5	00824615-ZB
	ピエゾトーム2 ポーンサージェリーチップ BS-6	00824616-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824620-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-1	00824621-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-2	00824622-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-3	00824623-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-4	00824624-ZB
	ピエゾトーム2 サイナスリフトチップ SL-5	00824625-ZB

※すべて受注発注となります。

	ピエゾトーム2 イントラリフトキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824640-ZB
	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW1	00824641-ZB
	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW2	00824642-ZB
	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW3	00824643-ZB
	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW4	00824644-ZB
	ピエゾトーム2 イントラリフトチップ TKW5	00824645-ZB
	ピエゾトーム2 エクストラクションキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824630-ZB
	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC1	00824631-ZB
	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2	00824633-ZB
	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2L	00824634-ZB
	ピエゾトーム2 エクストラクションチップ LC2R	00824635-ZB
	ピエゾトーム2 ニンジャチップ	00824636-ZB
	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824650-ZB
	ピエゾトーム2 ボーンサーージェリーチップ BS-6	00824616-ZB
	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE1	00824651-ZB
	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE2	00824652-ZB
	ピエゾトーム2 クラウンエクステンションチップ CE3	00824653-ZB

※すべて受注発注となります。



ピエゾトーム2 クレストスプリッティングキット 以下のチップが各1本含まれるセット	00824670-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS1	00824671-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS2	00824672-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS3	00824673-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS4	00824674-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS5	00824675-ZB
ピエゾトーム2 クレストスプリッティングチップ CS6	00824676-ZB

※すべて受注発注となります。

メディフュージ

採血後すぐにセットし、13分間で自動的にフィブリンゲルが作製されます。
 添加物なし、分離操作なし。手間いらずでランニングコストを最小限にできます。




	製品番号
メディフュージ MF200 100	② C00020

Yirro-plusミラー

ミラー表面へ効率的にエアを噴射することで、患者さまの呼吸による曇りや、水滴の付着を防ぎ、つねにクリアな視界を維持。ミラーヘッドには独自のHR (High Reflectivity / 高反射率) ミラーを採用。軽量化を追求し、長時間にわたる術者の疲労感を低減。

		製品番号
	Yirro-plusミラー【コンフォート】 スターターセット (マニュアル ON/OFF)	YPM-0427
	Yirro-plusミラー【プレミアム】 スターターセット (オート ON/OFF)	YPM-0426
	フットペダル ※プレミアム専用	YPMAC-0268
	ミラーヘッド No.0(6本入)	YPMAC-0002
	ミラーヘッド No.2(6本入)	YPMAC-0009
	ミラーヘッド No.2 XL(3本入)	YPMAC-1062
	ミラーハンドル(6本入)	YPMAC-0428
	noSPOT オートクレープ キャップ(6個入)	YPMAC-0514
	クリーニングボックス	YPMAC-0312

※すべて受注発注となります。

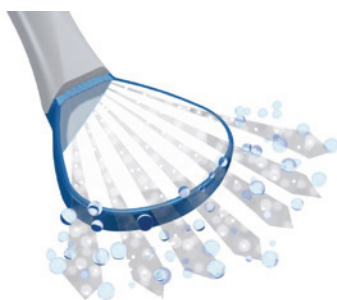

通常ミラー

Yirro-plusミラー

OPアンカー

40年以上の長期にわたり、累計90万個以上の販売実績があります。天然歯のオーバーデンチャー用根面アタッチメントです。歯根を支台装置とすることで顎堤を保護し、安定した義歯を提供できます。

メールパターン・フィメールラバー（1箱／各10個）、アンカーメジャーのセット


		製品番号
	OPアンカーアタッチメント No.1	10個
	OPアンカーアタッチメント No.2	10個
	OPアンカーアタッチメント No.3	10個
	OPアンカーアタッチメント No.4	10個



アンカーメジャー

- 円の部分はメールパターン基底面の大きさ
- 斜線の部分はメールパターンの高径の削除量を表しています


■フィメールラバー寸法

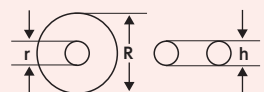

種類	外径(R)	内径(r)	高さ(h)
NO.1	3.5mm	1.0mm	1.25mm
NO.2	4.5mm	1.5mm	1.5mm
NO.3	5.0mm	1.6mm	1.7mm
NO.4	5.5mm	1.9mm	1.8mm

(許容範囲10%)

■メールパターン寸法

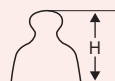

※メールパターンのみの販売はございません。

種類	高さ(H)	種類	高さ(H)
NO.1	2.1~3.6mm	NO.3	2.8~4.3mm
NO.2	2.6~4.1mm	NO.4	3.0~4.5mm

(許容範囲10%)

		製品番号
	交換用フィメールラバー (単品) No.1	10個
	交換用フィメールラバー (単品) No.2	10個
	交換用フィメールラバー (単品) No.3	10個
	交換用フィメールラバー (単品) No.4	10個

インプラント外科器具総合カタログ INDEX

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
0～			
53-001	セーフスクレイパー・ツイスト 直 3本入	22000BZX00802000	P18
53-002	セーフスクレイパー・ツイスト 曲 3本入	22000BZX00802000	P18
55011-ZV	マルチベグ 3i External Hex Type1	09B2X00016000153	P22
55036-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 紫 Type28	09B2X00016000153	P20
55066-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑 Type58	09B2X00016000153	P20
55049-ZV	マルチベグ TSV 3.7-4.1 Type41	09B2X00016000153	P20
55051-ZV	マルチベグ TSV 4.7-6.0 Type43	09B2X00016000153	P20
55070-ZV	マルチベグ TSP 3.8 Type62	09B2X00016000153	P20
55014-ZV	マルチベグ TSP 4.8 Type4	09B2X00016000153	P20
55038-ZV	マルチベグ SPLINE 3.75mmD/5mmD Type30	09B2X00016000153	P20
668053-ZB	イリゲーションチューブ(W&Hインプラントメッド用)6本	27B1X00020225002	P21
6880Z	ジラマントダイヤモンドバー 2本入	13B1X00004000211	P5
00824700-ZB	ビエゾームCube	230ALBZX00015000	P22
00823454-ZB	注水チューブ	27B1X00020220064	P22
00824463-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトチップ SL-3	223ALBZX00018000	P22
00824610-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーキット	223ALBZX00018000	P22
00824612-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2L	223ALBZX00018000	P22
00824613-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-2R	223ALBZX00018000	P22
00824614-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-4	223ALBZX00018000	P22
00824615-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-5	223ALBZX00018000	P22
00824616-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-6	223ALBZX00018000	P22、23
00824617-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1スリム	223ALBZX00018000	P22
00824618-ZB	ビエゾーム2 ボーンサージェリーチップ BS-1ロング	223ALBZX00018000	P22
00824620-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトキット	223ALBZX00018000	P22
00824621-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトチップ SL-1	223ALBZX00018000	P22
00824622-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトチップ SL-2	223ALBZX00018000	P22
00824624-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトチップ SL-4	223ALBZX00018000	P22
00824625-ZB	ビエゾーム2 サイナスリフトチップ SL-5	223ALBZX00018000	P22
00824630-ZB	ビエゾーム2 エクストラクションキット	223ALBZX00018000	P23
00824631-ZB	ビエゾーム2 エクストラクションチップ LC1	223ALBZX00018000	P23
00824633-ZB	ビエゾーム2 エクストラクションチップ LC2	223ALBZX00018000	P23
00824634-ZB	ビエゾーム2 エクストラクションチップ LC2L	223ALBZX00018000	P23
00824635-ZB	ビエゾーム2 エクストラクションチップ LC2R	223ALBZX00018000	P23
00824636-ZB	ビエゾーム2 ニンジャチップ	223ALBZX00018000	P23
00824640-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトキット	223ALBZX00018000	P23
00824641-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトチップ TKW1	223ALBZX00018000	P23
00824642-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトチップ TKW2	223ALBZX00018000	P23
00824643-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトチップ TKW3	223ALBZX00018000	P23
00824644-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトチップ TKW4	223ALBZX00018000	P23
00824645-ZB	ビエゾーム2 イントラリフトチップ TKW5	223ALBZX00018000	P23
00824650-ZB	ビエゾーム2 クラウンエクステンションキット	223ALBZX00018000	P23
00824651-ZB	ビエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE1	223ALBZX00018000	P23
00824652-ZB	ビエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE2	223ALBZX00018000	P23
00824653-ZB	ビエゾーム2 クラウンエクステンションチップ CE3	223ALBZX00018000	P23
00824670-ZB	ビエゾーム2 クレストスプリッティングキット	223ALBZX00018000	P24
00824671-ZB	ビエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS1	223ALBZX00018000	P23
00824672-ZB	ビエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS2	223ALBZX00018000	P23
00824673-ZB	ビエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS3	223ALBZX00018000	P23
00824674-ZB	ビエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS4	223ALBZX00018000	P23

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
00824675-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS5	223ALBZX00018000	P24
00824676-ZB	ピエゾーム2 クレストスプリッティングチップ CS6	223ALBZX00018000	P24
220537149207	オベドレーブセット	13B1X00061140028	P21
4001830087AG	サニスリーブ コードカバー 滅菌済み(12個入)	—	P21
B～			
BAR2710	メリーダイヤ 2710 アソートセット(2710-0/2710-1/2710-2 各1本)	13B3X00256	P7
BAR2710-0	メリーダイヤ 2710-0 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-1	メリーダイヤ 2710-1 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-2	メリーダイヤ 2710-2 3本	13B3X00256	P7
BAR2710-3	メリーダイヤ 2710-3 3本	13B3X00256	P7
D～			
D00003	Dr.Cosci マレット(180g)	13B1X00079000023	P15
DEN001	リッジエクスパンダー HAプレミアム	13B1X00079000027	P5
DG2710	ディブスゲージ2710セット	13B3X00256000002	P7
H～			
H00007	メリーダイヤ ティッシュダイヤモンドバー アソートセット	13B3X00256000001	P6
H00008	ティッシュダイヤモンドバー [M-20025] 2mmD/25mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00009	ティッシュダイヤモンドバー [M-20029] 2mmD/29mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00010	ティッシュダイヤモンドバー [M-30025] 3mmD/25mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00011	ティッシュダイヤモンドバー [M-30029] 3mmD/29mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00012	ティッシュダイヤモンドバー [M-20025] 2mmD/34mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00013	ティッシュダイヤモンドバー [M-30034] 3mmD/34mmL 3本	13B3X00256000001	P6
H00014	ダイヤモンド ガイドドリル(2本セット)3mmD/35mmL 1本、4mmD/35mmL 1本	13B1X00079000028	P7
H00015	ダイヤモンド ガイドドリル 3mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00016	ダイヤモンド ガイドドリル 4mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00017	ISF ダイヤモンドバー(3本セット)0.9mmD/26mmL 1本、0.9mmD/34mmL 2本	13B1X00079000037	P7
H00018	ダイヤモンド ガイドドリル 2.75mmD/35mmL	13B1X00079000028	P7
H00021	HAリムーバーセット(2本セット)0.8mmD/25mmL 1本、0.8mmD/25mmL 1本	13B1X00079000060	P5
HA0102	イミディエイトインプラントシステム	—	P6
HA0051	HMインプラント キット	13B1X00079000063 13B1X00079000064	P4
I～			
IPPI01	HMインプラント サージカルケース	—	P4
IPPI02	イミディエイトインプラントシステム サージカルケース	—	P7
IRKIT	インプラント・リムーバル・キット	13B1X00079000143	P10
IRSR14	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR16	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR18	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR172	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR20	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0(2個入)	13B1X00079000143	P10
IRSR25	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.5(2個入)	13B1X00079000143	P10
IR315	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【ナロー / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR415	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【レギュラー / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR515	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【ワイドφ 5.0 / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR615	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【ワイドφ 6.0 - 8.0 / ショート】	13B1X00079000143	P10
IR320	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【ナロー / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR420	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【レギュラー / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR520	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【ワイドφ 5.0 / ロング】	13B1X00079000143	P10
IR620	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【ワイドφ 6.0 - 8.0 / ロング】	13B1X00079000143	P10
IRRW	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	13B1X00079000143	P10

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
J～			
J00026	DS Sinus Curette & Sinus Lift	13B1X00079000070	P9
J00039	H-リフティングドリル キット	13B1X00079000072	P9
J00040	Sinus Curette & Lateral Approach (SCLA)kit	301AGBZX00032000	P8
J00041	H-ツイストドリル キット	301AGBZX00082000	P9
K～			
K00004	OPアンカーアタッチメント No.1 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00005	OPアンカーアタッチメント No.2 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00006	OPアンカーアタッチメント No.3 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00007	OPアンカーアタッチメント No.4 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00008	交換用フィメールラバー (単品) No.1 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00009	交換用フィメールラバー (単品) No.2 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00010	交換用フィメールラバー (単品) No.3 (10個)	221AGBZX00187000	P26
K00011	交換用フィメールラバー (単品) No.4 (10個)	221AGBZX00187000	P26
KTC0002	アパットメントスクリュードライバー セット	26B3X10009170021	P11
KTC0011	トルクレンチ Light (15-80Ncm)	26B3X10009200001	P11
KTC0012	トルクラチェットレンチ プラス (20-100Ncm)	26B3X10009230001	P11
KTC0013	極短レンチアダプタ (オプション)	26B3X10009130011	P11
KTC0014	貫通レンチアダプタ (オプション)	26B3X10009130011	P11
M～			
M1014T	ディッシュブライヤー Micro-Adoson / 120mm (有鉤) [1014TC]	13B1X00079000007	P12、14
M1015T	ディッシュブライヤー Micro-Adoson / 120mm (無鉤) [1015TC]	13B1X00079000007	P12、14
M10200	歯肉ピンセット ジェラルド (ストレート) / 175mm	13B1X00079000006	P16
M10330	スーチャーブライヤー [1033]	13B1X00079000013	P15
M11280	インプラント ホルダー (チタン製)	13B1X00079000012	P16
M13010	ボニートンネルプローブ (骨孔深度測定) [1301]	13B1X00079000007	P12
M13041	骨膜剥離子 (鉤型) [1304 / 901]	13B1X00079000009	P11
M13042	骨膜剥離子 (屈曲型) [1304 / 902]	13B1X00079000009	P11
M13044	骨膜剥離子 (屈折型) [1304 / 904]	13B1X00079000009	P11
M13045	骨膜剥離子 (平型) [1304 / 905]	13B1X00079000009	P11
M13091	骨膜剥離子 (鉤型) [1309 / 1]	13B1X00079000009	P11
M13097	剥離子 ブーザー [1309 / 7]	13B1X00079000007	P12、14
M13099	骨膜剥離子 (平型) [1309 / 9]	13B1X00079000009	P11
M13250	ボーンスクレイパー (ストレート) [1325]	13B1X00079000004	P15
M1325A	ボーンスクレイパー (アングル) [1325 / A]	13B1X00079000004	P15
M1325L	ボーンスクレイパー ストレート用替刃 [1325 / LR]	13B1X00079000004	P15
M1325R	ボーンスクレイパー アングル用替刃 [1325 / LRA]	13B1X00079000004	P15
M1922D	カストロビージョ / 180mm [1922 / D-TC]	13B1X00079000007	P12
M1925A	クリルライド [1925 / A-TC]	13B1X00079000008	P16
M19570	マイクロシザー ストレート / 155mm [1957]	13B1X00079000006	P16
M19580	マイクロシザー アングル / 155mm [1958]	13B1X00079000006	P16
M19590	マイクロシザー ストレート / 150mm [1959]	13B1X00079000006	P16
M19600	マイクロシザー アングル / 150mm [1960]	13B1X00079000006	P16
M35250	歯肉ハサミ ラグランジュ / 115mm [3525]	13B1X00079000008	P14
M35280	スペンサー抜糸用ハサミ / 115mm [3528]	13B1X00079000008	P14
M35570	歯肉ハサミ ゴールドマンフォックス [3557]	13B1X00079000007	P12
M36240	歯肉ハサミ ノイ (湾曲型) [3624]	13B1X00079000008	P16
M36290	メスホルダー (目盛り付) [3629]	13B1X00079000008	P14
M36310	スカルペルメスホルダー (ストレート) [3631]	13B1X00079000007	P12
M36320	スカルペルメスホルダー (アングル) [3632]	13B1X00079000007	P12

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
M45780	ボーンキャリバス (ピンセットタイプ) [4578]	13B1X00079000025	P15
M45800	ボーンキャリバス (ハサミタイプ) [4580]	13B1X00079000010	P15
M48550	ボーンウェル φ30mm	13B1X00079000025	P15
M48820	ボーンキャリア / 内径2.5mm [4882]	13B1X00079000025	P15
M48830	ボーンキャリア / 内径4.4mm [4883]	13B1X00079000025	P15
M54840	ポケットプローブ [548 / 4]	13B1X00079000005	P16
M64024	ボールスケール [640 / 24]	13B1X00079000025	P16
M66020	ヘミングウェイ ボーンキュレット (小) [660 / 2]	13B1X00079000008	P14
M66040	ヘミングウェイ ボーンキュレット (大) [660 / 4]	13B1X00079000008	P14
M66185	ルーカス ボーンキュレット / 2.5mmD [661 / 85]	13B1X00079000007	P12
M66187	ルーカス ボーンキュレット / 3.5mmD [661 / 87]	13B1X00079000007	P12
M66188	ルーカス ボーンキュレット / 4.5mmD [661 / 88]	13B1X00079000007	P12
M854H0	剥離子 モルト / 8mm [854 / H02]	13B1X00079000008	P14
M87800	剥離子 プリチャード / 200mm [878]	13B1X00079000008	P14
M89000	ステンベルグ 口角鉤 [890]	13B1X00079000008	P14
M95100	マレット (170g) [951]	13B1X00079000025	P15
MED002	メデシー インプラント外科基本セット	—	P14
MED004	メデシー 抜歯即時埋入セット	—	P12
MI0015	Xツール セットII (5本セット)	13B1X10089000159	P13
MI0016	Xラクサツール1 [h1700701]	13B1X10089000159	P13
MI0017	Xラクサツール3 [h1700703]	13B1X10089000159	P13
MI0018	Xデズモツール1 [h1700705]	13B1X10089000159	P13
MI0019	Xデズモツール3 [h1700805]	13B1X10089000159	P13
MI0020	アプロキシマルエレベーター1 [h1700801]	13B1X10089000159	P13
MI0022	PDTペリオトーム 前歯用 [p00310pp]	13B1X10089000047	P16
MI0023	PDTペリオトーム 臼歯用 [p00311pp]	13B1X10089000047	P16
MI0033	ボーンポインテッド チゼル (幅4.0mm)	13B1X10089000132	P13
MI0034	ボーンポインテッド チゼル (幅6.0mm)	13B1X10089000132	P13
MI0035	セパレーティングディスク 8mm	13B1X10089000130	P13
MI0037	ウェッジ 2mm / 2.2mm 緑 (1個)	13B1X10089000131	P13
MI0038	ウェッジ 3mm / 2.2mm 黄 (1個)	13B1X10089000131	P13
MI0039	ウェッジアプリーケーター	13B1X10089000131	P13
N~			
NM1706	イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (CBM用 / MD11用) / 2m	—	P21
NM39116	内部注水用ノズル (MD11用)	230AGBZX00037000	P21
NM39117	内部注水用ノズル専用クリップ (MD11用)	230AGBZX00037000	P21
NS0002	1.3mmDドリル ショートタイプ (HMインプラント用)	13B1X00079000064	P4
NS0003	1.3mmDドリル ロングタイプ (HMインプラント用)	13B1X00079000064	P4
O~			
OS0001	Osbone 250-1000μm (0.5cc × 1本)	23100BZX00011000	P18
OS0002	Osbone 1000-2000μm (1cc × 1本)	23100BZX00011000	P18
P~			
PE0011	アングルローテーション リング [ホワイト]	13B2X00022000074	P21
PE0012	アングルローテーション エクステンダー [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0013	ビームスプリッター-2 (ホワイト)	13B2X00022000074	P19
PE0014	ビームスプリッター-2 (アングルローテーション エクステンダータイプ) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0017	デジタルカメラ アダプタ2 (ソニー Eマウント APS-HDセンサー用) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0018	デジタルカメラ アダプタ2 (ソニー Aマウント APS-HDセンサー用) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0019	デジタルカメラ アダプタ2 (ニコン Fマウント DXフォーマット用) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0020	デジタルカメラ アダプタ2 (キャノン EF-Sマウント APS-Cセンサー用) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
PE0021	デジタルカメラ アダプタ2(キャノン EFマウント フルサイズセンサー用) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PE0033	ブロスベクトコンパクト2 ブリリアント	13B2X00022000108	P19
PE0034	デジタルカメラアダプタ2(モバイルフォン用/Easy 360) [ホワイト]	13B2X00022000074	P19
PR0023	トルクラチェットインサート ショート(14mm)	13B1X00079000050	P5
PR0024	トルクラチェットインサート ロング(17mm)	13B1X00079000050	P5
PR0025	ハンドピースドライバー (20mm)	13B1X00079000050	P5
PR0041	HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ	13B1X00079000063	P4
PR0042	HMインプラントドライバー ラチェットタイプ	13B1X00079000063	P4
PR0050	HMインプラントS (2本)2.0mmD/10mmL	22600BZX00519000	P4
PR0051	HMインプラントS (2本)2.0mmD/13mmL	22600BZX00519000	P4
PR0052	HMインプラントL (2本)2.0mmD/10mmL	22600BZX00519000	P4
PR0053	HMインプラントL (2本)2.0mmD/13mmL	22600BZX00519000	P4
PE0062	モバイルフォン用 固定カバー (ユニバーサルタイプ)	—	P19
PE0063	ビデオキャプチャー JGR-100FS、SDカード(64GB) + フットスイッチ付	—	P19
R～			
RI0005	セラソルブ®M 1000-2000μm 2.5cc(0.5cc×5本)	22400BZX00002000	P18
RI0006	セラソルブ®M 1000-2000μm 5.0cc(1.0cc×5本)	22400BZX00002000	P18
RI0031	セラソルブ®M 150-500μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P18
RI0032	セラソルブ®M 500-1000μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P18
S～			
SD7	スクリュー・ドライバー 7 mm(ショート)	13B1X00079000143	P10
SD12	スクリュー・ドライバー 12 mm(ミディアム)	13B1X00079000143	P10
SD17	スクリュー・ドライバー 17 mm(ロング)	13B1X00079000143	P10
SU1014	O-リング ユニバーサルドライバー4mm スクエア用	13B1X00079000048	P4
Y～			
YPM-0426	Yirro-plusミラー【プレミアム】 スターターセット	13B2X00022000099	P25
YPM-0427	Yirro-plusミラー【コンフォート】 スターターセット	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0002	ミラーヘッド No.0(6本入)	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0009	ラーヘッド No.2(6本入)	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0268	フットペダル ※プレミアム専用	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0312	クリーニングボックス	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0428	ミラーハンドル(6本入)	13B2X00022000099	P25
YPMAC-0514	noSPOT オートクレープ キャップ(6個入)	13B2X00022000099	P25
YPMAC-1062	ミラーヘッド No.2 XL(3本入)	13B2X00022000099	P25
Y1001210-ZV	イリゲーションチューブ ディスポ 10個	09B1X00001000023	P20
Y1001356-ZV	iSD900 標準セット	222ALBZX00016000	P20
Y1500356-ZV	Surgic Pro2 標準セット	303ALBZX00014000	P20
Y1500447-ZV	Osseo 100+ 標準セット	09B2X00016000153	P20
Z～			
Z00006	カストロビージョ(アングル) マイクロニードルホルダー/140mm	13B1X00079000031	P14, 15
Z00007	ヘルムート トルクラチェット(10-40N・cm)	13B1X00079000043	P5



 NOTES

[illegible]

[illegible]

FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル 0120-118-084

※太枠内をご記入ください

No.

ご注文日	月 日	希望納期	月 日 午前 ・ 午後 まで
タイム便	☐ 使用する	• 地域によってご利用になれない場合がございます。 • タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります。	

ご請求先			ご担当者名	様
ご住所	〒			
TEL	— —		FAX	— —

ご納品先(上記ご住所以外に納品ご希望時)	
ご住所	〒 TEL. — —

※ 当日発送受付時間：月～金曜日9:00～15:30(定休日：土曜・日曜・祝日)
※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ZVJD0002 2026/07

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890
FAX.0120-118-084



How to order

ご注文について

ご注文のご案内

本カタログに掲載の製品をご注文の際には、包装単位、価格および製品番号をご確認の上、必ず製品番号でご注文いただきますようお願い申し上げます。

お願い

- 製品番号以外でのご注文は賜りかねます。予めご了承ください。
- ◎マークは、受注発注となる製品です。納品には3週間程度かかります。
- 欠品などのため、製品によりご注文後2週間程度かかる場合がございます。
- 表示の価格は、全て税抜き価格です。

ご注文先

ご注文は電話・FAXにて承ります。
FAXでのご注文は「FAX注文書」へご記入の上、ご注文ください。

ジンヴィ・ジャパン
カスタマーサービス

◎注文専用フリーダイヤル

TEL. ☎ 0120-418-890 (月～金曜日/9:00～17:30)

イイハ オハヨー

FAX. ☎ 0120-118-084 (24時間)

製品発送のご案内

- 当日発送受付時間：月～金曜日/9:00～15:30(定休日：土曜・日曜・祝日)。
- 当日発送受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります。
- 一部の製品につきましては、返品および交換はできません。
- ご購入金額が一定額に満たない場合は、送料を別途ご請求させていただきます。

掲載の製品について

- 製品は改良のため、外観やパッケージ、仕様、販売価格など、予告なく変更することがございます。
- 掲載製品は、製造元による製造終了、弊社の輸入終了など、予告なく販売を終了することがございます。

医療機器製造販売業許可番号：13B1X00079

●製造販売元・販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

©2026 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0013 2026/07

Unless otherwise indicated, as referenced herein, all trademarks and intellectual property rights are the property of ZimVie Inc. and its affiliates; and all products are manufactured by one or more of the dental subsidiaries of ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) and distributed by ZimVie US Corp LLC and its authorized marketing partners. For additional product information, please refer to the individual product labeling or instructions for use. Product clearance and availability may be limited to certain countries/regions. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. Distribution to any other recipient is prohibited. This material may not be copied or reprinted without the express written consent of ZimVie and is not for distribution in France.