

製品カタログ

TSX™

インプラントシステム



2026年7月改訂

 **ZimVie**






目次

インプラント	4
TSX インプラント	4
ヒーリングカラー	5
ヒーリングカラーの選択ガイドライン	5
Encode® エマージェンシヒーリングアバットメント	5
ヒーリングカラー	5
補綴コンポーネント	6
インプレッショントランスファー	6
プロビジョナルレストレーション	7
CAD/CAM レストレーション	8
セメントリテインレストレーション	10
鋳造用 ゴールドアバットメント	13
スクリューリテインレストレーション	14
オーバーデンチャーレストレーション	16
サージカルキット & インストルメント	20
インストルメント&キットの概要	20
TSX / TSV サージカルキット G	22
Dríva™ ゴールドドリル	25
ボーンプロファイラー	27
ドリルストップキット	29
ガイドットサージェリーインストルメント	30
サージカル・ドリル	31
バイオマテリアル	32

※記載金額はすべて円（税別）です。

インプラント

TSX インプラント

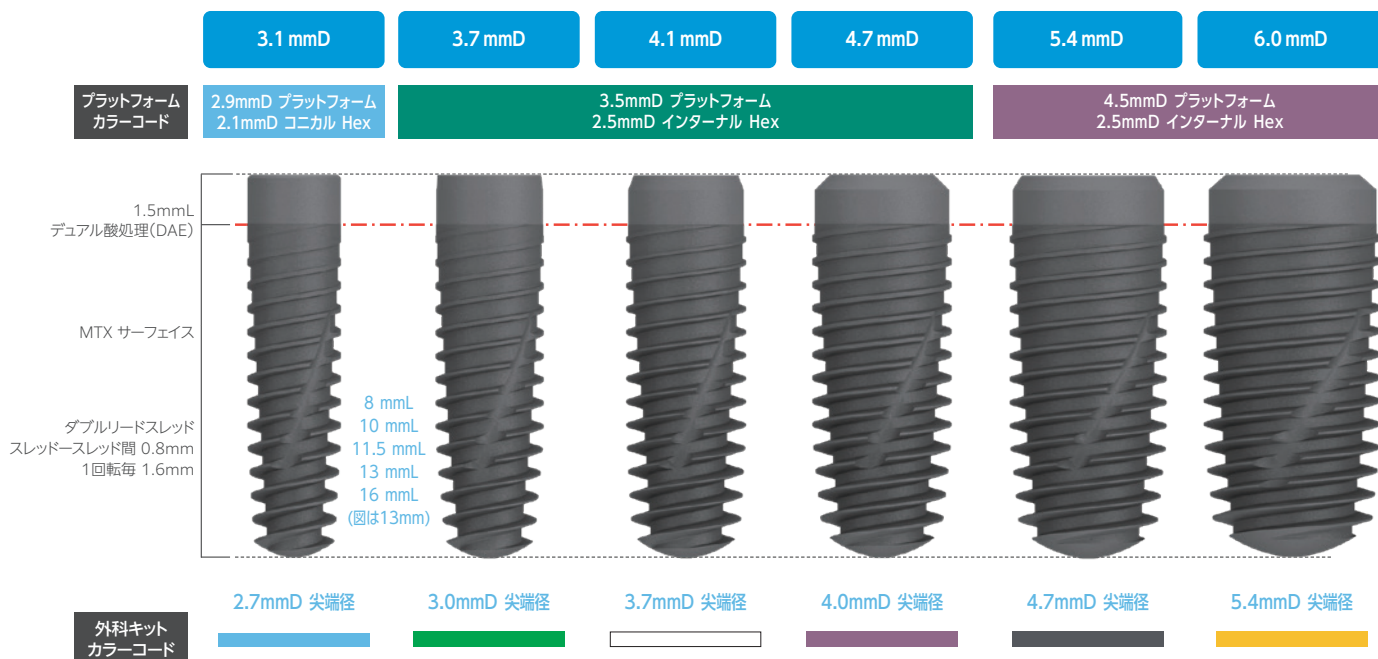

TSX インプラント

• グレード5 チタン合金

カバースクリュー、アライメントピン付属。アライメントピンを使用する事でインプラントを複数本埋入する際に平行性を確認いただけます。

インプラント 直径	プラットフォーム	インターナルHex コネクション	インプラント長さ				
			8 mmL	10 mmL	11.5 mmL	13 mmL	16 mmL
3.1 mmD	● NP(2.9 mmD)	2.1 mmD	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16
3.7 mmD	● 3.5 mmD	2.5 mmD	TSX37B8	TSX37B10	TSX37B11	TSX37B13	TSX37B16
4.1 mmD	● 3.5 mmD	2.5 mmD	TSX41B8	TSX41B10	TSX41B11	TSX41B13	TSX41B16
4.7 mmD*	● 3.5 mmD	2.5 mmD	TSX47B8	TSX47B10	TSX47B11	TSX47B13	TSX47B16
5.4 mmD	● 4.5 mmD	2.5 mmD	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11	TSX54B13	TSX54B16
6.0 mmD*	● 4.5 mmD	2.5 mmD	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11	TSX6B13	TSX6B16

*注: TSXインプラント 4.7mmDは緑色のカラーコードの3.5mmDプラットフォームになり、TSXインプラント 6.0mmDは紫色のカラーコードの4.5mmDプラットフォームになります(TSVインプラントとは異なります)。

サージカルカバースクリュー

インプラントに同梱しています。

インプラントプラットフォーム	製品番号
● NP(2.9 mmD)	CCSNP
● 3.5 mmD	TSC
● 4.5 mmD	TSCW

ヒーリングカラー

ヒーリングカラー選択のガイドライン

ヒーリングカラーの選択方法:

- インプラントのプラットフォームサイズを確認する。
- エマージェンスプロファイル(フレア)を選択する。
使用する予定のアバットメントのエマージェンスプロファイルに応じたサイズを選択します。
- カフの高さを選択する。ヒーリングカラーの上部が軟組織より約1mm露出する高さを選択します。


HC3/TEEHA3 = 3.5 mmDプラットフォームのヒーリングカラー

HC4/TEEHA4 = 4.5 mmDプラットフォームのヒーリングカラー

例:

TEEHA333 = 3.5 mmDプラットフォーム、3.8 mmDエマージェンスプロファイル(フレア)、3.0 mmカフの高さのヒーリングアバットメントになります。
(中央の数字がプロファイルのサイズを示し、右端の数字がカフの高さを示します。)

HC343 = 3.5 mmDプラットフォーム、4.5 mmDエマージェンスプロファイル(フレア)、3.0 mmカフの高さのヒーリングカラーになります。
(中央の数字がプロファイルのサイズを示し、右端の数字がカフの高さを示します。)

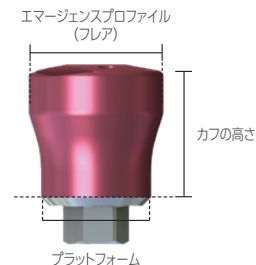

Encode エマージェンス ヒーリングアバットメント

Encode ヒーリングアバットメントは、ヒーリングカラー／インプレッションコーピング／スキャンボディの機能が備わった3-in-1のアバットメントです。アバットメントとスクリューの2ピースタイプとなります。



プラットフォーム	エマージェンス プロファイル	カフの高さ		
		3.0 mm	5.0 mm	7.0 mm
● NP(2.9 mmD)	3.7mmD	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
● NP(2.9 mmD)	4.5mmD	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347
● 3.5 mmD	3.8 mmD	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
● 3.5 mmD	5.0 mmD	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
● 3.5 mmD	6.5 mmD	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
● 4.5 mmD	4.5 mmD	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
● 4.5 mmD	5.5 mmD	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
● 4.5 mmD	6.5 mmD	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
● 4.5 mmD	7.5 mmD	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477

ヒーリングカラー

プラットフォームカラーコード対応品

		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP (2.9 mmD)	3.7 mmD	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
	4.5 mmD	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

プラットフォーム	フレア	カフ		
		3mm	5mm	7mm
● 3.5mmD	3.5mmD (ノンフレア)	HC333	HC335	—
	4.5mmD	HC343	HC345	HC347
	5.5mmD	HC353	HC355	—
● 4.5mmD	4.5mmD (ノンフレア)	HC443	HC445	—
	5.5mmD	HC453	HC455	HC457
	6.5mmD	HC463	HC465	—

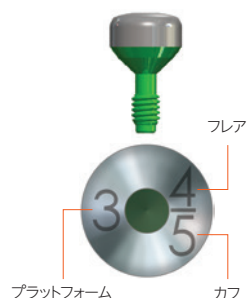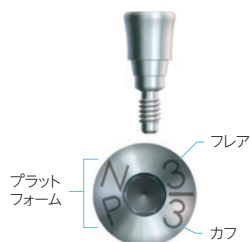


補綴コンポーネント

インダイレクトトランスファー(クローズドトレイ用)



リテーニングスクリュー
[CASLT] 1本付属

		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP(2.9 mmD)	3.7 mmD	CITNP31	CITNP33	CITNP34
	4.5 mmD	CITNP41	CITNP43	CITNP44
リテーニングスクリュー[CASLT]		CASLT		

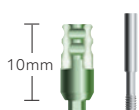

リテーニングスクリュー
[HLTS2] 1本付属

		製品番号			
プラットフォーム	フレア	フレア			
		3.5mmD	4.5mmD	5.5mmD	6.5mmD
● 3.5mmD		HLT3/3	HLT3/4	HLT3/5	—
● 4.5mmD		—	HLT4/4	HLT4/5	HLT4/6
リテーニングスクリュー[HLTS2]		HLTS2			
エクステンションスクリュー[HLTE] 3mm延長		HLTE			




ダイレクトトランスファー(オープントレイ用)




リテーニングスクリュー
[CASLC] 1本付属

		製品番号		
プラットフォーム	フレア	カフ		
		1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP(2.9 mmD)	3.7 mmD	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
	4.5 mmD	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
リテーニングスクリュー[CASLC]		CASLC		

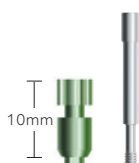

リテーニングスクリュー
[DHTS] 1本付属

		製品番号			
プラットフォーム	フレア	フレア			
		3.5mmD	4.5mmD	5.5mmD	6.5mmD
● 3.5mmD		DHT3/3	DHT3/4	DHT3/5	—
● 4.5mmD		—	DHT4/4	DHT4/5	DHT4/6
リテーニングスクリュー[DHTS]		DHTS			

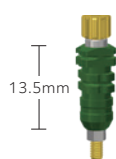


本体、スリーブ、
専用スクリューの
セット

TSV/SVダイレクトトランスファーH(オープントレイ用)

		製品番号
プラットフォーム	フレア	
● 3.5mmD	3.8mmD	PR0090
	4.5mmD	PR0046
● 4.5mmD	4.5mmD	PR0047

※専用スクリューの単品販売はしていません。

インプラントアナログ

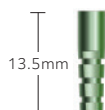

	製品番号
プラットフォーム	
● NP(2.9 mmD)	CIANP
● 3.5mmD	IA3
● 4.5mmD	IA4

デジタルラボアナログ



	製品番号
プラットフォーム	
● NP(2.9mmD)	NPILA-29
● 3.5mmD	ARZTSV-DA35
● 4.5mmD	ARZTSV-DA45

フィクスチャーマウント/トランスファー

インプラントプラットフォームカラーコード対応品



リテーニングスクリュー
[URS2] 1本付属

	製品番号
プラットフォーム フレア	
● 3.5mmD 4.5mmD	FMT3
● 4.5mmD 5.5mmD	FMT4
リテーニングスクリュー[URS2]	URS2

※ フィクスチャーマウント/トランスファーは、印象採得やプロビジョナルの支台としての使用可能です。


チタン テンポラリー アバットメント



リテーニングスクリュー
[CUAS, CASLC]
2本付属

	製品番号
プラットフォーム フレア	
● NP(2.9mmD) 3.5 mmD	CTANP31
リテーニングスクリュー[CUAS]	CUAS
リテーニングスクリュー[CASLC]	CASLC

プラスチック テンポラリー アバットメント

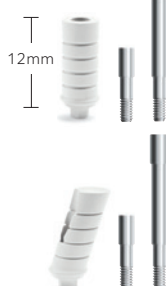

リテーニングスクリュー
[PTSC, DHTS2]
2本付属

		製品番号	
	プラットフォーム	カフ	
		1mm	4mm
ストレート	● 3.5mmD	PT341S	PT344S
	● 4.5mmD	PT451S	PT454S
17°アングル	● 3.5mmD	PT341A	PT344A
	● 4.5mmD	PT451A	PT454A
リテーニングスクリュー [DHTS2]		DHTS2	

※リテーニングスクリュー[PTSC]の単品販売はしておりません。

CAD/CAM レストレーション

CAD/CAM システムを駆使した歯科技工物加工を専門とする
"Digital Laboratory"



STAR GATE

ジンヴィ・ジャパン DTI が製作する CAD/CAM システムです。STAR GATE を採用することで応用範囲の広い、審美性にすぐれた上部構造の製作が可能となります。新しい CAD/CAM 技術と加工設備で、高品質なデジタル歯科技工サービスをご提供します。患者さまの満足に応える「高精度・高品質」、「短納期」を実現し、多様化するインプラントシステムやニーズに柔軟な対応が可能な CAD/CAM 技工物を製作いたします。



チタンカスタムベース、ユニバーサルインプラントブリッジ
についてのお問合せ・ご依頼は

Dental Technology Institute (DTIとちぎ)

〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻113-6
☎ 0120-418-325 FAX.0120-418-321
e-mail: sgco@dti-stargate.co.jp
HP: dti-cadcam.com




チタンベース付ジルコニアについての
お問合せ・ご依頼は

Dental Technology Institute (DTI東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
TEL.03-5610-3680 FAX.03-5610-3681
e-mail: info@dti-cadcam.com
HP: dti-cadcam.com

チタンカスタムベース / ジルコニアベース用 技工パーツ

ワックスアップ、およびレジンアップ用です。下記技工用パーツは、ジンヴィ・ジャパンにご注文ください。

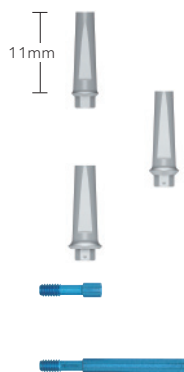

	製品番号
カラーコード	
● SGスリーブ TSV 3.5mmD(チタン用)	SU0019
● SGスリーブ TSV 3.5mmD(ジルコニア用)	SU0022
● SGスリーブ TSV 4.5mmD(チタン・ジルコニア共用)	SU0020
SGスクリーショート(8.2mmL) SGスリーブの固定に使用	PR0011
SGスクリーロング(19.5mmL) レジンアップ時にSGスリーブのアクセスホールを確保するために使用します。	PR0012

※SGスリーブおよびSGスクリーは技工用パーツのため口腔内では使用できません。
※SGスクリーは別売りとなります。

ユニバーサルインプラントブリッジ 技工用パーツ

STARGATEシステムは、DTIが製作するCAD/CAMシステムです。下記技工用パーツは、ジンヴィ・ジャパンにご注文ください。

		製品番号
	ユニバーサル アナログ レギュラー	SU1001
	ユニバーサル インプレッションポスト レギュラー S	SU1002
	ユニバーサル インプレッションポスト レギュラー L	SU1004
	ユニバーサル インプレッションポストスクリュー S	SU1003
	ユニバーサル インプレッションポストスクリュー L	SU1005
	ユニバーサル ワキシングスリーブ レギュラー S	SU1006
	ユニバーサル ワキシングスリーブ レギュラー L	SU1007
	ユニバーサル ワキシングスクリュー 2mmL	SU1008
	ユニバーサル ワキシングスクリュー 9mmL	SU1009
	ユニバーサル ワキシングスクリュー 15mmL	SU1010
	ユニバーサル ハンドル 17°角度付用	SU1011
	ユニバーサル ドライバー ヘルムートトルクラチェット[Z00007]に装着し使用します。	SU1012
	ユニバーサル ドライバー 4mmスクエア TWRトルクラチェット[TWR](P25掲載)に装着し使用します。	SU1013
	ユニバーサル ドライバー ハンドピースタイプ コントラングルタイプのハンドピースに装着し使用します。	PR0040
	Oリング ユニバーサル ドライバー 4mmスクエア用 5個	SU1014

※ ユニバーサルベースなどの技工製品(口腔内に装着する技工製品)は、DTI専用の技工指示書にてご発注ください。

セメントリテインレストレーション

Hex-Lock アバットメントの選択方法と形成のガイドライン

Hex-Lock アバットメントの選択方法

フィクスチャーのプラットフォーム、使用したヒーリングカラー、トランスファーのフレアを確認しそれぞれの寸法に適合したアバットメントを選択する。

HLA3 = 3.5mmD プラットフォーム

HLA4 = 4.5mmD プラットフォーム

／3 = 3.5mmD フレア

／4 = 4.5mmD フレア


／5 = 5.5mmD フレア

／6 = 6.5mmD フレア

Hex-Lock アバットメントの削合限界位置

アバットメント付属のリテーニングスクリュー[MHLAS]を使用した場合は、アバットメントのスコアライン(インプラントとの嵌合部から4.7mmの位置)から1mm下(インプラントとの嵌合面から3.7mmの位置)が削合限界位置です。

オプションのロングタイプ[HLTS2]を使用した場合はスクリュー内部のHex部を最低1mm確保する必要があるため4.7mmの位置が削合限界位置となります。

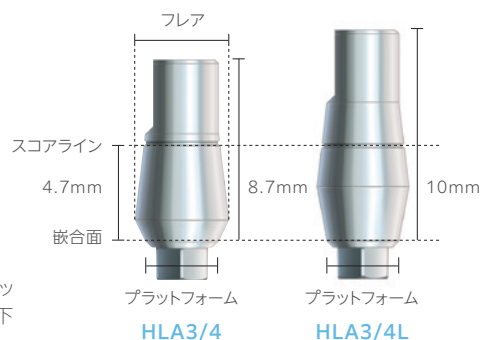

Hex-Lock アバットメント



リテーニングスクリュー
[MHLAS] 1本付属

	製品番号			
	フレア			
プラットフォーム	3.5mmD	4.5mmD	5.5mmD	6.5mmD
● 3.5mmD	HLA3/3	HLA3/4 HLA3/4L	HLA3/5	—
● 4.5mmD	—	HLA4/4	HLA4/5	HLA4/6
リテーニングスクリュー [MHLAS]	MHLAS			
リテーニングスクリュー [HLTS2] ロングタイプ	HLTS2			

※HLA3/4は嵌合面から上端までの長さが8.7mmでHLA3/4Lは10mmです。

アングルドアバットメント 20°



リテーニングスクリュー
[CUAS] 1本付属

		製品番号
プラットフォーム	フレア	
● NP(2.9mmD)	3.5 mmD	C20A3
リテーニングスクリュー [CUAS]		CUAS





リテーニングスクリュー
[AH20S] 1本付属

		製品番号
プラットフォーム	フレア	
● 3.5mmD	4.5mmD	AH20/4
● 4.5mmD	5.5mmD	AH20W/5
リテーニングスクリュー [AH20S]		AH20S

アバットメント フレア カラーコード

Hex-Lock カントゥアー アバットメント、Hex-Lock ショートアバットメントおよび補綴コンポーネントには、それぞれのフレアに対応したカラーコードが適用されます。

フレア	カラーコード
4.5mmD	● Tan
5.5mmD	● Rose

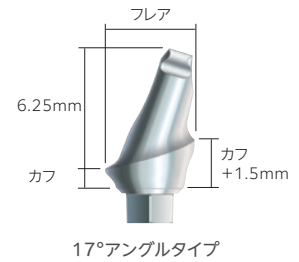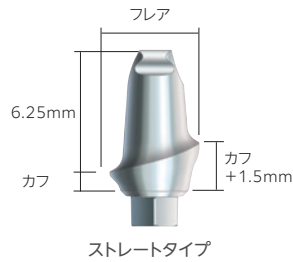

Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート



		製品番号		
プラットフォーム	フレア	1.5 mm	3.0 mm	4.5 mm
● NP(2.9mmD)	3.7mmD	CANP31S	CANP33S	CANP34S
	4.5mmD	CANP41S	CANP43S	CANP44S
リテーニングスクリュー [CUAS]		CUAS		



		製品番号		
プラットフォーム	フレア	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
● 3.5mmD	● 4.5mmD	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S
● 4.5mmD	● 4.5mmD	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S
● 4.5mmD	● 5.5mmD	ZOA451S	ZOA452S	ZOA453S
リテーニングスクリュー [MHLAS]		MHLAS		

Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17°



		製品番号	
プラットフォーム	フレア	1.5mm	3.0mm
● NP(2.9mmD)	3.7mmD	CANP31A	-
	4.5mmD	CANP41A	CANP43A
リテーニングスクリュー [CUASA]		CUASA	CUAS



		製品番号	
プラットフォーム	フレア	1.0 mm	2.0 mm
● 3.5mmD	● 4.5mmD	ZOA341A	ZOA342A
● 4.5mmD	● 4.5mmD	ZOA441A	ZOA442A
● 4.5mmD	● 5.5mmD	ZOA451A	ZOA452A
リテーニングスクリュー [AH20S]		AH20S	

カントゥアー アバットメントアナログ・チタン



		製品番号	
フレア		ストレート	17°
● 4.5mmD		TCANA4S	TCANA4A
● 5.5mmD		TCANA5S	TCANA5A

※すべて受注発注となります。

Hex-Lock ショートアバットメント



リテーニングスクリュー
[MHLAS] 1本付属

		製品番号	
プラットフォーム フレア		カフ	
		1mm	2mm
● 3.5mmD	● 4.5mmD	SA341	SA342
● 4.5mmD	● 5.5mmD	SA451	SA452
リテーニングスクリュー[MHLAS]		MHLAS	

ショートアバットメントアナログ



		製品番号
フレア		
● 4.5mmD		SAANA4
● 5.5mmD		SAANA5

※すべて受注発注となります。


ショートワキシングコーピング



		製品番号
フレア		
● 4.5mmD		SAWAX4
● 5.5mmD		SAWAX5

※すべて受注発注となります。

鑄造用ゴールドアバットメント

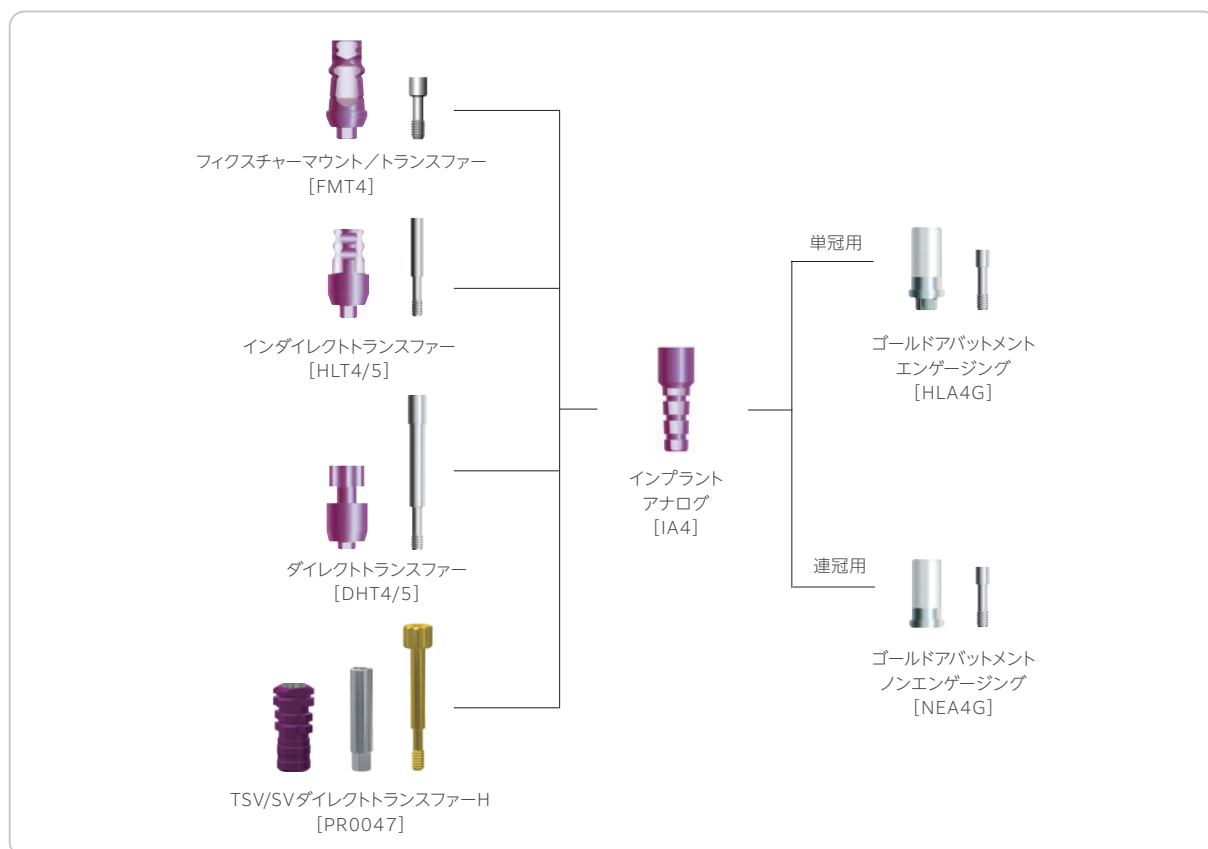

※製品イメージおよび製品番号は4.5mmDプラットフォーム、5.5mmDフレアの場合の例です。

ゴールドアバットメント エンゲージング(単冠用)



	製品番号
プラットフォーム	
● 3.5mmD	HLA3G
● 4.5mmD	HLA4G
リテーニングスクリュー [MHLAS]	MHLAS
ワキシングスクリュー [MTWSD]	MTWSD


ゴールドアバットメント ノンエンゲージング(連冠用)



	製品番号
プラットフォーム	
● 3.5mmD	NEA3G
● 4.5mmD	NEA4G
リテーニングスクリュー [MHLAS]	MHLAS

スクリーリテインレストレーション

スクリーリテインレストレーションフローチャート

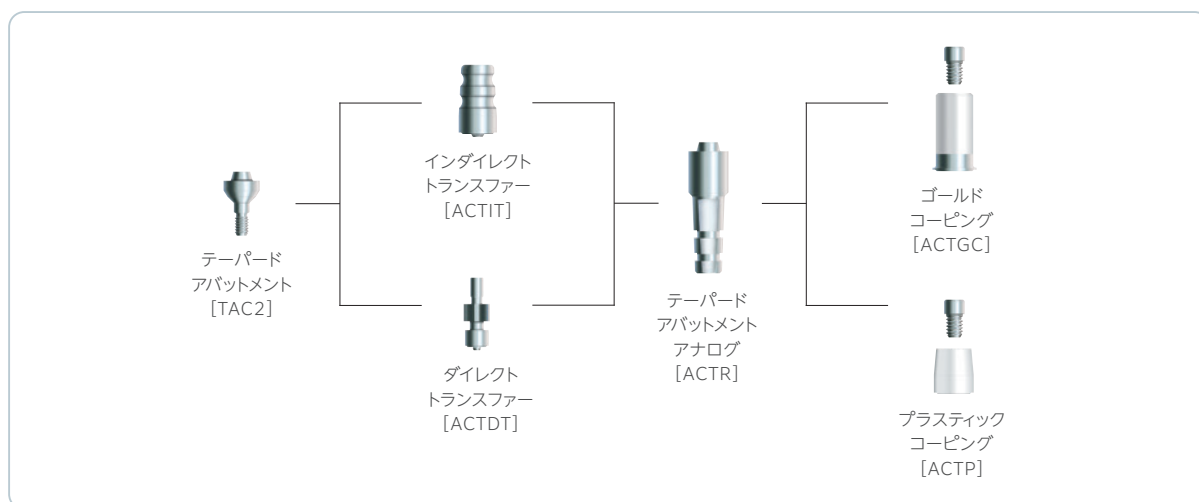

テーパード アバットメント(ノンエンゲージング)



		製品番号			
プラットフォーム		カフ			
		2mm	3mm	4mm	5mm
● 3.5mmD	ヒーリングキャップ [TATHC]1本付属	TAC2	TAC3	TAC4	TAC5
● 4.5mmD		TACW2	TACW3	⊗ TACW4	⊗ TACW5
ヒーリングキャップ		TATHC			

アングルド テーパード アバットメント 15°



		製品番号		
プラットフォーム		カフ(a/b)		
		1mm/2mm	2mm/3mm	3mm/4mm
● 3.5mmD		15AT312	15AT323	15AT334
● 4.5mmD		15AT412	15AT423	15AT434

アングルド テーパード アバットメント 30°




		製品番号		
プラットフォーム		カフ(a/b)		
		2mm/4mm	3mm/5mm	4mm/6mm
● 3.5mmD		30AT324	30AT335	30AT346
● 4.5mmD		30AT424	30AT435	30AT446

トランスファー & アナログ



	製品番号
ダイレクトトランスファー(オープントレイ用) ※リテイニングスクリュー[SCTS]単品での販売はしていません。	ACTDT
テーパーダアバットメント インダイレクトトランスファー(クローズドトレイ用)	ACTIT
テーパーダアバットメント アナログ	ACTR

テーパーダアバットメント コーピング & バーシステム

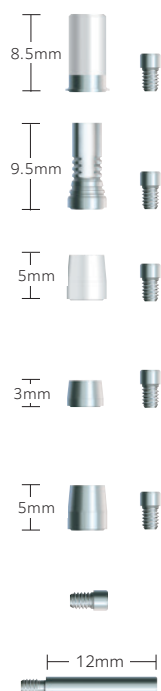

	製品番号
テーパーダアバットメント ゴールドコーピング	ACTGC
テーパーダアバットメント テンポラリーチタニウムコーピング	ACTT
テーパーダアバットメント プラスティックコーピング	ACTP
バー ゴールドコーピング	TGC3
バー ゴールドコーピング・ロング	TGC5
リテイニングスクリュー[SCTS]	SCTS
ワキシングスクリュー[SCWS]	SCWS

オーバードンチャーレストレーション

ボールアバットメントの選択方法

- ① インプラントのプラットフォームを確認します。
- ② インプラントとの嵌合面から歯肉縁上までの厚みを測定します。
- ③ インプラントのプラットフォームに適合し、カフ部の上面が歯肉縁上に約1mm出るように2mm、4mm、6mmの中からアバットメントを選択します。


BAC = 3.5mmDプラットフォーム

BACW = 4.5mmDプラットフォーム


2=2mm(カフ部高さ)

4=4mm(カフ部高さ)

6=6mm(カフ部高さ)

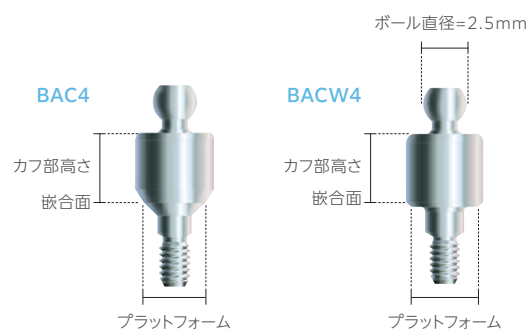

ボールアバットメントフローチャート

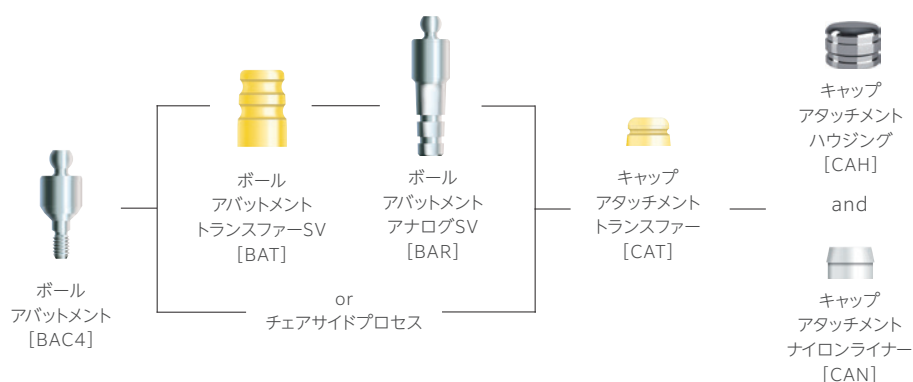

ボールアバットメント



		製品番号		
プラットフォーム		2mm	カフ 4mm	6mm
	● 3.5mmD	BAC2	BAC4	BAC6
	● 4.5mmD	BACW2	BACW4	BACW6

ボールアバットメントトランスファーコンポーネント



		製品番号
ボールアバットメントトランスファー SV(クローズドトレイ用)	2個	BAT
ボールアバットメントアナログ SV		BAR

ボールアバットメント補綴コンポーネント & ツール



		製品番号
キャップアタッチメント セット セット内容: キャップアタッチメントナイロンライナー[CAN] 4個、キャップアタッチメントハウジング[CAH] 4個 キャストابلボールパターン[CAB] 4個、ポジショニングリング2個		CAS
キャップアタッチメント ハウジング		CAH
キャップアタッチメント ナイロンライナー		CAN
キャップアタッチメント ナイロンライナーリジッド キャップアタッチメント ナイロンライナー[CAN]に対して維持力を強くしたもの		CAN-G
キャップアタッチメント トランスファー		CAT
キャストابلボールパターン		 CAB

OverdenSURE®


アタッチメントシステム

OverdenSURE アバットメント TSX用 チタン合金、窒化ジルコニウムコーティング



カラー高さ	プラットフォーム		
	NP(2.9 mm)	3.5 mm	4.5 mm
1.0 mm	ODSA-NP201	ODSA-TSV301	ODSA-TSV401
2.0 mm	ODSA-NP202	ODSA-TSV302	ODSA-TSV402
3.0 mm	ODSA-NP203	ODSA-TSV303	ODSA-TSV403
4.0 mm	ODSA-NP204	ODSA-TSV304	ODSA-TSV404
5.0 mm	ODSA-NP205	ODSA-TSV305	ODSA-TSV405
6.0 mm	ODSA-NP206	ODSA-TSV306	ODSA-TSV406


※ 各アバットメントにはリテンションキットは含まれていません。別途 ODS リテンションキットをお買い求めください。

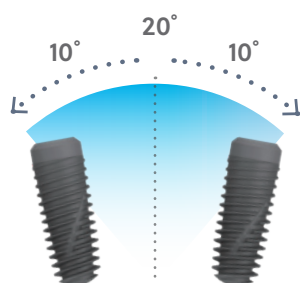

-  エクストラライト ブルー
-  ライト ピンク
-  ミディアム クリア

OverdenSURE スタンダード リテンションインサート

軸から最大 10° のインプラントの開き角に対する角度補正ができ、2 つのインプラント間で合計 20° の開き角に対応します。

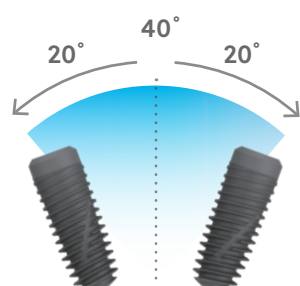

-  エクストラライト レッド
-  ライト イエロー
-  ミディアム グリーン

OverdenSURE エクステンド リテンションインサート

軸から最大 20° のインプラントの開き角に対する角度補正ができ、2 つのインプラント間で合計 40° の開き角に対応します。

OverdenSURE アタッチメント



製品番号	製品名
ODS-RIKIT2001	ODS リテンションキット20° 1セット
ODS-RIKIT2002	ODS リテンションキット20° 2セット

セット内容:リテンションインサート(レッド・ブルー・ピンク・クリア)、ハウジングキャップ(ブラックインサート付)、ブロックアウトスパーサー各1個 ※レッドは最大20°(合計40°)対応



ODS-RIKIT4001	ODS リテンションキット40° 1セット
ODS-RIKIT4002	ODS リテンションキット40° 2セット

セット内容:リテンションインサート(レッド・イエロー・グリーン)、ハウジングキャップ(ブラックインサート付)、ブロックアウトスパーサー各1個



ODS-RIB2004	ODS リテンションインサート20° エクストラライト ブルー
ODS-RIP2004	ODS リテンションインサート20° ライト ピンク
ODS-RIC2004	ODS リテンションインサート20° ミディアム クリア
ODS-RIR4004	ODS リテンションインサート40° エクストラライト レッド
ODS-RIY4004	ODS リテンションインサート40° ライト イエロー
ODS-RIG4004	ODS リテンションインサート40° ミディアム グリーン

OverdenSURE ツール、アクセサリ





製品番号	製品名
ODS-RH01	ODS リテンションハウジングキャップ ブラックインサート付 1個
ODS-RH010	ODS リテンションハウジングキャップ ブラックインサート付 10個
ODS-BS020	ODS ブロックアウト スパーサー 20個
ODS-DRVR	ODS アバットメント ドライバー
TWR	TWR トルクラチェット(10-35Ncm)
ODS-IRTOOL	ODS リムーバル・インサーション ツール
ODS-IC01	ODS インプレッションコーピング 1個
ODS-IC010	ODS インプレッションコーピング 10個
ODS-AA01	ODS アナログ 1個
ODS-AA010	ODS アナログ 10個

サージカルキット & インstrument


TSX/TSVサージカルキットG(TSVKITG)

TSX/TSVサージカルキットG(TSVKITG)は、外部注水用のDriva™ ゴールドドリルが入ったキットです。

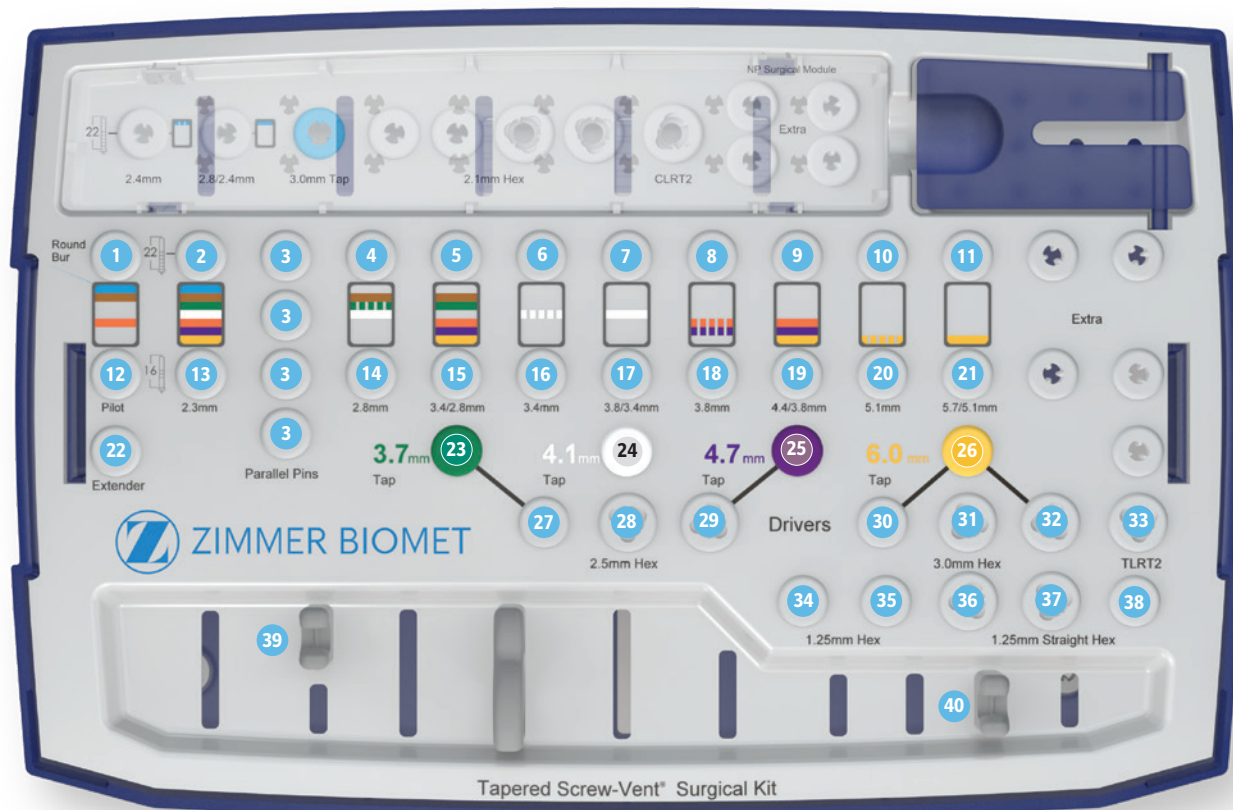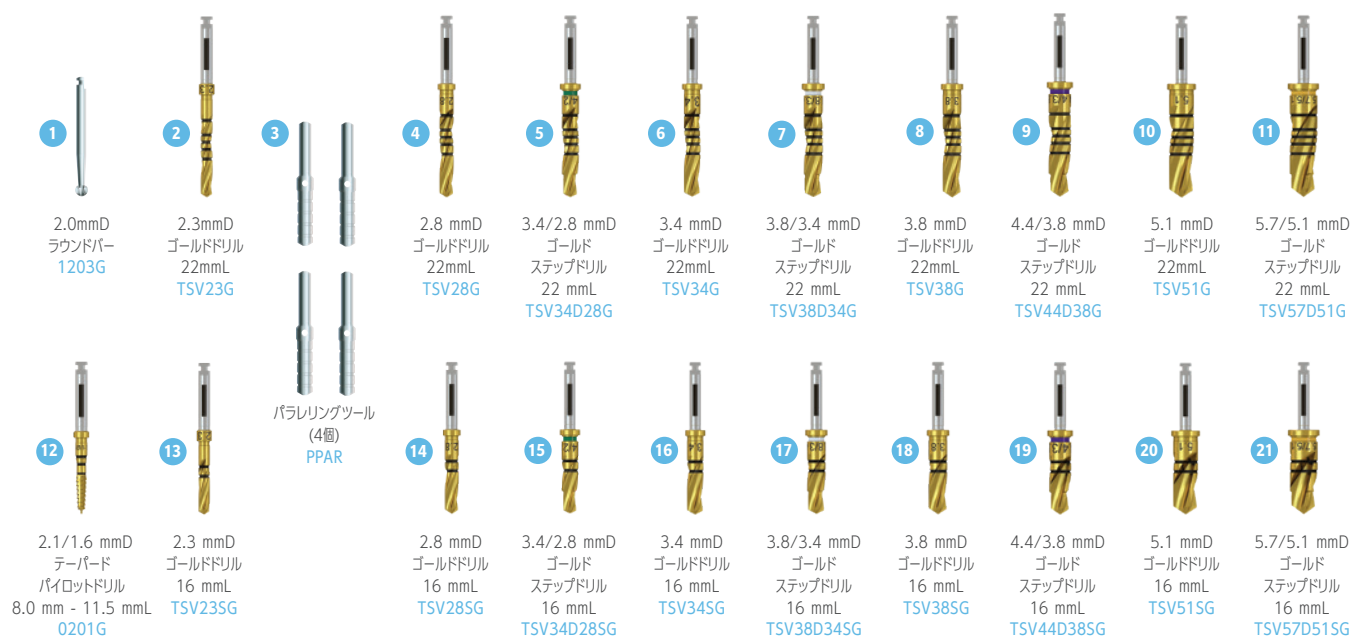


注: TSXインプラント 5.4 mmDインプラントのデンスボーンプロトコルの最終ドリル(TSV51D44SG / TSV51D44G)およびソフトボーンプロトコルの最終ドリル(TSV44SG / TSV44G)は、別売りになりサージカルキット(TSVKITG / TSVKIT)には含まれていません。

※注意：コルチカルボーンタップ TSV は TSX インプラントには使用できません。

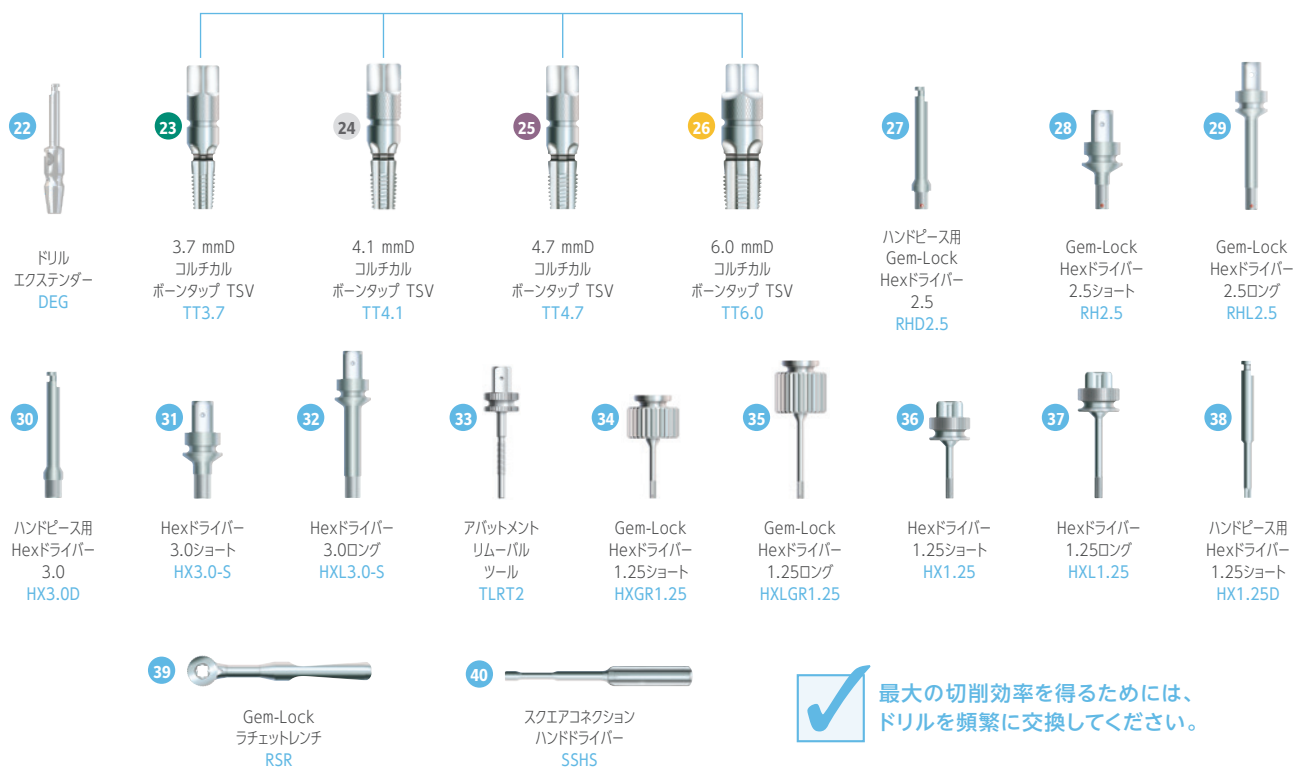

NPサージカルモジュールG[TSX3.1mmD インプラント用](NPMODG)

※ NPサージカルモジュールG (NPMODG) は、別売りになり TSVKITG には含まれません。

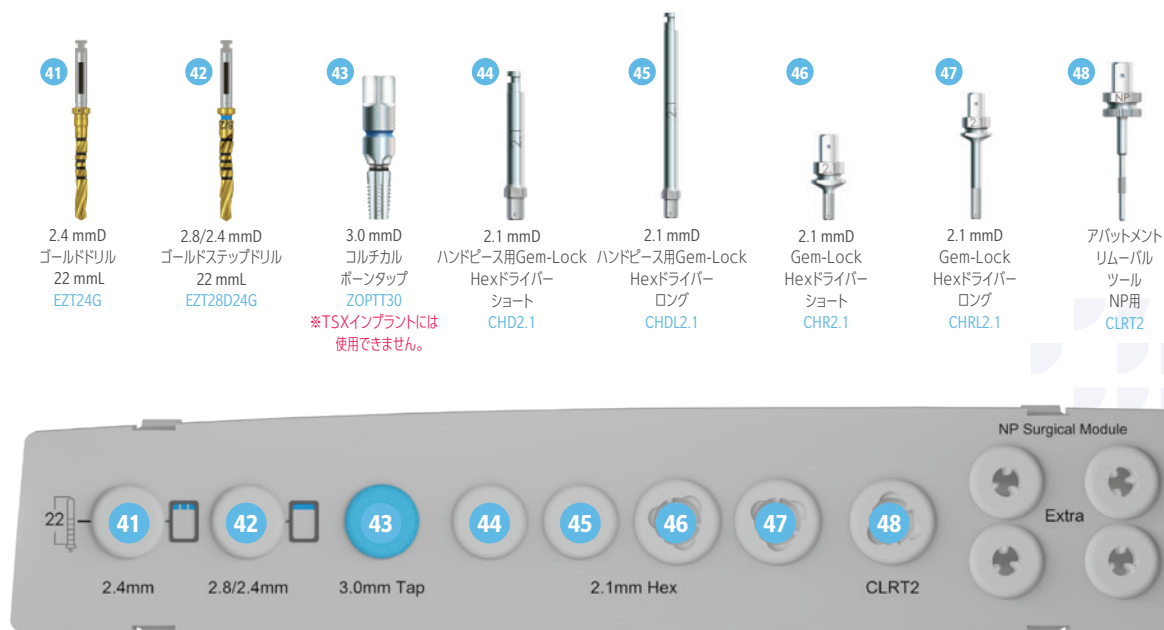

NPサージカルモジュールキットG

TSX/TSVサージカルキット

フルキット



製品名	製品番号
TSX/TSV サージカルキットG 3.7 mmD、4.1 mmD、4.7 mmD、6.0 mmDのTSXおよびTSVインプラント対応。 下記のドリルとインストルメントが含まれます。	TSVKITG
テーパードパイロットドリル 2.1/1.6 mmD 8 mmL - 11.5 mmL	0201G
ラウンドバー 2.0 mmD	1203G
Dríva™ ゴールドドリル 2.3 mmD 16 mmL	TSV23SG
Dríva™ ゴールドドリル 2.3 mmD 22 mmL	TSV23G
Dríva™ ゴールドドリル 2.8 mmD 16 mmL	TSV28SG
Dríva™ ゴールドドリル 2.8 mmD 22 mmL	TSV28G
Dríva™ ゴールドステップドリル 3.4/2.8 mmD 16 mmL	TSV34D28SG
Dríva™ ゴールドステップドリル 3.4/2.8 mmD 22 mmL	TSV34D28G
Dríva™ ゴールドドリル 3.4 mmD 16 mmL	TSV34SG
Dríva™ ゴールドドリル 3.4 mmD 22 mmL	TSV34G
Dríva™ ゴールドステップドリル 3.8/3.4 mmD 16 mmL	TSV38D34SG
Dríva™ ゴールドステップドリル 3.8/3.4 mmD 22 mmL	TSV38D34G
Dríva™ ゴールドドリル 3.8 mmD 16 mmL	TSV38SG
Dríva™ ゴールドドリル 3.8 mmD 22 mmL	TSV38G
Dríva™ ゴールドステップドリル 4.4/3.8 mmD 16 mmL	TSV44D38SG
Dríva™ ゴールドステップドリル 4.4/3.8 mmD 22 mmL	TSV44D38G
Dríva™ ゴールドドリル 5.1 mmD 16 mmL	TSV51SG
Dríva™ ゴールドドリル 5.1 mmD 22 mmL	TSV51G
Dríva™ ゴールドステップドリル 5.7/5.1 mmD 16 mmL	TSV57D51SG
Dríva™ ゴールドステップドリル 5.7/5.1 mmD 22 mmL	TSV57D51G
3.7 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT3.7
4.1 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT4.1
4.7 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT4.7
6.0 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT6.0
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ショート(22 mmL)	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ロング(30 mmL)	HXLGR1.25
Hexドライバー 1.25 ショート(17 mmL)	HX1.25
Hexドライバー 1.25 ロング(22 mmL)	HXL1.25
ハンドピース用 Hexドライバー 1.25 ショート(23 mmL)	HX1.25D
Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ショート(2.5mmHex/17mmL)	RH2.5
Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ロング(2.5mmHex/28mmL)	RHL2.5
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー 2.5(2.5mmHex/21mmL)	RHD2.5
Hexドライバー 3.0 ショート(3.0mmHex/17mmL)*	HX3.0-S
Hexドライバー 3.0 ロング(3.0mmHex/28mmL)*	HXL3.0-S
ハンドピース用Hexドライバー 3.0(3.0mmHex/25mmL)*	HX3.0D
ドリルエクステンダー	DEG
パラレリングツール(2.3mmD/2.8mmD) 4個	PPAR
Gem-Lock ラチェットレンチ	RSR
スクエアコネクション ハンドドライバー	SSHS
アバットメントリムーバルツール	TLRT2
ステーキングブロックG	TSVBLKG
TSX/TSVサージカルツールトレイG ※ケース・トレイのみ	TSVTRAYG

*Hexドライバー3.0およびコルチカルボーンタップは、TSXインプラントには使用しません。

注：TSXインプラント 5.4 mmDインプラントのデンスボーンプロトコルの最終ドリル(TSV51D44SG/TSV51D44G)およびソフトボーンプロトコルの最終ドリル(TSV44SG/TSV44G)は、別売りになりサージカルキット(TSVKITG)には含まれていません。

注：青で表示されたドリルは、P23に掲載されているTSX/TSVサージカルトレイG&ドリルG(TSVTRAYDG)に含まれています。

スターターキット

製品名	製品番号
TSX/TSV サージカル スターターキットG 3.7 mmD、4.7 mmDのTSXおよびTSVインプラントに対応。 下記のドリルとインストルメントが含まれます。	STRKITG
テーパードパイロットドリル 2.1/1.6 mmD 8 mmL - 11.5 mmL	0201G
Dríva™ ゴールドドリル 2.3 mmD 22 mmL	TSV23G
Dríva™ ゴールドドリル 2.8 mmD 22 mmL	TSV28G
Dríva™ ゴールドステップドリル 3.4/2.8 mmD 22 mmL	TSV34D28G
Dríva™ ゴールドドリル 3.8 mmD Dríva 22 mmL	TSV38G
Dríva™ ゴールドステップドリル 4.4/3.8 mmD 22 mmL	TSV44D38G
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ショート(22 mmL)	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ロング(30 mmL)	HXLGR1.25
Hexドライバー 1.25 ショート(17 mmL)	HX1.25
Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ロング(2.5mmHex/28mmL)	RHL2.5
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー 2.5(2.5mmHex/21mmL)	RHD2.5
ドリルエクステンダー	DEG
パラレリングツール(2.3mmD/2.8mmD) 4個	PPAR
Gem-Lock ラチェットレンチ	RSR
スクエアコネクション ハンドドライバー	SSHS
アパットメントリムーバルツール	TLRT2
3.7 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT3.7
4.7 mmD コルチカルボーンタップ TSV*	TT4.7
ステー징ブロックG	TSVBLKG
TSX/TSVサージカルツールトレイG ※ケース・トレイのみ	TSVTRAYG

*コルチカルボーンタップは、TSXインプラントには使用しません。

Dríva™ ゴールドドリルセット



製品名	製品番号
TSX/TSV サージカルトレイG & ドリルG 3.7 mmD、4.1 mmD、4.7 mmD、6.0 mmDのTSXおよびTSVインプラント対応。 下記の製品が含まれます。	TSVTRAYDG
Dríva™ ゴールドドリル20本 P22の青で掲載されているドリルが含まれます。	
ステー징ブロックG	TSVBLKG
TSX/TSVサージカルツールトレイG ※ケース・トレイのみ	TSVTRAYG

注意: TSXインプラント 5.4 mmDのデンスボーンプロトコルの最終ドリル(TSV51D44SG/TSV51D44G)およびソフトボーンプロトコルの最終ドリル(TSV44SG/TSV44G)は、別売りになりTSX/TSVサージカルトレイG&ドリルG(TSVTRAYDG)には含まれていません。

Dríva™ ゴールドドリル TSXインプラント 5.4mmD用

製品名	製品番号
Dríva™ ゴールドドリル 4.4 mmD 16 mmL	TSV44SG
Dríva™ ゴールドドリル 4.4 mmD 22 mmL	TSV44G
Dríva™ ゴールドステップドリル 5.1/4.4 mmD 16 mmL	TSV51D44SG
Dríva™ ゴールドステップドリル 5.1/4.4 mmD 22 mmL	TSV51D44G



NP サージカル モジュール

製品名	製品番号
NP サージカルモジュールキットG 3.1mmDのTSXインプラント対応。下記のドリルとインストルメントが含まれます。	NPMODG
NP サージカルモジュールインサートG(トレイのみ)	NPTRAYG
Drivaゴールドドリル 2.4mmD 22mmL	EZT24G
Drivaゴールドステップドリル 2.8/2.4mmD 22mmL	EZT28D24G
3.0mmD コルチカルボンタップ ※TSXインプラントには使用できません。	ZOPTT30
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	CHD2.1
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	CHDL2.1
Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	CHR2.1
Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	CHRL2.1
アバットメントリムーバルツール NP2.9mm プラットフォーム用	CLRT2

注1：ラッチロックタイプのドライバーを使用する際には、80Ncm以上のトルクをかけないようにしてください。

Dríva ゴールドドリル

テーパーパイロットドリル



直径	15 mmL*
2.1/1.6 mmD	0201G

Dríva ゴールドドリル



直径	16 mmL*	22 mmL*
2.3 mmD	TSV23SG	TSV23G
2.4 mmD	—	EZT24G
2.8 mmD	TSV28SG	TSV28G
3.4 mmD	TSV34SG	TSV34G
3.8 mmD	TSV38SG	TSV38G
4.4 mmD	TSV44SG**	TSV44G**
5.1 mmD	TSV51SG	TSV51G

Dríva ゴールドステップドリル




直径	16 mmL*	22 mmL*
2.8/2.4 mmD	—	EZT28D24G
● 3.4/2.8 mmD	TSV34D28SG	TSV34D28G
○ 3.8/3.4 mmD	TSV38D34SG	TSV38D34G
● 4.4/3.8 mmD	TSV44D38SG	TSV44D38G
● 5.1/4.4 mmD	TSV51D44SG***	TSV51D44G***
● 5.7/5.1 mmD	TSV57D51SG	TSV57D51G

* ドリルの軸部分に黒いストライプが付いた15 mmL、16 mmL、22 mmLの長さのドリルは、ドリルストップと組み合わせで使用できます。

** TSV44SGおよびTSV44Gは、TSXインプラント5.4mmDのソフトボーンプロトコルの最終ドリルになりますが、別売りになりサージカルキットに含まれていません。

*** TSV51D44SGおよびTSV51D44Gは、TSXインプラント5.4mmDのデンスボーンプロトコルの最終ドリルになり、6.0mmDのドリルステップにおけるオプションドリルとしても使用できます。このドリルは別売りとなり、サージカルキットに含まれていません。

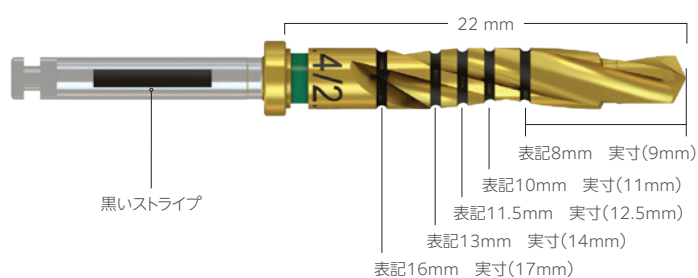


ドリルには深度を示す黒色のレーザーマーキング(幅0.5mm)がされています。ドリル先端からマーキング中央までの実寸は、表記よりも1mm長くなります。(例 先端から8mm表記のライン中央までの実寸は9mmです)。この1mmの追加形成により、インプラントを若干骨線下に埋入できる柔軟性を提供します。
※2.3mmDドリルについては、ドリル先端からマーキング中央までの実寸は表記の通りとなります。2.3mmDドリルを3.7mmD抜歯窩プロトコルの最終ドリルとして使用する際には、この長さを考慮してください。

サージカルインスツルメント




製品名	製品番号
ドリルエクステンダー	DEG
2.0mmD ラウンドバー	1203G

ヘックスドライバー 1.25mm(補綴コンポーネント用)

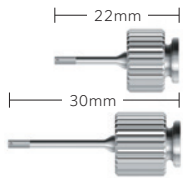


	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ショート (0.050")	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ロング (0.050")	HXLGR1.25

ZimVie社独自のGem-Lockタッチレス・デリバリーシステムを採用したヘックスドライバーです。

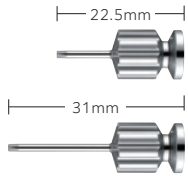


キャリアヘックスドライバー 0.050" セット (ショート/ロング)	PR0026
キャリアヘックスドライバー 0.050" ショート (1.25mm)	PR0027
キャリアヘックスドライバー 0.050" ロング (1.25mm)	PR0028

先端がテーパ状のため、保持力と性能の改善を図っています。

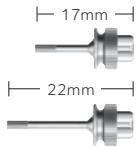


Hexドライバー 1.25 ショート (0.050")	HX1.25
Hexドライバー 1.25 ロング (0.050")	HXL1.25

Gem-Lock ラチェットレンチ[RSR](P28掲載)と組合わせて使用します。

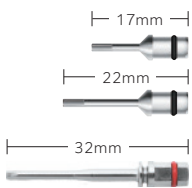

トルクレンチ用 Hexドライバー 1.25 ショート (0.050")	TW1.25
トルクレンチ用 Hexドライバー 1.25 ロング (0.050")	TW1.25L
エクストラロング ドライバー	PR0037

TWR トルクラチェット[TWR](P28掲載)と組合わせて使用します。

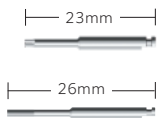

ハンドピース用 Hexドライバー 1.25 ショート (0.050")	HX1.25D
ハンドピース用 Hexドライバー 1.25 ロング (0.050")	HXL1.25D

ハンドピース用のヘックスドライバーです。

ヘックスドライバー 2.1mm

TSX3.1mmDインプラント埋入の際に使用します。




	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	CHR2.1
Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	CHRL2.1
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	CHD2.1
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	CHDL2.1

注1: ラッチロックタイプのドライバーを使用する際には、80Ncm以上のトルクをかけないようにしてください。

ヘックスドライバー 2.5mm 目盛付

インプラント埋入の際に使用します。

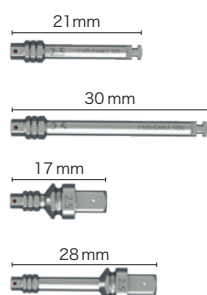

	製品番号
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 21mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	GHX2.5D
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 30mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	GHX2.5DL
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 17mm(L) ラチェットレンチ用	GHX2.5
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 28mm(L) ラチェットレンチ用	GHX2.5L

注1: ラッチロックタイプのドライバーを使用する際には、80Ncm以上のトルクをかけないようにしてください。

ヘックスドライバー 2.5mm

インプラント埋入の際に使用します。



	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー 2.5ショート(2.5mmHex/17mmL)	RH2.5
Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ロング(2.5mmHex/28mmL)	RHL2.5
ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー 2.5(2.5mmHex/21mmL)	RHD2.5

ボーンプロファイラー TSX/TSV用



		製品番号
プラットフォーム	エマージェン スプロファイル (フレア)	
● 2.9mmD	3.7 mmD	BPE2937
	4.5 mmD	BPE2945
● 3.5mmD	3.5 mmD	BPT3535
	4.5 mmD	BPT3545
	5.5 mmD	BPT3555
● 4.5mmD	4.5 mmD	BPT4545
	5.5 mmD	BPT4555
	6.5 mmD	BPT4565

トルクラチェット & トルクレンチ



	製品番号
Z-Highトルク インディケーティング ラチェット レンチ (50-90Ncm)	ZTIRW
Gem-Lock ラチェットレンチ	RSR
スクエアコネクション ハンドドライバー	SSHS
TWR トルクラチェット (10-35Ncm)	TWR

その他ツール



H
2mmピッチ

	製品番号
マニュアルドライバー H TSX / TSV ボーンプロファイラーで使用するマニュアルドライバーです。	PR0035
アバットメントリムーバルツール Gem-Lock ラチェットレンチ [RSR] または TWR トルクラチェット [TWR] に装着し、アバットメントをフィクスチャーから取外す際に使用します。	TLRT2
アバットメントリムーバルツール NP用 Gem-Lock ラチェットレンチ [RSR] または TWR トルクラチェット [TWR] に装着し、アバットメントをフィクスチャーから取外す際に使用します。	CLRT2
インプラントリムーバルツール インプラントを除去する際に使用します。	IRT
アバットメントスクリュー リムーバルツール Hexホールが変形したスクリューの除去に使用します。	SRT
アバットメントホルダー 各種アナログと併用しアバットメントを固定、削合、研磨を行うためのホルダーです。	ABTH
パラレリングツール (2.3mmD / 2.8mmD)	PPAR

サージカルトレイ & ケース



	製品番号
TSX / TSV サージカルトレイ G ※ケース・トレイのみ	TSVTRAYG
NP サージカルモジュールインサート G (トレイのみ)	NPTRAYG
ステー징ブロック G インプラントを3本・ツールを10本セットすることができます。 ※ドリルは別売品のため付属していません。	TSVBLKG
補綴減菌トレイ	2320

ドリルストップキット



	製品番号
ドリルストップコンプリートキット TSX/TSVサージカルキット対応	DSKIT

※詳しい使用方法は、TSX外科マニュアルをご参照ください。



			製品番号
1	8mmインプラント用ストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)16mmLドリル用	5個セット	SS8D16
2	8mmインプラント用ストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)22mmLドリル用	5個セット	SS8D22
3	10mmインプラント用ストップセット (16mmLドリル用)、 16mmインプラント用ストップセット (22mmLドリル用) 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)	5個セット	SS10D16
4	10mmインプラント用ストップセットストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)22mmLドリル用	5個セット	SS10D22
5	11.5mmインプラント用ストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)16mmLドリル用	5個セット	SS11D16
6	11.5mmインプラント用ストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)22mmLドリル用	5個セット	SS11D22
7	13mmインプラント用ストップセット 2.3、2.8、3.4/2.8、3.8、4.4/3.8mmD(各1個)22mmLドリル用	5個セット	SS13D22
8	5.1mmDドリル用ストップキット 8、10、11.5、13、16mmインプラント用(各1個)16 & 22mmLドリル用	7個セット	Ⓐ SS51D
9	5.7/5.1mmDドリル用ストップキット 8、10、11.5、13、16mmインプラント用(各1個)16 & 22mmLドリル用	7個セット	Ⓐ SS57D
10	ドリルストップマルチツール		Ⓐ MTL

ガイドドサージェリー インストルメント



	製品番号
ガイドドサージェリー ドリルモジュールキット • キット内容: 下記ドリル各1個がインサート(GSTRAY)にセットされています。 • サージカルキット(TSVKITGおよびTSVKIT)に設置できます。	GSMOD
Driva EGサージカルドリル 2.3 mmD - 19 mmL	STR23D19
Driva EGサージカルドリル 2.3 mmD - 25 mmL	STR23D25
Driva EGサージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 19 mmL	Ⓢ STP28D19
Driva EGサージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 25 mmL	Ⓢ STP28D25
Driva EGサージカルドリル 2.8 mmD - 19 mmL	Ⓢ STR28D19
Driva EGサージカルドリル 2.8 mmD - 25 mmL	Ⓢ STR28D25
Driva EGサージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 19 mmL	Ⓢ STP34D19
Driva EGサージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 25 mmL	Ⓢ STP34D25
Driva EGサージカルドリル 3.4 mmD - 19 mmL	Ⓢ STR34D19
Driva EGサージカルドリル 3.4 mmD - 25 mmL	Ⓢ STR34D25
Driva EGサージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 19 mmL	Ⓢ STP38D19
Driva EGサージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 25 mmL	Ⓢ STP38D25
Driva EGサージカルドリル 3.8 mmD - 19 mmL	Ⓢ STR38D19
Driva EGサージカルドリル 3.8 mmD - 25 mmL	Ⓢ STR38D25
Driva EGサージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 19 mmL	Ⓢ STP44D19
Driva EGサージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 25 mmL	Ⓢ STP44D25
ガイドドサージェリー ドリルモジュールインサート	Ⓢ GSTRAY



	製品番号
チューブアダプターキット • キット内容: 下記のチューブアダプター各1個が同梱されています。 3.7, 4.1, 4.7mmD インプラントに対応	Ⓢ TADKIT
チューブアダプター A / 2.3 mmD	Ⓢ TAD23A
チューブアダプター A / 2.8 mmD	Ⓢ TAD28A
チューブアダプター A / 3.4 mmD	Ⓢ TAD34A
チューブアダプター B / 2.3 mmD	Ⓢ TAD23B
チューブアダプター B / 2.8 mmD	Ⓢ TAD28B
チューブアダプター B / 3.4 mmD	Ⓢ TAD34B
チューブアダプター B / 3.8 mmD	Ⓢ TAD38B
チューブアダプター B / 4.4 mmD	Ⓢ TAD44B

サージカル・ドリル サイト・プレパレーション・テクノロジー

SurgicPro2 ライト付

マイクロモーターシステム「Surgic Pro2」は、動作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を兼ね備え、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し、効率の良い施術をサポートします。



	製品番号
Surgic Pro2 標準セット: コントロールユニット/SGL80M ライト付マイクロモーター/X-SG20ML ライト付ハンドピース(20:1減速) /ワイヤレスフットコントロール/イリゲーションチューブ(3本入) 他付属品	Y1500356-ZV
イリゲーションチューブ10本入	Y1001210-ZV

Osseo 100+

ISQ測定器Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値（インプラント安定指数）を表示します。これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになるため、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。



		製品番号
Osseo 100+ 標準セット: Osseo 100+ 本体／マルチペグドライバー／ACアダプター／ACアダプター用プラグ(US/JP)／ISQテスター ※マルチペグは別売りです。本体には含まれていません。		Y1500447-ZV
マルチペグ TSX 2.9mmDプラットフォーム	Type57	55065-ZV
マルチペグ TSX/V 3.5mmDプラットフォーム	Type41	55049-ZV
マルチペグ TSX/V 4.5mmDプラットフォーム	Type43	55051-ZV

※マルチペグは20回滅菌可能

iSD900

インプラント埋入後のカバースクリューやヒーリングキャップ、アバットメントの着脱において、術者の利便性と安全性を高めるコードレスドライバー。施術スピードの向上と広い術野の確保を実現し、術者の負担を軽減します。




	製品番号
iSD900 標準セット: iSD900 モーターハンドピース/iSD-HP コントラアングルヘッド/iSD900用充電器/ACコード/トルクキャリブレーター/キャリブレーションバー/ON/OFFスイッチレバー/Fタイプスプレーノズル/モーターキャップ	Y1001356-ZV

サニスリーブ コードカバー

一般歯科診療および口腔外科手術時の患者さまの血液や唾液からハンドピースやホースをガードする、ポリエステル製の滅菌済スリーブです。長いホースやケーブルに簡単に装着でき、ハンドピースなどの操作にも支障がありません。

		製品番号
サニスリーブ コードカバー 滅菌済み	12個	4001830087AG

バイオマテリアル

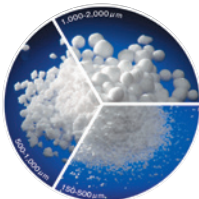


骨補填材「セラソルブ® M」

吸収性骨補填材セラソルブ®Mは、国内の歯科領域で認可された高純度の β -TCP(β -リン酸三カルシウム)を主成分とした人工骨補填材です。生物由来製品とは異なり、不適合性やアレルギー、疾患伝播のリスクが低いです。

	製品番号
セラソルブ® M 150-500 μ m 1.5cc(0.5cc×3本)	RI0031
セラソルブ® M 500-1000 μ m 1.5cc(0.5cc×3本)	RI0032
セラソルブ® M 1000-2000 μ m 2.5cc(0.5cc×5本)	RI0005
セラソルブ® M 1000-2000 μ m 5.0cc(1.0cc×5本)	RI0006

- ・ミクロ、メソマクロ、マクロ細孔からなる開放性の連通した多孔性(5-500 μ m)の顆粒構造が骨化プロセスを促し、これにより吸収プロセスも早くなります。
- ・全気孔率は約65%を有し、この高い気孔率のために毛管効果が向上します。また気孔の連続性により吸収速度が上がる大きな要因となります。
- ・骨の再生と同時に完全吸収します。

※本製品は患者さまから採血した血液と混和することにより、より良好な結果が得られます。

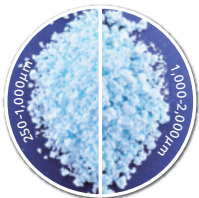

骨補填材「オズボーン®」

非吸収性合成ハイドロキシアパタイトOsbone®は、ヒトまたは動物／異種移植片由来のハイドロキシアパタイト製品に換わる安全で効果的な代替品を提供する次世代の骨補填材です。

	製品番号
オズボーン® 250~1000 μ m (0.5cc×1本入)	9000800501 ^{※1} (OS0001)
オズボーン® 1000~2000 μ m (1cc×1本入)	9000901001 ^{※1} (OS0002)

- ・顆粒は海綿骨構造に類似した多孔性構造を有し、顆粒上の細孔は相互に連通し細孔のネットワークを構成しています。
- ・局所にも優れた組織適合性が実証されており、不適合性、アレルギー、感染リスクが低く一定の品質レベルを維持しています。

※ キャップ色は出荷時期により異なるカラー場合があります。

※1は新品番になり、()内は旧品番になります。ご注文は新旧品番いずれもご使用できます。



TSXカタログ INDEX

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
0～			
0201G	テーパードパイロットドリル 2.1/1.6 mmD 8 mmL - 11.5 mmL	305AGBZX00081000	P25
2320	補綴滅菌トレー	13B1X00079000030	P28
1203G	2.0mmD ラウンドバー	305AGBZX00081000	P26
15AT312	アングルド テーパード アバットメント 15° P3.5mmD/1mm/2mmカフ	22700BZX00409000	P14
15AT323	アングルド テーパード アバットメント 15° P3.5mmD/2mm/3mmカフ	22700BZX00409000	P14
15AT334	アングルド テーパード アバットメント 15° P3.5mmD/3mm/4mmカフ	22700BZX00409000	P14
15AT412	アングルド テーパード アバットメント 15° P4.5mmD/1mm/2mmカフ	22700BZX00409000	P14
15AT423	アングルド テーパード アバットメント 15° P4.5mmD/2mm/3mmカフ	22700BZX00409000	P14
15AT434	アングルド テーパード アバットメント 15° P4.5mmD/3mm/4mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT324	アングルド テーパード アバットメント 30° P3.5mmD/2mm/4mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT335	アングルド テーパード アバットメント 30° P3.5mmD/3mm/5mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT346	アングルド テーパード アバットメント 30° P3.5mmD/4mm/6mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT424	アングルド テーパード アバットメント 30° P4.5mmD/2mm/4mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT435	アングルド テーパード アバットメント 30° P4.5mmD/3mm/5mmカフ	22700BZX00409000	P14
30AT446	アングルド テーパード アバットメント 30° P4.5mmD/4mm/6mmカフ	22700BZX00409000	P14
4001830087AG	サニスリーブ コードカバー 滅菌済み(12個入)	—	P31
A～			
ABTH	アバットメントホルダー	13B1X00079000058	P28
ACTDT	テーパードアバットメント ダイレクトトランスファー(オープントレー用)	13B1X00079000061	P15
ACTGC	テーパードアバットメント ゴールドコーピング	21500BZY00244000	P15
ACTIT	テーパードアバットメント インダイレクトトランスファー(クローズドトレー用)	13B1X00079000061	P15
ACTP	テーパードアバットメント プラスティックコーピング	20600BZY00472000	P15
ACTR	テーパードアバットメント アナログ	13B1X00079000058	P15
ACTT	テーパードアバットメント テンポラリーチタニウムコーピング	21500BZY00244000	P5
AH20/4	アングルドアバットメント20° P3.5mmD/4.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
AH20S	リテーニングスクリュー[AH20S]	21500BZY00245000	P11、12
AH20W/5	アングルドアバットメント20° P4.5mmD/5.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
ARZTSV-DA35	デジタルラボアナログP3.5mmD	13B1X00079000150	P7
ARZTSV-DA45	デジタルラボアナログP4.5mmD	13B1X00079000150	P7
B～			
BAC2	ボールアバットメント P3.5mmD/2mmカフ	21500BZY00245000	P16
BAC4	ボールアバットメント P3.5mmD/4mmカフ	21500BZY00245000	P16
BAC6	ボールアバットメント P3.5mmD/6mmカフ	21500BZY00245000	P16
BACW2	ボールアバットメント P4.5mmD/2mmカフ	21500BZY00245000	P16
BACW4	ボールアバットメント P4.5mmD/4mmカフ	21500BZY00245000	P16
BACW6	ボールアバットメント P4.5mmD/6mmカフ	21500BZY00245000	P16
BAR	ボールアバットメントアナログ SV	13B1X00079000058	P17
BAT	ボールアバットメントトランスファー SV(クローズドトレー用)2個	13B1X00079000058	P17
BPE2937	ボーンプロファイラー-TSV P2.9mmD/3.7mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPE2945	ボーンプロファイラー-TSV P2.9mmD/4.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPT3535	ボーンプロファイラー-TSV P3.5mmD/3.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPT3545	ボーンプロファイラー-TSV P3.5mmD/4.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPT3555	ボーンプロファイラー-TSV P3.5mmD/5.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPT4545	ボーンプロファイラー-TSV P4.5mmD/4.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
BPT4555	ボーンプロファイラー-TSV P4.5mmD/5.5mmフレア	13B1X00079000144	P27

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
BPT4565	ボーンプロファイラー-TSV P4.5mmD/6.5mmフレア	13B1X00079000144	P27
C~			
C20A3	アングルアバットメント20°P2.9mmD/3.5mmDフレア		P10
CAB	キャスタブルボールパターン	20600BZY00472000	P17
CAH	キャップアタッチメント ハウジング	20600BZY00472000	P17
CAN	キャップアタッチメント ナイロンライナー	20600BZY00472000	P17
CAN-G	キャップアタッチメント ナイロンライナーリジッド	20600BZY00472000	P17
CANP31A	Hex-Lock カントウアー アバットメント17° P2.9mmD/3.7mmDフレア/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP31S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/3.7mmDフレア/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP33S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/3.7mmDフレア/3mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP34S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/3.7mmDフレア/4.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP41A	Hex-Lock カントウアー アバットメント17° P2.9mmD/4.5mmDフレア/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP41S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/4.5mmDフレア/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP43A	Hex-Lock カントウアー アバットメント17° P2.9mmD/4.5mmDフレア/3mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP43S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/4.5mmDフレア/3mmカフ	30700BZX00178000	P11
CANP44S	Hex-Lock カントウアー アバットメント ストレート P2.9mmD/4.5mmDフレア/4.5mmカフ	30700BZX00178000	P11
CAS	キャップアタッチメント セット	20600BZY00472000	P17
CASLC	リテiningスクリュー(CASLC)	20600BZY00472000	P6
CASLT	リテiningスクリュー(CASLT)	20600BZY00472000	P6
CAT	キャップアタッチメントトランスファー	20600BZY00472000	P17
CCSNP	サージカルカバースクリューP2.9mmD	30500BZX00269000	P4
CDTNP31	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/1.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CDTNP33	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/3mmカフ	13B1X00079000061	P6
CDTNP34	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/4.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CDTNP41	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/1.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CDTNP43	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/3mmカフ	13B1X00079000061	P6
CDTNP44	ダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/4.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CEEHA333	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 3.7mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
CEEHA335	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 3.7mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
CEEHA337	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 3.7mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
CEEHA343	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 4.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
CEEHA345	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 4.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
CEEHA347	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 2.9mm(D) X 4.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
CHCNP31	ヒーリングカラー P2.9mmD/3.7mmD/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHCNP33	ヒーリングカラー P2.9mmD/3.7mmD/3mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHCNP34	ヒーリングカラー P2.9mmD/3.7mmD/4.5mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHCNP41	ヒーリングカラー P2.9mmD/4.5mmD/1.5mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHCNP43	ヒーリングカラー P2.9mmD/4.5mmD/3mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHCNP44	ヒーリングカラー P2.9mmD/4.5mmD/4.5mmカフ	30700BZX00178000	P5
CHD2.1	ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	305AGBZX00080000	P21、24、27
CHDL2.1	ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	305AGBZX00080000	P21、24、27
CHR2.1	Gem-Lock Hexドライバー2.1mmショート	13B1X00079000148	P21、24、27
CHRL2.1	Gem-Lock Hexドライバー2.1mmロング	13B1X00079000148	P21、24、27
CIANP	インプラントアナログ P2.9mmD	13B1X00079000061	P7
CITNP31	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/1.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CITNP33	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/3mmカフ	13B1X00079000061	P6
CITNP34	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/3.7mmD/4.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CITNP41	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/1.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CITNP43	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/3mmカフ	13B1X00079000061	P6

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
CITNP44	インダイレクトトランスファー P2.9mmD/4.5mmD/4.5mmカフ	13B1X00079000061	P6
CTANP31	チタンテンポラリーアバットメントP2.9mmD/3.5mmDフレア	30700BZX00178000	P7
CLRT2	アバットメントリムーバルツール NP2.9mm プラットフォーム用	13B1X00079000148	P21、24、28
CUAS	リテーニングスクリュー(CUAS)	30700BZX00178000	P11
CUASA	リテーニングスクリュー(CUASA)	30700BZX00178000	P11
D~			
DEG	ドリルエクステンダー	305AGBZX00081000	P26
DHT3/3	ダイレクトトランスファー P3.5mmDノンフレア	13B1X00079000061	P6
DHT3/4	ダイレクトトランスファー P3.5mmD/4.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
DHT3/5	ダイレクトトランスファー P3.5mmD/5.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
DHT4/4	ダイレクトトランスファー P4.5mmDノンフレア	13B1X00079000061	P6
DHT4/5	ダイレクトトランスファー P4.5mmD/5.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
DHT4/6	ダイレクトトランスファー P4.5mmD/6.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
DHTS	リテーニングスクリュー(DHTS)	13B1X00079000061	P6
DHTS2	リテーニングスクリュー(DHTS2)	13B1X00079000061	P7
DSKIT	ドリルストップコンプリートキット	13B1X00079000055	P29
E~			
EZT24G	Drivaゴールドドリル 2.4mmD 22mmL	305AGBZX00080000	P21、24、25
EZT28D24G	Drivaゴールドステップドリル 2.8/2.4mmD 22mmL	305AGBZX00080000	P21、24、25
F~			
FMT3	フィクスチャーマウント/トランスファー P3.5mmD/4.5mmDフレア	22600BZX00448000	P7
FMT4	フィクスチャーマウント/トランスファー P4.5mmD/5.5mmDフレア	22600BZX00448000	P7
G~			
GHX2.5D	GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 21mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	13B1X00079000148	P27
GHX2.5DL	GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 30mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	13B1X00079000148	P27
GHX2.5	GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 17mm(L) ラチェットレンチ用	13B1X00079000148	P27
GHX2.5L	GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 28mm(L) ラチェットレンチ用	13B1X00079000148	P27
GSMOD	ガイドッドサージェリー ドリルモジュールキット	13B1X00079000055	P30
GSTRAY	ガイドッドサージェリー ドリルモジュールインサート	13B1X00079000055	P30
H~			
HC333	ヒーリングカラー P3.5mmD/ノンフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC335	ヒーリングカラー P3.5mmD/ノンフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC343	ヒーリングカラー P3.5mmD/4.5mmDフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC345	ヒーリングカラー P3.5mmD/4.5mmDフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC347	ヒーリングカラー P3.5mmD/4.5mmDフレア/7mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC353	ヒーリングカラー P3.5mmD/5.5mmDフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC355	ヒーリングカラー P3.5mmD/5.5mmDフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC443	ヒーリングカラー P4.5mmD/ノンフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC445	ヒーリングカラー P4.5mmD/ノンフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC453	ヒーリングカラー P4.5mmD/5.5mmDフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC455	ヒーリングカラー P4.5mmD/5.5mmDフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC457	ヒーリングカラー P4.5mmD/5.5mmDフレア/7mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC463	ヒーリングカラー P4.5mmD/6.5mmDフレア/3mmカフ	21300BZY00036000	P5
HC465	ヒーリングカラー P4.5mmD/6.5mmDフレア/5mmカフ	21300BZY00036000	P5
HLA3/3	Hex-Lock アバットメント P3.5mmD/ノンフレア	21500BZY00245000	P10
HLA3/4	Hex-Lock アバットメント P3.5mmD/4.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
HLA3/4L	Hex-Lock アバットメント P3.5mmD/4.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
HLA3/5	Hex-Lock アバットメント P3.5mmD/5.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
HLA3G	ゴールドアバットメント エンゲージング P3.5mmD	21500BZY00244000	P13

製品番号	製品名	承認・認証・届出番号	ページ
HLA4/4	Hex-Lock アバットメント P4.5mmD / ノンフレア	21500BZY00245000	P10
HLA4/5	Hex-Lock アバットメント P4.5mmD / 5.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
HLA4/6	Hex-Lock アバットメント P4.5mmD / 6.5mmDフレア	21500BZY00245000	P10
HLA4G	ゴールドアバットメント エンゲージング P4.5mmD	21500BZY00244000	P13
HLT3/3	インダイレクトトランスファー P3.5mmD / ノンフレア	13B1X00079000061	P6
HLT3/4	インダイレクトトランスファー P3.5mmD / 4.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
HLT3/5	インダイレクトトランスファー P3.5mmD / 5.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
HLT4/4	インダイレクトトランスファー P4.5mmD / ノンフレア	13B1X00079000061	P6
HLT4/5	インダイレクトトランスファー P4.5mmD / 5.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
HLT4/6	インダイレクトトランスファー P4.5mmD / 6.5mmDフレア	13B1X00079000061	P6
HLTE	エクステンションスクリュー[HLTE]	13B1X00079000061	P6
HLTS2	リテーニングスクリュー[HLTS2]	13B1X00079000061	P6、10
HX1.25	Hexドライバー 1.25 ショート(1.25mmHex / 17mmL)	13B1X00079000055	P26
HX1.25D	ハンドピース用Hexドライバー 1.25 ショート(1.25mmHex / 23mmL)	13B1X00079000055	P26
HX3.0D	ハンドピース用Hexドライバー 3.0(3.0mmHex / 25mmL)	13B1X00079000055	P22
HX3.0-S	Hexドライバー 3.0 ショート(3.0mmHex / 17mmL)	13B1X00079000055	P22
HXGR1.25	Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ショート(1.25mmHex / 22mmL)	13B1X00079000055	P26
HXL1.25	Hexドライバー 1.25 ロング(1.25mmHex / 22mmL)	13B1X00079000055	P26
HXL1.25D	ハンドピース用Hexドライバー 1.25 ロング(1.25mmHex / 26mmL)	13B1X00079000055	P26
HXL3.0-S	Hexドライバー 3.0 ロング(3.0mmHex / 28mmL)	13B1X00079000055	P22
HXLGR1.25	Gem-Lock Hexドライバー 1.25 ロング(1.25mmHex / 30mmL)	13B1X00079000055	P26
I~			
IA3	インプラントアナログ P3.5mmD	13B1X00079000058	P6
IA4	インプラントアナログ P4.5mmD	13B1X00079000058	P6
IRT	インプラントリムーバルツール	13B1X00079000055	P28
M~			
MHLAS	リテーニングスクリュー[MHLAS]	21500BZY00245000	P10、11、12、13
MTL	ドリルストップ マルチツール	13B1X00079000055	P29
MTWSD	ワキシングスクリュー[MTWSD]	13B1X00079000058	P13
N~			
NEA3G	ゴールドアバットメント ノンエンゲージング P3.5mmD	21500BZY00244000	P13
NEA4G	ゴールドアバットメント ノンエンゲージング P4.5mmD	21500BZY00244000	P13
NPILA-29	デジタルラボアナログNP(2.9mmD)	13B1X00079000150	P7
NPMODG	NP サージカルモジュールキットG	305AGBZX00080000	P21、24、28
NPTRAYG	NP サージカルモジュールインサートG(トレイのみ)	—	P24
O~			
ODSA-TSV301	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 1.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV302	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 2.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV303	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 3.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV304	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 3.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV305	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 5.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV306	OverdenSURE アバットメント TSV 3.5mm(D) × 6.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV401	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 1.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV402	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 2.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV403	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 3.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV404	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 4.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV405	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 5.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODSA-TSV406	OverdenSURE アバットメント TSV 4.5mm(D) × 6.0mm(H)	30600BZX00087000	P18
ODS-RIKIT2001	OverdenSURE リテンションキット 1セット	305AGBZX00002000	P19

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
ODS-RIKIT2002	OverdenSURE リテンションキット 2セット	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIKIT4001	OverdenSURE リテンションキット 40° 1セット	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIKIT4002	OverdenSURE リテンションキット 40° 2セット	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIB2004	OverdenSURE リテンションインサート ブルー 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIP2004	OverdenSURE リテンションインサート ピンク 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIC2004	OverdenSURE リテンションインサート クリア 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIR4004	OverdenSURE リテンションインサート レッド 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIY4004	OverdenSURE リテンションインサート イエロー 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RIG4004	OverdenSURE リテンションインサート グリーン 4個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RH01	OverdenSURE リテンションハウジングキャップ ブラックインサート付 1個	305AGBZX00002000	P19
ODS-RH010	OverdenSURE リテンションハウジングキャップ ブラックインサート付 10個	305AGBZX00002000	P19
ODS-BS020	OverdenSURE ブロックアウト スペース 20個	13B1X00079000146	P19
ODS-DRVR	OverdenSURE アバットメントドライバー	13B1X00079000145	P19
ODS-IRTOOL	OverdenSURE リムーバブル・インサーション ツール	13B1X00079000145	P19
ODS-IC01	OverdenSURE インプレッションコーピング 1個	13B1X00079000146	P19
ODS-IC010	OverdenSURE インプレッションコーピング 10個	13B1X00079000146	P19
ODS-AA01	OverdenSURE アナログ 1個	13B1X00079000146	P19
ODS-AA010	OverdenSURE アナログ 10個	13B1X00079000146	P19
OS0001	Osbone 250-1000μm(0.5cc × 1本)	23100BZX00011000	P32
OS0002	Osbone 1000-2000μm(1cc × 1本)	23100BZX00011000	P32
P~			
PPAR	パラレリングツール(2.3mmD/2.8mmD)	13B1X00079000055	P28
PR0011	SGスクリュー・ショート(8.2mmL)	13B1X00079000041	P8
PR0012	SGスクリュー・ロング(19.5mmL)	13B1X00079000041	P8
PR0026	キャリアヘックスドライバー 0.050" セット	13B1X00079000050	P26
PR0027	キャリアヘックスドライバー 0.050" ショート(22.5mmL)	13B1X00079000050	P26
PR0028	キャリアヘックスドライバー 0.050" ロング(31mmL)	13B1X00079000050	P26
PR0035	マニュアルドライバーH	13B1X00079000050	P28
PR0037	エクストラ ロング ドライバー (32mmL)	13B1X00079000050	P26
PR0040	ユニバーサル ドライバー ハンドピースタイプ	13B1X00079000048	P9
PR0046	TSV/SVダイレクトトランスファーH P3.5mmD/4.5mmDフレア	13B1X00079000066	P6
PR0047	TSV/SVダイレクトトランスファーH P4.5mmD/4.5mmDフレア	13B1X00079000066	P6
PR0090	TSV/SVダイレクトトランスファーH P3.5mmD/3.8mmDフレア		P6
PT341A	プラスチック テンポラリー アバットメント P3.5mmD/1mmカフ(17°アングル)	22900BZX00056000	P7
PT341S	プラスチック テンポラリー アバットメント P3.5mmD/1mmカフ(ストレート)	22900BZX00056000	P7
PT344A	プラスチック テンポラリー アバットメント P3.5mmD/4mmカフ(17°アングル)	22900BZX00056000	P7
PT344S	プラスチック テンポラリー アバットメント P3.5mmD/4mmカフ(ストレート)	22900BZX00056000	P7
PT451A	プラスチック テンポラリー アバットメント P4.5mmD/1mmカフ(17°アングル)	22900BZX00056000	P7
PT451S	プラスチック テンポラリー アバットメント P4.5mmD/1mmカフ(ストレート)	22900BZX00056000	P7
PT454A	プラスチック テンポラリー アバットメント P4.5mmD/4mmカフ(17°アングル)	22900BZX00056000	P7
PT454S	プラスチック テンポラリー アバットメント P4.5mmD/4mmカフ(ストレート)	22900BZX00056000	P7
R~			
RH2.5	Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ショート(2.5mmHex/17mmL)	13B1X00079000055	P27
RHD2.5	ハンドピース用Gem-Lock Hexドライバー 2.5(2.5mmHex/21mmL)	13B1X00079000055	P27
RHL2.5	Gem-Lock Hexドライバー 2.5 ロング(2.5mmHex/28mmL)	13B1X00079000055	P27
RI0005	セラソルブ®M 1000-2000μm 2.5cc(0.5cc×5本)	22400BZX00002000	P32
RI0006	セラソルブ®M 1000-2000μm 5.0cc(1.0cc×5本)	22400BZX00002000	P32
RI0031	セラソルブ®M 150-500μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P32
RI0032	セラソルブ®M 500-1000μm 1.5cc(0.5cc×3本)	22400BZX00002000	P32

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
RSR	Gem-Lock ラチェットレンチ	13B1X00079000055	P28
S~			
SA341	Hex-Lock ショートアバットメント P3.5mmD / 4.5mmD フレア / 1mm カフ	22300BZX00243000	P12
SA342	Hex-Lock ショートアバットメント P3.5mmD / 4.5mmD フレア / 2mm カフ	22300BZX00243000	P12
SA451	Hex-Lock ショートアバットメント P4.5mmD / 5.5mmD フレア / 1mm カフ	22300BZX00243000	P12
SA452	Hex-Lock ショートアバットメント P4.5mmD / 5.5mmD フレア / 2mm カフ	22300BZX00243000	P12
SAANA4	ショートアバットメントアナログ 4.5mmD フレア	13B1X00079000058	P12
SAANA5	ショートアバットメントアナログ 5.5mmD フレア	13B1X00079000058	P12
SAWAX4	ショートワキシングコーピング 4.5mmD フレア	13B1X00079000058	P12
SAWAX5	ショートワキシングコーピング 5.5mmD フレア	13B1X00079000058	P12
SCTS	リテイニングスクリュー [SCTS]	21500BZY00245000	P15
SCWS	ワキシングスクリュー [SCWS]	13B1X00079000058	P15
SRT	アバットメントスクリュー リムーバルツール	13B1X00079000055	P27
SS10D16	10mmL インプラント用ストップセット (ショートドリル用)	13B1X00079000055	P29
SS10D22	10mmL インプラント、16mmL インプラント用ストップセット	13B1X00079000055	P29
SS11D16	11.5mmL インプラント用ストップセット (ショートドリル用)	13B1X00079000055	P29
SS11D22	11.5mmL インプラント用ストップセット (ロングドリル用)	13B1X00079000055	P29
SS13D22	13mmL インプラント用ストップセット (ロングドリル用)	13B1X00079000055	P29
SS51D	5.1mmD ドリル用ストップキット	13B1X00079000055	P29
SS57D	5.7/5.1mmD ドリル用ストップキット	13B1X00079000055	P29
SS8D16	8mmL インプラント用ストップセット (ショートドリル用)	13B1X00079000055	P29
SS8D22	8mmL インプラント用ストップセット (ロングドリル用)	13B1X00079000055	P29
SSHS	スクエアコネクション ハンドドライバー	13B1X00079000055	P28
STR23D19	Driva EG サージカルドリル 2.3 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STR23D25	Driva EG サージカルドリル 2.3 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STRKITG	TSX/TSV サージカルスターターキット G	305AGBZX00080000	P23
STP28D19	Driva EG サージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STP28D25	Driva EG サージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STR28D19	Driva EG サージカルドリル 2.8 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STR28D25	Driva EG サージカルドリル 2.8 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STP34D19	Driva EG サージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STP34D25	Driva EG サージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STR34D19	Driva EG サージカルドリル 3.4 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STR34D25	Driva EG サージカルドリル 3.4 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STP38D19	Driva EG サージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STP38D25	Driva EG サージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STR38D19	Driva EG サージカルドリル 3.8 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STR38D25	Driva EG サージカルドリル 3.8 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
STP44D19	Driva EG サージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 19 mmL	13B1X00079000055	P30
STP44D25	Driva EG サージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 25 mmL	13B1X00079000055	P30
SU0019	SG スリーブ TSV 3.5mmD (チタン用)	13B1X00079000059	P8
SU0020	SG スリーブ TSV 4.5mmD (チタン・ジルコニア共用)	13B1X00079000059	P8
SU0022	SG スリーブ TSV 3.5mmD (ジルコニア用)	13B1X00079000059	P8
SU1001	ユニバーサル アナログ レギュラー	13B1X00079000047	P9
SU1002	ユニバーサル インプレッションポスト レギュラー S	13B1X00079000047	P9
SU1003	ユニバーサル インプレッションポスト スクリュー S	13B1X00079000047	P9
SU1004	ユニバーサル インプレッションポスト レギュラー L	13B1X00079000047	P9
SU1005	ユニバーサル インプレッションポスト スクリュー L	13B1X00079000047	P9
SU1006	ユニバーサル ワキシングスリーブ レギュラー S	13B1X00079000047	P9

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
SU1007	ユニバーサル ワキシングスリブ レギュラー L	13B1X00079000047	P9
SU1008	ユニバーサル ワキシングスクリュー 2mmL	13B1X00079000047	P9
SU1009	ユニバーサル ワキシングスクリュー 9mmL	13B1X00079000047	P9
SU1010	ユニバーサル ワキシングスクリュー 15mmL	13B1X00079000047	P9
SU1011	ユニバーサル ハンドル17°角度付用	13B1X00079000048	P9
SU1012	ユニバーサル ドライバー	13B1X00079000048	P9
SU1013	ユニバーサル ドライバー 4mmスクエア	13B1X00079000048	P9
SU1014	O-リング ユニバーサルドライバー 4mmスクエア用	13B1X00079000048	P9
T~			
TAC2	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P3.5mmD/2mmカフ	21500BZY00245000	P14
TAC3	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P3.5mmD/3mmカフ	21500BZY00245000	P14
TAC4	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P3.5mmD/4mmカフ	21500BZY00245000	P14
TAC5	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P3.5mmD/5mmカフ	21500BZY00245000	P14
TACW2	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P4.5mmD/2mmカフ	21500BZY00245000	P14
TACW3	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P4.5mmD/3mmカフ	21500BZY00245000	P14
TACW4	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P4.5mmD/4mmカフ	21500BZY00245000	P14
TACW5	テーパードアバットメント(ノンエンゲージング) P4.5mmD/5mmカフ	21500BZY00245000	P14
TADKIT	チューブアダプターキット	13B1X00079000055	P30
TAD23A	チューブアダプター A / 2.3 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD28A	チューブアダプター A / 2.8 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD34A	チューブアダプター A / 3.4 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD23B	チューブアダプター B / 2.3 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD28B	チューブアダプター B / 2.8 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD34B	チューブアダプター B / 3.4 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD38B	チューブアダプター B / 3.8 mmD	13B1X00079000055	P30
TAD44B	チューブアダプター B / 4.4 mmD	13B1X00079000055	P30
TATHC	ヒーリングキャップ	21000BZY00212000	P14
TCANA4A	カントゥアー アバットメントアナログ・チタン 17° 4.5mmDフレア	13B1X00079000058	P12
TCANA4S	カントゥアー アバットメントアナログ・チタン ストレート 4.5mmDフレア	13B1X00079000058	P12
TCANA5A	カントゥアー アバットメントアナログ・チタン 17° 5.5mmDフレア	13B1X00079000058	P12
TCANA5S	カントゥアー アバットメントアナログ・チタン ストレート 5.5mmDフレア	13B1X00079000058	P12
TEEHA333	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 3.8mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA335	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 3.8mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA337	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 3.8mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA353	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA355	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA357	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA363	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA365	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA367	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 3.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA443	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 4.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA445	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 4.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA447	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 4.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA453	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 5.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA455	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 5.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA457	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 5.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA463	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA465	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA467	エンコード エマージェンシ ヒーリングアバットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 6.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
TEEHA473	エンコード エマージェンス ヒーリングアパットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 7.5mm(EP) X 3mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA475	エンコード エマージェンス ヒーリングアパットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 7.5mm(EP) X 5mm(H)	30500BZX00269000	P5
TEEHA477	エンコード エマージェンス ヒーリングアパットメント TSX/TSV 4.5mm(D) X 7.5mm(EP) X 7mm(H)	30500BZX00269000	P5
TGC3	パーゴールドコーピング	20600BZY00472000	P15
TGC5	パーゴールドコーピング・ロング	20600BZY00472000	P15
TLRT2	アパットメントリムーバルツール	13B1X00079000055	P28
TSC	サージカルカバースクリューP3.5mmD	21000BZY00212000	P4
TSCW	サージカルカバースクリューP4.5mmD	21000BZY00212000	P4
TSV23G	Driva ゴールドドリル 2.3 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV23SG	Driva ゴールドドリル 2.3 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV28G	Driva ゴールドドリル 2.8 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV28SG	Driva ゴールドドリル 2.8 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV34D28G	Driva ゴールドステップドリル 3.4/2.8 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV34D28SG	Driva ゴールドステップドリル 3.4/2.8 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV34G	Driva ゴールドドリル 3.4 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV34SG	Driva ゴールドドリル 3.4 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV38D34G	Driva ゴールドステップドリル 3.8/3.4 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV38D34SG	Driva ゴールドステップドリル 3.8/3.4 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV38G	Driva ゴールドドリル 3.8 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV38SG	Driva ゴールドドリル 3.8 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV44D38G	Driva ゴールドステップドリル 4.4/3.8 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV44D38SG	Driva ゴールドステップドリル 4.4/3.8 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV44G	Driva ゴールドドリル 4.4 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV44SG	Driva ゴールドドリル 4.4 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV51D44G	Driva ゴールドステップドリル 5.1/4.4 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV51D44SG	Driva ゴールドステップドリル 5.1/4.4 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV51G	Driva ゴールドドリル 5.1 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV51SG	Driva ゴールドドリル 5.1 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV57D51G	Driva ゴールドステップドリル 5.7/5.1 mmD x 22 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSV57D51SG	Driva ゴールドステップドリル 5.7/5.1 mmD x 16 mmL	305AGBZX00081000	P25
TSVBKLG	ステージングブロックG	—	P28
TSVKITG	TSX/TSVサージカルキットG	305AGBZX00080000	P20、22
TSVTRAYG	TSVサージカルトレーG	—	P22、23、28
TSVTRYDG	TSX/TSVサージカルトレーG&ドリルG	305AGBZX00080000	P23
TSX31B8	TSXインプラント 3.1 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX31B10	TSXインプラント 3.1 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX31B11	TSXインプラント 3.1 mmD X 11.5mmL	30500BZX00269000	P4
TSX31B13	TSXインプラント 3.1 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX31B16	TSXインプラント 3.1 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX37B8	TSXインプラント 3.7 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX37B10	TSXインプラント 3.7 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX37B11	TSXインプラント 3.7 mmD X 11.5 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX37B13	TSXインプラント 3.7 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX37B16	TSXインプラント 3.7 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX41B8	TSXインプラント 4.1 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX41B10	TSXインプラント 4.1 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX41B11	TSXインプラント 4.1 mmD X 11.5 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX41B13	TSXインプラント 4.1 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX41B16	TSXインプラント 4.1 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4

製品番号	製 品 名	承認・認証・届出番号	ページ
TSX47B8	TSXインプラント 4.7 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX47B10	TSXインプラント 4.7 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX47B11	TSXインプラント 4.7 mmD X 11.5 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX47B13	TSXインプラント 4.7 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX47B16	TSXインプラント 4.7 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX54B8	TSXインプラント 5.4 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX54B10	TSXインプラント 5.4 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX54B11	TSXインプラント 5.4 mmD X 11.5 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX54B13	TSXインプラント 5.4 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX54B16	TSXインプラント 5.4 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX6B8	TSXインプラント 6.0 mmD X 8 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX6B10	TSXインプラント 6.0 mmD X 10 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX6B11	TSXインプラント 6.0 mmD X 11.5 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX6B13	TSXインプラント 6.0 mmD X 13 mmL	30500BZX00269000	P4
TSX6B16	TSXインプラント 6.0 mmD X 16 mmL	30500BZX00269000	P4
TT3.7	3.7mmD コルチカルボーンタップ TSV	13B1X00079000055	P21、22
TT4.1	4.1mmD コルチカルボーンタップ TSV	13B1X00079000055	P21、22
TT4.7	4.7mmD コルチカルボーンタップ TSV	13B1X00079000055	P21、22
TT6.0	6.0mmD コルチカルボーンタップ TSV	13B1X00079000055	P21、22
TW1.25	トルクレンチ用Hexドライバー 1.25 ショート(1.25mmHex/17mmL)	13B1X00079000022	P26
TW1.25L	トルクレンチ用Hexドライバー 1.25 ロング(1.25mmHex/22mmL)	13B1X00079000022	P26
TWR	TWRトルクラチェット(10-35Ncm)	13B1X00079000022	P28
U~			
URS2	リテーニングスクリュー(URS2)	22300BZX00236000	P7
Y~			
Y1001210-ZV	SurgicPro2用 イリゲーションチューブ10本	—	P31
Y1001356-ZV	iSD900 標準セット	222A2BZX00016000	P31
Y1500356-ZV	Surgic Pro2 標準セット	303A2BZX00014000	P31
Y1500447-ZV	Osseo 100+ 標準セット	09B2X00016000153	P31
Z~			
ZTIRW	Z-Highトルク インディケーティング ラチェット レンチ(50-90Ncm)	13B1X00079000055	P28
ZOA341A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P3.5mmD/4.5mmDフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA341S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P3.5mmD/4.5mmDフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA342A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P3.5mmD/4.5mmDフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA342S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P3.5mmD/4.5mmDフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA343S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P3.5mmD/4.5mmDフレア/3mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA441A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P4.5mmD/ノンフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA441S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/ノンフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA442A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P4.5mmD/ノンフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA442S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/ノンフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA443S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/ノンフレア/3mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA451A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P4.5mmD/5.5mmDフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA451S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/5.5mmDフレア/1mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA452A	Hex-Lock カントゥアー アバットメント 17° P4.5mmD/5.5mmDフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA452S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/5.5mmDフレア/2mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOA453S	Hex-Lock カントゥアー アバットメント ストレート P4.5mmD/5.5mmDフレア/3mmカフ	21500BZY00245000	P11
ZOPTT30	3.0mmD コルチカルボーンタップ	13B1X00079000148	P24

FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル 0120-118-084

※太枠内をご記入ください

No.

ご注文日	月 日	希望納期	月 日 午前 ・ 午後 まで
タイム便	☐ 使用する	• 地域によってご利用になれない場合がございます。 • タイム便をご利用の場合、別途追加料金はおお客様のご負担となります。	

ご請求先			ご担当者名	様
ご住所	〒			
TEL	— —	FAX	— —	

ご納品先(上記ご住所以外に納品ご希望時)	
ご住所	〒 TEL. — —

※ 当日発送受付時間:月～金曜日9:00～15:30(定休日:土曜・日曜・祝日)
※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ZVJD0002 2026/07

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890
FAX.0120-118-084



How to order

ご注文について

ご注文のご案内

本カタログに掲載の製品をご注文の際には、包装単位、価格および製品番号をご確認の上、必ず製品番号でご注文いただきますようお願い申し上げます。

お願い

- 製品番号以外でのご注文は賜りかねます。予めご了承ください。
- ◎マークは、受注発注となる製品です。納品には3週間程度かかります。
- 欠品などのため、製品によりご注文後2週間程度かかる場合がございます。
- 表示の価格は、全て税抜き価格です。

ご注文先

ご注文は電話・FAXにて承ります。

FAXでのご注文は「FAX注文書」へご記入の上、ご注文ください。

ジンヴィ・ジャパン

カスタマーサービス

◎注文専用フリーダイヤル

TEL. ☎ 0120-418-890 (月～金曜日/9:00～17:30)

イ イ ハ オハヨー

FAX. ☎ 0120-118-084 (24時間)

製品発送のご案内

- 当日発送受付時間：月～金曜日/9:00～15:30(定休日：土曜・日曜・祝日)。
- 当日発送受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります。
- 一部の製品につきましては、返品および交換はできません。
- ご購入金額が一定額に満たない場合は、送料を別途ご請求させていただきます。

掲載の製品について

- 製品は改良のため、外観やパッケージ、仕様、販売価格など、予告なく変更することがございます。
- 掲載製品は、製造元による製造終了、弊社の輸入終了など、予告なく販売を終了することがございます。

医療機器製造販売業許可番号：13B1X00079

●製造販売元・販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

©2026 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0137 2026/07

Unless otherwise indicated, as referenced herein, all trademarks and intellectual property rights are the property of ZimVie Inc. and its affiliates; and all products are manufactured by one or more of the dental subsidiaries of ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) and distributed by ZimVie US Corp LLC and its authorized marketing partners. For additional product information, please refer to the individual product labeling or instructions for use. Product clearance and availability may be limited to certain countries/regions. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. Distribution to any other recipient is prohibited. This material may not be copied or reprinted without the express written consent of ZimVie and is not for distribution in France.