


デジタルカメラアダプタ 2

スマートフォン用

スマートフォン用 / Easy 360

プロスペクト・コンパクト2の、外部カメラ接続アクセサリーがさらに充実。

iPhone装着用のデジタルカメラアダプタ2「スマートフォン用」、
デジタルカメラアダプタ2「スマートフォン用 / Easy 360」が新登場！
よりスマートな画像記録、プレゼンテーションが可能になりました。

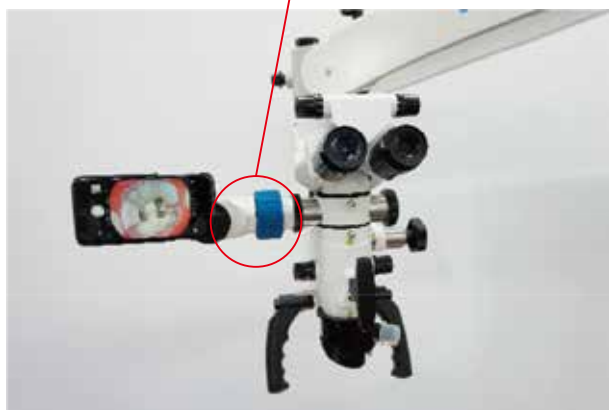

デジタルカメラアダプタ 2
「スマートフォン用」装着イメージ



デジタルカメラアダプタ 2
「スマートフォン用 / Easy 360」装着イメージ

オプション品がさらに充実！！

●iPhoneによるスムーズな画像記録

iPhoneに搭載の標準カメラ機能または、各種カメラアプリを活用し、静止画や動画をスピーディーに記録することが可能です。また、Bluetooth接続のフットスイッチ（別売）や、市販のシャッタースイッチなどを使用することで、ディスプレイに触れずスムーズに画像を記録することも可能です。

●アシスタントとの画像共有や、スマートなプレゼンテーション

iPhoneのピンチアウト、ピンチイン機能を用いることで、撮影した術野画像を簡単に拡大、縮小表示をすることが可能です。また、Apple TVとiPhoneを無線接続 [画面ミラーリング] することで、iPhoneで撮影しているライブ画像や記録された動画、静止画を大型テレビモニターなどに表示することが可能となり、アシスタントモニターとしては勿論のこと、患者さまへのプレゼンテーションをよりスマートかつ、わかりやすく行えます。

● iCloudによるクラウド画像管理および、AirDropによる他デバイスでの画像転送

iCloudを利用すると、撮影した画像や動画をクラウド上で管理することが可能となり、インターネットの環境が有ればいつでも、どこでも撮影した静止画像、動画を確認することが可能となります。また、「AirDrop」機能を活用すると、インターネット環境の無い場所でも他のApple製デバイスと静止画、動画を共有することが可能です。

●2種類のタイプをご用意

iPhone装着用のデジタルカメラアダプタ2（モバイルフォン用）、デジタルカメラアダプタ2（モバイルフォン用/Easy 360）の2種類をご用意しています。本製品をマイクロスコープへ装着する際は、別売オプションのビームスプリッター2 [製品番号: PE0013] または、ビームスプリッター2（アングルロテーション エクステンダータイプ） [製品番号: PE0014] が必要となります。



**デジタルカメラアダプタ2
「モバイルフォン用」**
標準価格: 230,000円
製品番号: BVAC-0123W



iPhoneを縦・横方向に固定できるシンプルな接続アダプター。



**デジタルカメラアダプタ2
「モバイルフォン用/Easy 360」**
標準価格: 274,000円
製品番号: BVAC-0138



iPhoneを縦・横方向に固定でき、さらに2ヶ所の回転軸によりディスプレイの角度を上下・左右に調整が可能。

【関連アクセサリ】

●モバイルフォン固定カバー（各種）

※Apple、iPhone、Apple TV、iCloud、AirDrop、Apple IDは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※本製品で撮影される静止画、動画には製品の構造上、若干の歪みが生じます。予めご了承ください。

※iCloudおよびApple TVの設定には設定には「Apple ID」が必要となる場合があります。予めご了承ください。Apple IDは個人情報の入力が必要となるため、設定はお客様個々の責任のもとに設定していただく必要があります。iPhoneおよびApple TV、iCloudの設定方法、操作方法に関しましては、Apple社のカスタマーサービスへお問い合わせください。

※クラウドサービスをご利用いただく上での個人情報の漏洩防止策に関しましては、ご利用になるお客様の責任範囲にてご利用ください。

※表示価格は2018年6月1日現在（消費税は含みません）

一般医療機器 機械器具 (25) 医療用鏡 可搬型手術用顕微鏡 (36354020) 医療機器届出番号: 13B2X00022000074号

●製造販売元 ベントロン・ジャパン株式会社 〒140-0014 東京都品川区大井4-13-17 ●製造元 ズーマックス メディカル社

●販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社



ZIMMER BIOMET
ジンマー・バイオメット・デンタル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F ●製造販売業許可番号 13B1X00079
【カスタマーサービス】 東京: TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084
大阪: TEL.0120-318-418 FAX.0120-314-004

© 2021 Zimmer Biomet Dental G.K. All right reserved. ZBD0036 2021/01