



MEDIT *i900* Family

Medit *i900* classic and Medit *i900*

簡単、そして

Your



MEDIT i900 classic

て高精度

Way



MEDIT *i*900

簡単、そして高精度 *Your Way*

タッチインターフェイスとボタンインターフェイスのどちらでも高度なスキャンテクノロジーを利用することができます。



高速で簡単なスキャン

- スムーズなワークフローを実現。
- 一度に広い視野を捉え、より迅速なスキャンを実現します。
- 無歯顎患者のスキャンも容易にし、効率的な治療を実現します。



コンパクトで軽量、そして快適な持ち心地

- 重さはわずか165g。スマートフォンよりも軽く、長時間使用しても手首への負担を軽減します。
- 人間工学に基づいたスリムなデザインで、快適でしっかりとしたグリップを実現。



シームレスで衛生的

- シームレスな一体型デザインでお手入れが簡単。
- 内蔵UV殺菌装置が、デバイスを内側から外側まで清潔に保ちます。





チップ

インテリジェントセンサー

スキャン開始ボタン

第3世代
光学エンジン

タッチバンド

軽量でコンパクト

一体化された構造の
ユニボディデザイン

高速予熱によりすぐに
スキャンを開始

LED インジケーター

タッチパッド

i900 Family Interfaces:

Touch

タッチ

Button

ボタン

独自のインターフェース、
共通した卓越性

高度な10ビットカメラ技術

- メタルスキャン時の性能が向上
- スキャン精度の向上
- さらに深くなったスキャン深度
- よりクリアになった画質



高精度なスキャンボディータを取得




より高精度にインレー窩洞をスキャン


よりワイドになった FOV (Field of View)

18 x 15mm (552 x 460 ピクセル)

少ない画像キャプチャでより速く、正確なスキャンを実現

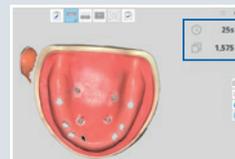

Medit i900

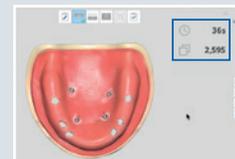

従来製品

高精度なスキャンボディータを取得

高精度なインレーデータを取得



タッチバンド&タッチパッド

カスタマイズ可能なコマンドアクション。マウスを使わずにスマートな操作を実現。

Medit 史上最軽量で
最もコンパクト



インテリジェントセンサー

LED と触覚フィードバック。
接続からスキャンまで、常に状況をお知らせします。

Ready for Scan

Scanning

UV-C LED in Process

Caution

Alert




ユニボディデザイン

完璧なバランスを実現する継ぎ目の
ないデザイン。




もっと迅速に高精度な患者の印象採得を実現

鮮明なスキャンデータで診察の精度を向上

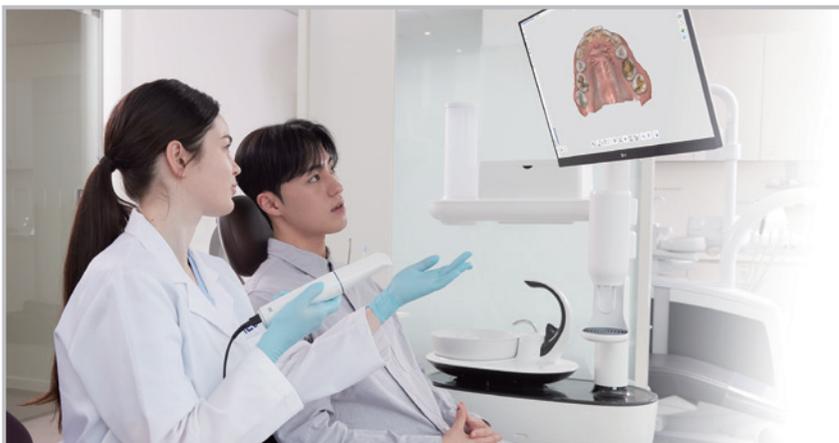

- ・ 新型10ビット第3世代光学エンジンを搭載。
- ・ リアルなカラースキャンデータで、信頼性の高いコンサルティングを実現。

AIスキャンアシスタントで初心者でも簡単

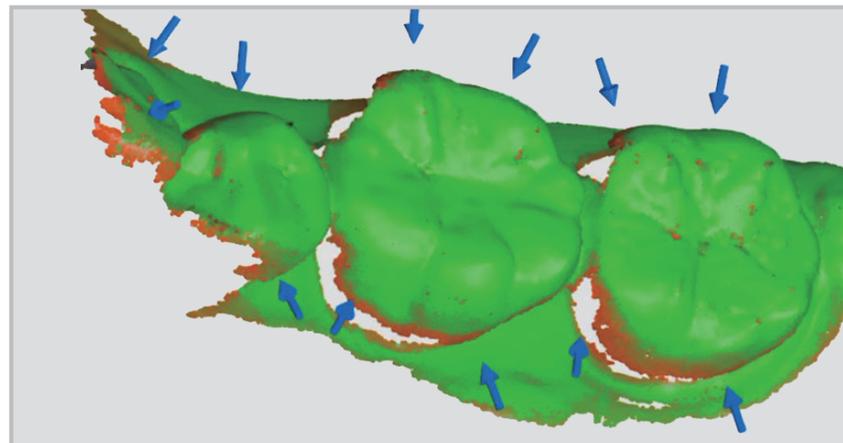


- ・ スキャン中にリアルタイムで精度をチェックします。
- ・ コントラスト信頼性マップを使用して、より多くのデータが必要な領域を特定します。

軽やかで快適、どんなスキャンにも対応



- ・ 手首への負担を最小限に抑え、負担なく使用できるように設計されています。
- ・ 重さはわずか165gでスマートフォンよりも軽いため、長時間使用しても疲れません。


リアルタイムコミュニケーションで、迅速な患者ケアを実現

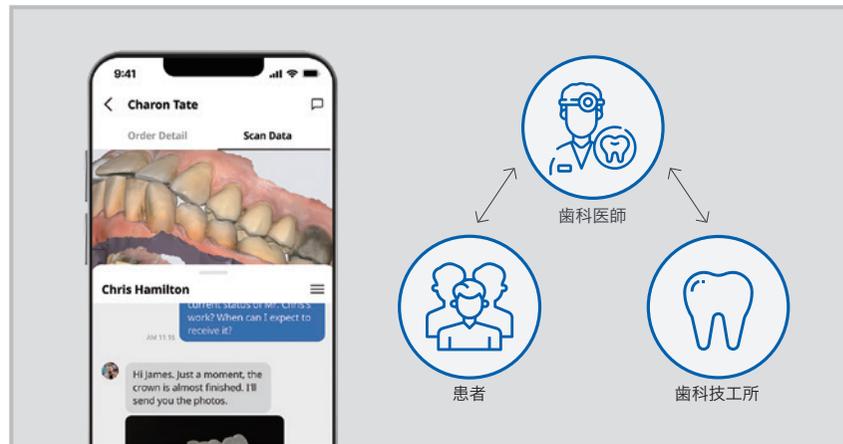

- ・ Webビューアを介して患者と治療の進捗状況を簡単に共有できます。
- ・ ラボとデジタルデータをシームレスに共有し、より迅速なコミュニケーションを実現します。


MEDIT i900 製品仕様

カテゴリー		Medit i900 classic	Medit i900
スキャナー			
仕様	インターフェースタイプ	ボタン	タッチ
	コネクションタイプ		Wired
	重量		165 g
	撮影範囲 (Field of View)		18 x 15 mm
	カメラ		10 bit
患者	患者とのリアルタイムコミュニケーション		Yes
	審美カウンセリングに特化したアプリ		Yes
	治療前後のコンサルティングアプリ		Yes
歯科技工所	ワンクリックで取引先のラボにデータを転送		Yes
	高密度データ用のHDモード		Yes
	リアルタイムにアーティファクト除去機能を備えたAIスキャン		Yes
	実物に忠実なリアルなカラーズキャン		Yes
	シェード測定サポート		Yes
	ダイナミックバイトキャプチャのための横方向への顎運動スキャン		Yes
	口腔内カメラ機能		Yes
歯科医師	偶発的な損傷に対しても補償をカバーするMedit社の保証		Yes
	コンパクトで軽量		Yes
	衛生性が高いシームレスなデザイン		Yes
	咬合関係を検証するための専門アプリ		Yes

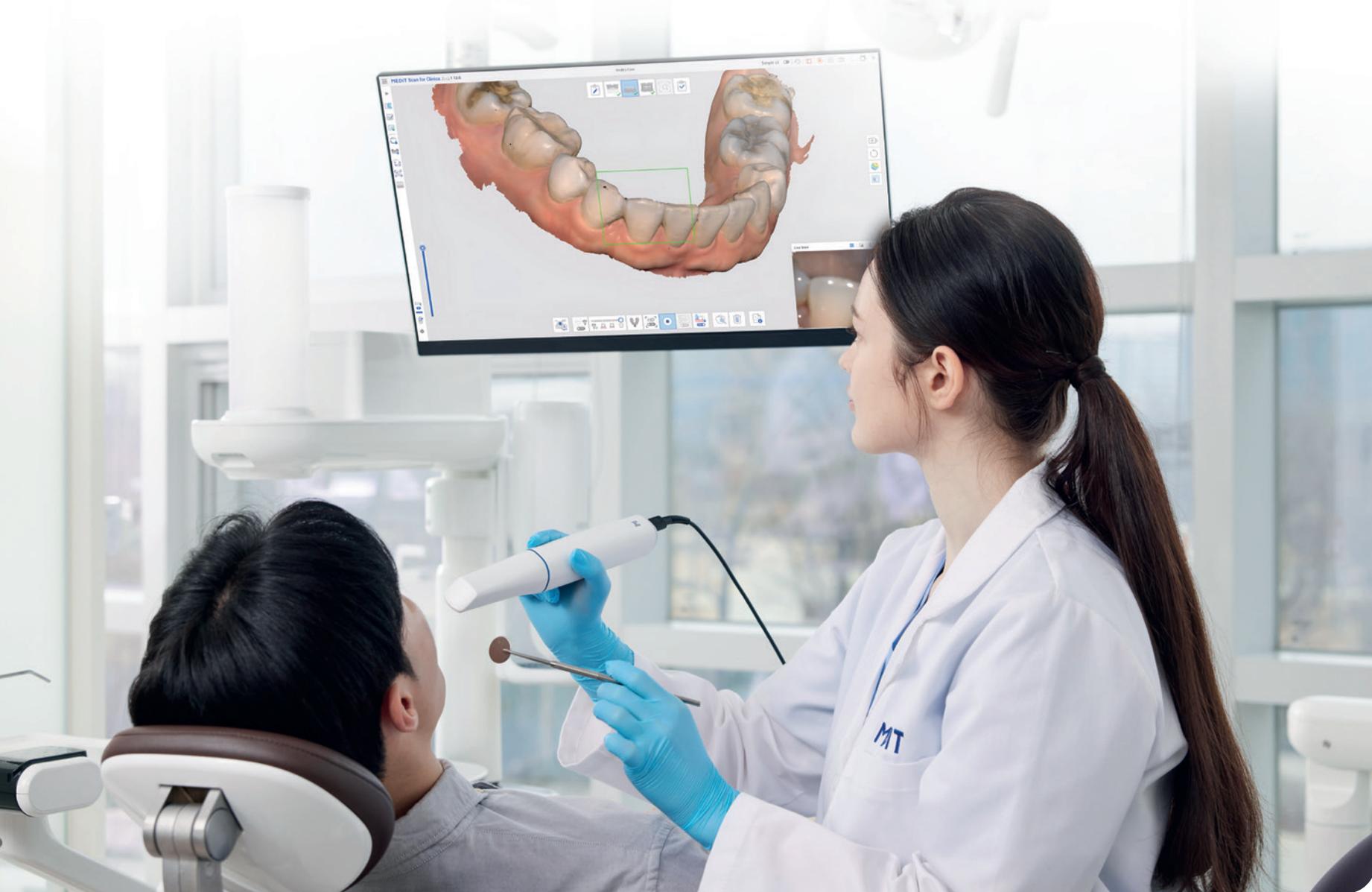

デジタルデンティストリーを変革する Medit *i900*

💡 インプレッションソリューション

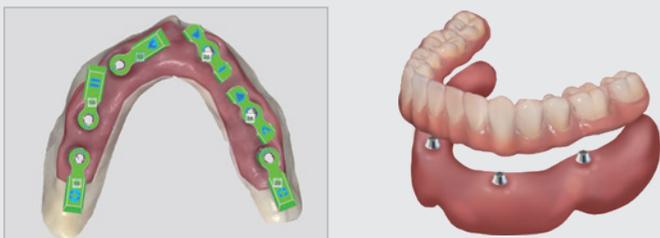

- 初心者からエキスパートまで、直感的なAll-on-Xワークフロー
- 最適化されたスキャンアライメントにより精度を向上
- シンプルなライブラリの選択とアライメントプロセス


🔗 チェアサイドソリューション

- 幅広いパートナーラボとの連携によるMedit Linkのシームレスなワークフロー
- 30社以上のプラグインパートナー企業との連携
- CAD/CAMによるシンプルな補綴修復製作プロセス




🏠 矯正ソリューション

- 患者コンサルテーションのための効果的でリアルなシミュレーション
- 治療計画からアライナー製作までのワークフロー
- コンサルテーション時に矯正歯科治療のシミュレーション

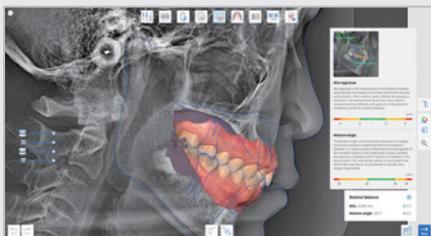


🏠 デンチャーソリューション

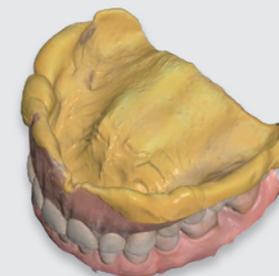

- 撮影範囲が広くなりデンチャーのデジタル化が容易に
- コピーデンチャーを簡単に複製
- 1回のスキャンで印象と仮想的な垂直寸法を測定

🏠 診査診断 & コンサルテーション

- 治療シミュレーション画像で患者の理解度を向上
- 多様なアプリで診査診断およびコンサルテーション
- コンサルテーション結果をエクスポートし、患者と共有

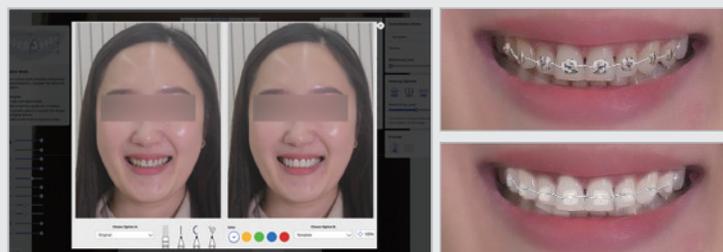

販売名：i900オーラルスキャナ 承認番号：30800BZI00003000

一般名称：デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 特定保守管理医療機器

製造販売元：株式会社ダブリューエスエム 石川県金沢市高尾台3丁目290番地



●販売元

ジンヴィー・ジャパン合同会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084