



YOUR PATH TO PREDICTABLE  
**MEDIT *i*Series**








**簡単な操作でスピーディな  
スキャンを実現します。**

**日々の治療を  
次のレベルへ引き上げる力を  
手に入れましょう。**

# スキャンがこれまで以上に シンプルで、簡単になりました。

## Medit プラグ アンド スキャン

Medit スキャナーは、電源ハブや追加のケーブルを必要とせず、電源供給ケーブルを使用してPCに直接接続できます。  
これにより使いやすさと機動性、メンテナンスのしやすさが向上しました。

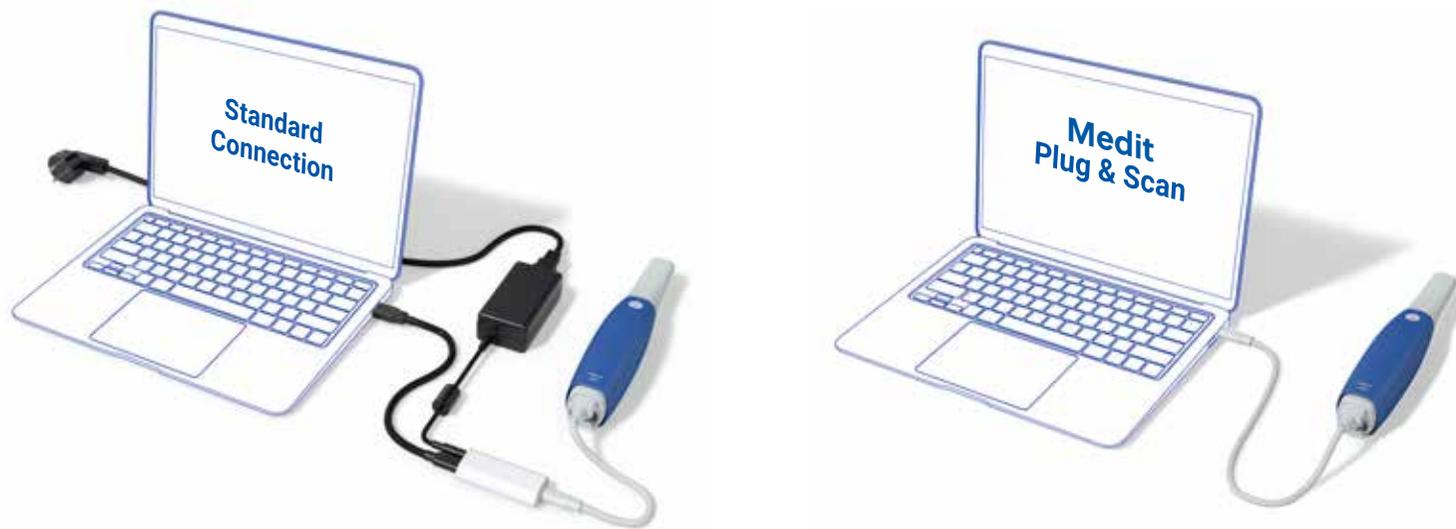

最小システム要件：  
USB Type-C/USB Power Delivery  
5V、3Aの電力供給

# ZimVieによるデジタルデンティストリー



## Medit Linkであなたの治療をデジタル化



Medit スキャナーで作成されたスキャンデータは、Medit Link を介してさまざまなソリューションのワークフローにリンクできます。また、データは、STL、PLY、OBJ などの標準 3D 形式を開くことができる任意のソフトウェアで使用することもできます。

### Medit Link でできること：

クリアアライナー／クラウンとブリッジ／インプラント補綴修復／総義歯と部分義歯／歯列矯正／インプラントサージカルガイド／睡眠時無呼吸装置／歯科模型／3Dプリント

# Medit Link フルオープンシステム

Medit Link でクリニックのデータ管理を始めましょう。



電子カルテプログラムで患者情報と一致するスキャンデータを作成および管理し、さまざまなワークフローの治療ソリューションとリンクします。

- 歯科処置に特化した無料のインテリジェント機能とアプリを使用してスキャンします。
- 患者とのコンサルテーションを向上させ、より良い治療オプションを提供します。
- クラウドベースシステムを通じてリアルタイムなラボとのコミュニケーションを強化します。

Medit Link のクラウドストレージはデータを暗号化して保存し、ウイルスやランサムウェア攻撃に対する信頼性の高い保護を提供します。また、インターネットに接続された PC、タブレット、モバイル デバイスからいつでもどこでも歯科医、患者、ラボ間でデータ共有とリアルタイム通信が可能になります。

# Medit Scan for Clinics で素晴らしいデジタル歯科治療を体験してください。最先端のソフトウェアテクノロジーにより、スキャンがさらに便利になります。

## スキャンングをアシストする様々な機能

### スマートスキャンガイド



強化されたユーザーガイダンスにより、スキャン中に検出された異常に対するサポートが提供されます。

### スマートスキャンフィルタリング




強化されたAIフィルタリング性能により、唇、頬、舌などの軟組織がフィルタリングされスキャンプロセスが容易になります。

### スマートカラーフィルタリング



スキャン中に医療用手袋の色など、登録された色を自動的にフィルタリングします。

### スマートステッチ

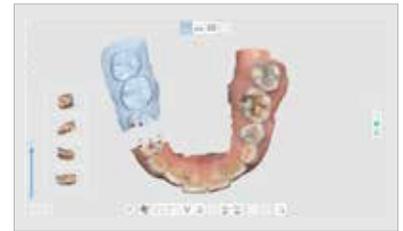

術者独自のスキャンパスでスキャンする事が出来ます。断片化されたスキャンデータは、自動的に検出された共通領域に合わせて表示されます。

## より正確で精度の高いスキャンデータのために

### スマートシェードガイド




スキャンデータから最適な色合いを自動的に識別して提案します。

### AI スキャンボディマッチング




後部位領域など、スキャンが困難な領域でも正確なスキャンデータを確保します。

### AI アバットメントマッチング

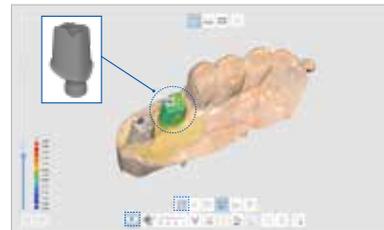

スキャンが難しい状況でも正確なマージンデータを確保します。

### HD モード

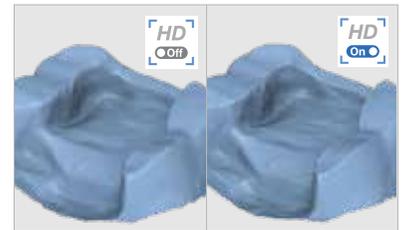

アップグレードされたHDモードにより、余白領域のスキャン画像がより鮮明になります。

# MEDIT i600

## クラス最高の スキャン体験

### 軽量

245gと軽量で、グリップ性も向上し、快適性が向上しました。

### スムーズ

最適なイメージング速度により、安定したスキャン体験が実現します。

### 鮮やかに

MEDIT i700で使用されている新しい光学システムを介して高解像度のスキャンデータを送信します。

# ハイスペックな i700の頭脳を 備えたi600

### 超正確、 超軽量、 超スムーズ。

デジタルワークフローは正確なデータから始まります。  
MEDIT i600は、デジタル歯科治療を楽に行うためにデータを正確に取得します。

#### ※ 高精度

フルアーチ精度：10.9 $\mu$ m $\pm$ 0.98

※ 前部から咬合面までの正確なスキャンデータを取得

# MEDIT i600

## 最もシンプル、最も簡単。

ボタンをクリックするだけで、スキャンを完全にコントロールできます。

多数のケーブルやハブは必要ありません。

PC に直接接続し、ケーブル 1 本で差し込んでスキャンするだけです。



180°リバーシブルチップ



スキャン開始ボタン



取り外し可能なケーブル

# MEDIT i700

MEDIT i700 は、歯科医と患者の両方にとって快適なスキャン体験を実現します。

強力なハードウェアと高性能なソフトウェアの両方を備えたフル機能のMEDIT i700は、クリニックの潜在能力を最大限に引き出す鍵となります。



180°リバーシブルチップ



# MEDIT i700 wireless

## Beyond i700's Proven Tech

i700の超高速、軽量、高精度のハイスペックはそのままに、  
より操作性に優れたワイヤレスへ



### ワイヤレス

コードがないので、どの角度でも快適にスキャンできます。  
前歯部もスキャンしやすく動きを制限されることはありません。



### 高速、正確

最大70FPS<sup>\*</sup>でスムーズで高速なスキャンを可能にします。  
※ フレーム/秒:1秒あたりのスキャンデータのフレーム数



### 超軽量なのに超強力

バッテリー装着時でも非常に軽量なため、操作性に優れス  
キャン中の快適性を向上します。




### 強力なハードウェアと 多用途のソフトウェアの融合

利便性を最適化。ハードウェア面だけでなく、ソフトウェア  
面でも。i700 ワイヤレスには、最新の MEDIT テクノ  
ロジーが満載です。

- フルアーチ精度：10.9 $\mu$ m  $\pm$  0.98
- 最大70FPS

### リバーシブルチップ

上向きに装着可能なため、  
上顎スキャン時でも持ちや  
すい設計です。

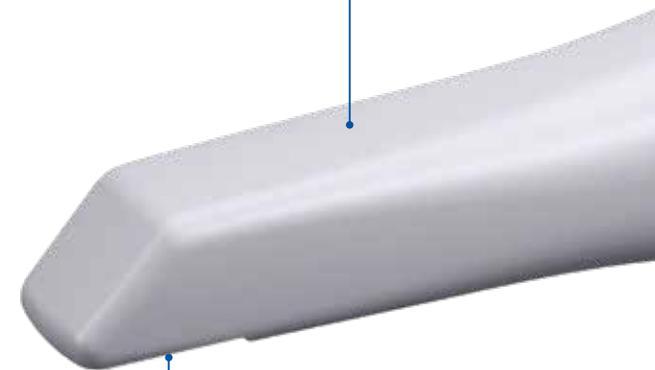

### より広いスキャンエリア

拡大されたスキャンウィンドウは、  
スキャナヘッドの小型化を維持し  
ながら、一度に広範囲を読み込む  
ことができます。

### リモートコントロール

PCに触らずに、スキャナー本体を操作し画面上のスキャンデータを確認できます。

### 60GHz ワイヤステクノロジー

60GHzの高い周波数で大容量データの伝送を高速に行います。



### バッテリー

バッテリー1個で最大30件のケースをスキャン※

### UV-C LEDライト

UV-C LEDによりハンドピース内部を殺菌し、清潔に保ちます。

### 重量バランス設計

バッテリーを装着しても安定した重量バランスで快適にご使用いただけます。

### 自動キャリブレーション

自動ツールでキャリブレーションが簡単になります。



オート  
キャリブレーション  
ツール (別売)

スキャナーのケーブルがなくなると、スキャン動作の制限がなくなります。強化された耐衝撃性により、誤って落下した場合の損傷を最小限に抑えます。i700 ワイヤレスの重量バランス設計により、安定した快適なスキャン体験が実現します。

※ 使用条件により性能が異なる場合があります。



**長時間  
使用可能な  
バッテリー容量**



# 連続スキャン1時間、スタンバイモードで最大8時間

MEDIT i700 wireless

1時間

VS.

スキャナー A


45分

スキャナー B

30分

※ バッテリー時間は使用環境（温度・信号受信強度など）やバッテリーの状態によって異なります。


## 充電を気にせず一日中スキャンできます

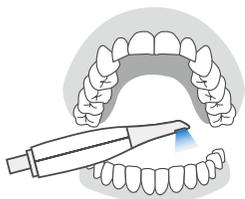

上顎 + 下顎 + 咬合  
合計スキャン時間  
**2分\***



バッテリー1個で  
最大**30**ケース  
をスキャン

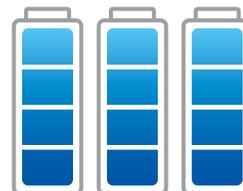

付属バッテリー3個で  
最大**90**ケース  
をスキャン



**8時間**



高性能なインテリジェントパワーマネジメント機能により、未使用時にはデバイスが自動的にスリープモードに切り替わり、最大8時間待機できます。スキャンのためにデバイスを起動するのにわずか数秒です。



### 有線電源接続

付属のバッテリー3個を使い切ってしまった時には、電源ケーブルを接続するだけでスキャナーを使い続けることができます。

※使用条件により性能が異なる場合があります。


# まったく新しいスキャン体験

## 第3世代の新光学エンジン

- 金属および軟組織 スキャン時の向上
- スキャン解像度の向上
- スキャン深度の向上
- 色再現性の向上



正確なスキャンボディデータを簡単に取得

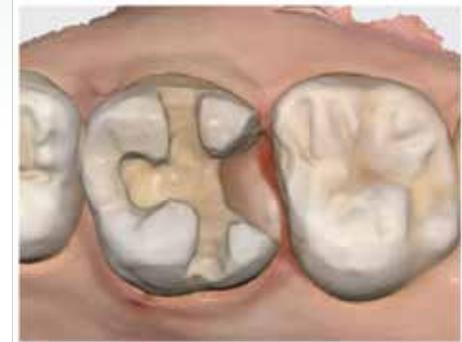

正確なインレーのスキャンが可能

## より広くなったスキャン範囲

- 18 mm × 15 mm (552 × 460 ピクセル)
- 少ないスキャン数でより速く正確なスキャンデータを實現



反射面を効率的にスキャン



詳細なフルアーチスキャンが可能

# MEDIT iシリーズ

タイプ		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 wireless
各種モデル				
スキャン技術	フレーム・レート	35 FPS	70 FPS	70 FPS
	光源	LED		
	曇り止め	○		
精度	フルアーチ	10.9 um + 0.98		
ハンドピース	寸法	248×44×47.4 mm		313×44×47.4 mm
	総重量	245 g		328 g (バッテリー・チップを含む)
チップ	スキャン範囲	15×13 mm		
	オートクレーブ	上限 100 回 重力式 / 121°Cで30分間滅菌し、15分間乾燥 重力式 / 135°Cで10分間滅菌し、30分間乾燥 プレバキュームタイプ / 134°Cで4分間滅菌し、20分間乾燥		
モード	リモートコントロールモード	×		○
	UV-C LED	×		○
	スマートシェードガイド		○	
	HDモード	×		○
MAC OS 互換性			○	
接続方法	コネクショントイプ	ワイヤーあり USB 3.1 ケーブル		ワイヤレスバッテリー付 USB 3.1 ケーブル
	ケーブル接続		○	
	ケーブル取り外し		○	

## 付属品

付属品リスト	i600	i700	i700 wireless
ハンドピース	○	○	○
ハンドピースカバー	○	○	○
パワーハブ	○	○	
wirelessハブ			○
チップ(4個)	○	○	○
キャリブレーションツール	○	○	○
練習用模型	○	○	○
リストストラップ	○	○	○
デスクトップ置き台	○	○	○
壁掛けホルダー	○	○	○
ダイレクトPC接続電源ケーブル(C to C)	○	○	○
USB 3.0ケーブル	○	○	○

付属品リスト	i600	i700	i700 wireless
電源コード	○	○	○
電源アダプター	○	○	
wireless ハブ電源アダプター			○
バッテリー充電用電源アダプター			○
USBフラッシュドライブ (画像取得ソフトウェアがプリロードされています)	○	○	○
ユーザーガイド	○	○	○
充電式バッテリー (3個)			○
延長バッテリーケーブル			○
バッテリー充電器			○
ハンドル			○
700 wireless 通信ハブモニターマウント			○

## PC 推奨スペック

	Windows		Mac OS
	ノート PC	デスクトップ	ノート PC ・ デスクトップ
CPU	Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-13700H Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 7 7735H AMD Ryzen 7 6800H	Intel Core i7-13700K Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 5800X	M1 Pro(10-core CPU, 16-core GPU) M2 (8-core CPU, 10-core GPU) M2 Pro(10-core CPU, 16-core GPU) M3 (8-core CPU, 10-core GPU) M3 Pro(11-core CPU, 14-core GPU)
RAM	32 GB		24 GB
グラフィック	NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 GB 以上) NVIDIA GeForce RTX 3070 (VRAM 8 GB 以上) NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8 GB 以上) ※AMD Radeon はサポートされていません。		—
OS	Windows 11 (12世代以降Intel Core プロセッサ推奨)		Monterey 12, Ventura 13, Sonoma 14, Sequoia 15

---

## ZimVie について

ZimVieは、歯科市場における世界的なライフサイエンスのリーダーであり、歯科治療および補綴修復をサポートするために設計された製品とソリューションの包括的なポートフォリオを開発、製造、提供しています。フロリダ州パームビーチガーデンズの本社と世界各地の施設から、ZimVieは、信頼できる歯科インプラント、生体材料、デジタルワークフローソリューションを含む包括的な歯科治療ソリューションを提供することで、笑顔、機能、日常生活への自信を向上させることに取り組んでいます。

---

## Medit について

Meditは、独自の特許取得済みの最先端技術をベースに、口腔内スキャナーを含む歯科医院やラボ向けの3D測定およびCAD/CAMソリューションを専門としています。また、共同ワークフローをサポートするデジタル歯科用のプラットフォームソリューションも開発しています。当社の目標は、革新的な技術と最高品質の製品を提供し、すべてのパートナーの相互成長を実現することです。

---

## Medit コミュニティ

Medit コミュニティは、オンラインコミュニティプラットフォームを通じて、継続的なフィードバック、新しい治療ワークフローの提案、活発なディスカッションを提供します。

白熱した議論から楽しいチャットまで、Medit コミュニティは情熱的なお客様で常に活気に満ちています。世界中の同僚が積極的にサポートし、助け合い、デジタルデンティストリーチームに新しい同僚を迎えることを心から歓迎しています。参加するにはQRコードをスキャンしてください。

Medit とその同僚のコミュニティは、デジタル歯科への新たな旅をサポートし、幸運を祈っています。

Medit コミュニティ：ユーザーとつながる

Medit アカデミー：外出先でも学習できるリソースライブラリをチェックする

ヘルプセンター：専任のテクニカルサポートチームに連絡する



Medit  
アカデミー



Medit  
ヘルプセンター

●製造販売元 株式会社ダブリューエスエム 石川県金沢市高尾南 2-33-101

●販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社  
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F  
**TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084**